

Amortyzujące koła do wózka inwalidzkiego.

Teraz możesz łatwiej i wygodniej dotrzeć tam, gdzie chcesz. Loopwheels to amortyzujące koła ze zintegrowanym układem zawieszenia, zaprojektowane specjalnie do zamontowania ich do wózka inwalidzkiego, aby jego codzienne użytkowanie było łatwiejsze, wygodniejsze i przyjemniejsze.



Większy komfort

Integralne zawieszenie loopwheel dostosowuje się podczas jazdy do powierzchni co sprawia, że jazda staje się płynniejsza.

Ponadto, wykonane z kompozytu karbonowego loopwheels pochłaniają drgania opon. Jaki jest tego efekt? Mniej wstrząsów oraz mniej drgań, co oznacza, że loopwheels są wygodniejsze niż standardowe koła, niezależnie od powierzchni, po której się poruszasz.

Mniej wysiłku

Z loopwheels odkryjesz, że wcale nie musisz wkładać ogromnego wysiłku do poruszania się po nierównych drogach, chodnikach, bruku, trawie czy żwirze. Łatwiej także jest pokonywać krawężniki. Loopwheels są zaprojektowane tak, aby poradzić sobie na nierównym podłożu, ale także na gładkich powierzchniach.



Większa przyjemność!

Loopwheels idealnie nadają się do rowerów ręcznych oraz innych zmotoryzowanych urządzeń wspomagających. Naprawdę w pełni docenisz możliwość korzystania z tego typu wynalazku, jakim są loopwheels – szczególnie podczas szybkiej jazdy po nierównym podłożu! Oczywiście, istotną kwestią jest ich wspaniały wygląd.

Jak działa Loopwheel?

Znajdujące się w kole pętle to sprężyny, które dopasowują się podczas jazdy - w zależności od powierzchni - do pochłaniania innych sił zewnętrznych oraz wstrząsów.

Są zawieszone na piaście koła. Piasta wykonuje mniejsze i większe ruchy wewnątrz sztywnej obręczy. Zapewnia to płynną jazdę i stanowi bardzo skuteczny system zawieszenia.



Co jest w środku?

Dwa zestawy loopwheels są wyposażone w obręcze; 6 wkładek rozporowych do wszelkich drobnych ustawień osi; instrukcję montażu i roczną gwarancję producenta.

Opcje za dodatkową opłatą: opony i dętki, szybkozłączki osi, silikonowe osłony na obręcze, wyściełana torba na koła.

Jeśli złożysz zamówienie na opony wraz z tulejkami, dostarczymy je od razu gotowe i zamontowane kołach.

Sprężyny Loopwheels oferują dodatkową moc przy pokonywaniu krawężników, jednocześnie zmniejszając wstrząsy przy zjeżdżaniu z nich.



Specyfikacja produktu

Rozmiar kół:	24" and 25"
Numer ETRTO:	25-540 (24 x 1.00 cala) 25-559 (26 x 1.00 cala)
Łożysko osiowe:	½ cala (12.7 mm) and 12 mm
Ciągi:	Wymagane 6-nitowe mocowanie
Środek nitu pomiar:	24" to 515 mm; 25" to 539 mm
Rozciągliwy/pętlowy materiał:	kompozyt węglowy z plastikową tulejką
Ciąg:	Podwójne ścianki z aluminium, czarny
Średnica Siedziska Bead:	16 mm
(BSD)	
Piasta:	Odlew z aluminium, anodyzowane, grafitowo-szare łożyska z uszczelnieniem kasetowym
Szerokość łożyska z przodu:	1.87"
Waga koła 24":	1.8 kg
Waga koła 25":	1.85 kg (bez ciągu, opony czy osi)
Limit Wagowy:	120 kg (265 funtów) 1 para kół
Zalecane opony:	Schwalbe Marathon Plus

Kolory

Kolory sprężyn: czarny, czerwony, fioletowy, pomarańczowy, zielony, niebieski, białe

Kolory logo: czarny, czerwony, żółty, zielony, turkusowy, jasnoniebieski, różowy, fioletowy, szary

Sprężyny Loopwheels oferują dodatkową moc przy pokonywaniu krawężników, jednocześnie zmniejszając wstrząsy przy jeżdżeniu z nich.

Ciągi

Oferujemy szeroką gamę rodzajów ciągów. Proponujemy szerokie (19 mm) lub wąskie (11 mm). Odległość między felgą a ciągiem, jest odpowiednio dopasowana do rozmiaru dłoni oraz do sposobu w jaki napędzasz wózek.

W zestawie standardowym Loopwheel znajduje się czarna, aluminiowa, malowana proszkowo obręcz.

Alternatywnie, możesz wybrać z naszej oferty najwyższej jakości ergonomicznych marek takich jak CarboLife. Loopwheels

Standardowy 6- nitowy montaż my dostarczamy ciągi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.



Szybkozłączki

Loopwheels mają standardowe łożyska osiowe, podobnie jak wszystkie koła w ręcznych wózkach inwalidzkich, dzięki czemu mogą one zostać łatwo wymienione i wyrzucone.

W standardowych kołach loopwheels najczęściej stosowane łożysko ma ½ cala średnicy. My oferujemy również 12 mm średnicy.

Można zastosować własną szybkozłączkę lub kupić u nas.

Wybór akcentu kolorystycznego

Do czarnych loopwheels, dobierz spośród 8 różnych kolorów logo, by uzupełnić kolor wózka lub innych akcesoriów.

Nasze kolory logo: czerwony, żółty, zielony, turkusowy, niebieski, różowy, fioletowy i szary. Czarny jest również dostępny (jest w standardzie do naszych kolorowych loopwheels).




Kolory - opcje



Jako alternatywę dla czerni masz wybór: dlaczego nie zapłacić trochę więcej i wybrać z naszej gamy atrakcyjnych, kół w żywych, jaskrawych kolorach?

Robimy loopwheels w kolorze niebieskim, zielonym, pomarańczowym, fioletowym, czerwonym i także białym - wszystkie z czarnym logo.

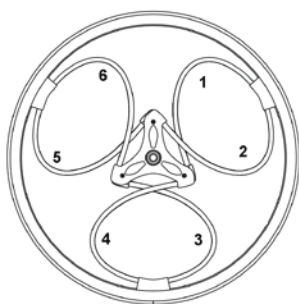

Opcje kilku kolorów

Możesz wybrać parę loopwheels w dowolnej kombinacji kolorystycznej korzystając z oferowanej przez nas gamy kolorów, możesz również dobrać kolor logo według własnego uznania.

Alternatywę stanowi wybór dwóch lub trzech kolorów w celu podkreślenia własnego stylu i wyglądu.

Nasze koło Harlequin posiada loopwheels w sześciu różnych kolorach. (Nasi handlowcy odkryli, że jest to niezwykle przydatna opcja prezentacji w wersji demo!)



Zaprojektowano i wyprodukowano w Anglii

Jelly Products Ltdjak
Unit 202 Boughton Industrial Estate North
NEWARK
Nottinghamshire NG22 9LD
Anglia

Tel: +44 (0)1623 860909
Email: info@loopwheels.com

 **loopwheels.com.**



Loopwheels są zarejestrowanym wzorem (AU344226, ZL2012303462216, EM1312607, JP1460307, NZ4146549, TWD153046, USD675553) wraz z patentem. Nazwa i logo Loopwheels są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Jelly Products Ltd.

Firmy zarejestrowanej pod nr 06012537 | VAT Nr GB 915 6842 07