



rea

# Azalea<sup>®</sup> / Azalea<sup>®</sup> Assist

Gwarantuje komfort oraz  
wiele możliwości regulacji!

Trusted Solutions,  
Passionate People



Yes, you can.®

**Rea Azalea** to naturalny wybór dla średnio aktywnych użytkowników, a także dla tych wymagających większej pomocy osób trzecich. Wygodny system siedzisk pozwala użytkownikowi zmieniać pozycję fotela, zapewniając maksymalny komfort przez cały czas. To w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami jezdny sprawia, że **Azalea** sprawdzi się idealnie w każdej sytuacji. **Azalea** jest wózkiem napędzanym ręcznie, posiada duże tylne koła, jest także ulepszona o alternatywną wersję transit, która posiada tę samą ramę, ale z małymi tylnymi kołami. Wersja ta nosi nazwę **Rea Azalea Assist**. Nowe oparcie - Flex 3 – można regulować na wiele sposobów; dopasować jego wysokość, szerokość; istnieje również możliwość dopasowania go do kształtu ciała. Wózek jest dostępny w 5 kolorach podwozia i 3 różnych materiałach tapicerskich.

## Odchylane i rozkładane oparcie zapewnia dodatkowy komfort

**Rea Azalea** i **Rea Azalea Assist** mają odpowiednio:

- odchylenie siedziska 25 °
- rozkładane oparcie do 30 °.

Zarówno pochylanie, jak i rozkładanie może zostać łatwo wyregulowane ręcznie lub automatycznie przez opiekuna, a w wersji elektrycznej przez samego użytkownika.

Oparcie ma biomechaniczny zawias pozycjonujący, który podąża za naturalnym ruchem pleców użytkownika podczas regulacji kąta nachylenia oparcia.

W połączeniu z funkcją odchylania fotela, system DSS (Dual Stability System) pomaga zapobiegać odleżynom dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu ciała nie narażając go na tarcie.

## Opcje i właściwości



### Płyta oparcia Flex 3

Oprócz regulacji wysokości, istnieje również regulacja szerokości.



### Regulowany naciąg oparcia Flex 3

Regulowane na wiele sposobów oparcie pod względem wysokości i szerokości zależnie od kształtu ciała.



### Szeroka gama opcji

Indywidualne regulacje szerokości w podłokietnikach i podnóżkach oraz akcesoria dla poszczególnych opcji.

## Dane techniczne

**W celu uzyskania pełniejszych informacji na temat tego produktu, w tym instrukcji obsługi, sprawdź**

**<http://www.invacare-eu-export.com/rea-azalea>**

	Szerokość siedziska	Głębokość siedziska	Wysokość siedziska	Wysokość	Wysokość boczka	Podnóżki	Kąt siedziska	Kąt oparcia
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	390-440/ 440-490/ 490-540 (390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	Płyta oparcia: 560-790 mm Regulowany naciąg oparcia 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1° to 23° (+1° to 25°)	0°-30°

	Szerokość jednostki napędowej	Wysokość całkowita	Długość całkowita z podnóżkami	Waga całkowita	Maksymalna waga użytkownika	Waga transportowa	Po testach wypadkowych	Maksymalne nachylenie do użycia hamulca postojowego
<b>Rea Azalea &amp; Azalea Assist</b>	SW + 220 mm (SW + 230 mm)	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SW 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg <sup>1</sup>	ISO 7176-19	7°

1. Waga transportowa wzrasta o 4,2 kg, gdy używana jest opcja pochylania i rozkładania.

## Kolor ramy

Pearl Grey

Azurite Blue

Sand

Happy Red


Electric Green



## Tapicerka

Black Dartex TR26

Black plush TR35

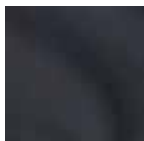

Skanuj tutaj, by uzyskać dostęp:  
[www.invacare-eu-export.com](http://www.invacare-eu-export.com)

Telefon + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 40  
Fax + 49 (0) 57 31 / 7 54-5 41  
E-mail [edo@invacare.com](mailto:edo@invacare.com)  
[www.invacare-eu-export.com](http://www.invacare-eu-export.com)

Invacare EU-Export  
Kleiststraße 49  
32457 Porta Westfalica  
Niemcy

rusted Solutions,  
Passionate People



Yes, you can.®