

matrx[®]
SEATING SERIES

Oparcie MX2



Specjalnie zaprojektowane oparcie
z włókna węglowego zapewniające
wyjątkową stabilność i najwyższą
wydajność



Yes, you can.

Oparcie **MX2** to ultralekki produkt o świeżym wyglądzie i atrakcyjnym wzornictwie. **MX2** został zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach, a jednocześnie może stanowić stylowy dodatek do każdego lekkiego wózka. To oparcie oferuje wyjątkowe podparcie dolnej części tułowia i miednicy, dodając komfortu i stabilności dla optymalizacji funkcjonalności – niezależnie od tego, czy chodzi o samodzielne poruszanie się, czy o codzienne czynności. Dzięki **MX2** masz wszystko – estetykę, wsparcie, wygodę i funkcjonalność.



Lekka obudowa z włókna węglowego

MX2 został specjalnie zaprojektowany z wykorzystaniem kilku warstw włókna węglowego, aby zoptymalizować elastyczność i amortyzację wstrząsów. Oznacza to, że oparcie będzie elastyczne, a tym samym dostosuje się do ruchów użytkownika, pomagając jednocześnie utrzymać go w odpowiedniej pozycji; a to jest dokładnie to, czego potrzebuje aktywny użytkownik – stabilna swoboda ruchu. Oparcie będzie również odgrywać ważną rolę w tłumieniu drgań, szczególnie w połączeniu z osprzętem mocującym z włókna węglowego, który umożliwia użytkownikom bardziej komfortową jazdę.

Idealny kształt

MX2 oferuje 76 mm głębokości anatomicznego ułożenia w celu zwiększenia stabilności bocznej i zanurzenia tułowia. Boczne wycięcia na biodra zapewniają większą swobodę ruchu; idealne podczas pochylania się na bok w celu odciążenia lub sięgania po przedmioty. Wycięcie na łopatkę zapewnia swobodę ruchu łopatki bez utraty stabilizacji, umożliwiając użytkownikowi wydajne samodzielne poruszanie się, nawet przy wyższym oparciu.



Opcje i właściwości

Oparcie

- Dostępne w czterech wysokościach i pięciu szerokościach, dzięki czemu każdy znajdzie idealne dopasowanie
- Wycięcia zapewniające właściwą cyrkulację powietrza
- Szczelinowa konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości, nawet gdy użytkownik siedzi na wózku
- Oddychający pokrowiec Spacetex; oparcia o szerokości 230 mm lub wyższe są wyposażone w boczne panele ze skóry ekologicznej
- Pianka oversize zapewniająca większy komfort i ochronę



Łatwy montaż osprzętu

MX2 jest dostępny z dwoma rodzajami osprzętu – stałym mocowaniem lub na szybkozłączkach – oba umożliwiają regulację 3D w zakresie:

- Wysokości
- Głębokości (76 mm ze stałym mocowaniem; 108 mm ze szybkozłączką) i regulacji kąta (+/- 15° bezstopniowo)
- Obrotu

Osprzęt oparcia jest również regulowany na szerokość, co pozwala na dopasowanie oparcia do wózków inwalidzkich, które są do 25 mm węższe lub szersze niż rzeczywista szerokość oparcia – idealna opcja dla osób o szerszych plecach i węższych biodrach lub wąskich plecach i szerszych biodrach. Wszystkie te możliwości regulacji zapewniają precyzyjne dopasowanie i pozycjonowanie w każdym wózku ze sztywną lub składaną ramą o średnicy rury oparcia wynoszącej 19 mm, 22 mm i 25 mm.



Mocowanie stałe

Wykonane z płyty z włókna węglowego, co pozwala na redukcję ogólnej masy.

Szybkozłączka

Łatwa do zdejmowania w celu przenoszenia.



Opcje i właściwości

Kłapa

Opcjonalna kłapa dająca poczucie dyskrekcji, zakrywająca otwór między siedziskiem i oparciem.



Podkładka pozycjonująca

W standardzie znajduje się podkładka pod odcinek lędźwiowy, zapewniająca podparcie dolnej części pleców osobom potrzebującym dodatkowego komfortu.

MX2 Deep - Kliny boczne

Zapewnia dodatkowe wsparcie i stabilność środka ciężkości - 85 mm dodatkowego głębokiego profilu w stosunku do standardowego profilu oparcia. Podkładka 140 mm H (wys.) x 76 mm L (dł.)

Dane techniczne


Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

	Szerokość	Wysokość	Regulacja kąta	Regulacja głębokości	Waga całkowita produktu	Temperatura czyszczenia pokrowca	Maksymalna waga użytkownika	Ograniczona gwarancja
Matrx MX2	355, 380, 405, 430, 455 mm	150, 230, 310, 410 mm	+/- 15°	76 mm ¹ 108 mm ²	od 770 g wzwyż (z dołączonym stałym osprzętem)	60°	113 kg	2 lata

1. Z osprzętem stałym
2. Z osprzętem na szybkolączkach

Kolor

Tkanina - siateczka Tex

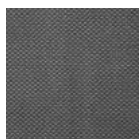

Tel: +44 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544



Yes, you can.®



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23

matrx[®]
SEATING SERIES

Oparcia E2 Back Series



Invacare[®] **Matrx[®] E2[™] Back Series**

INNOWACJA | KOMFORT | WOLNOŚĆ



Yes, you can.

Wsparcie postawy ciała - niezależna mobilność

Nowe oparcie **E2 Back Support** to nasza najnowsza innowacja w zakresie pozycjonowania siedzenia, oferująca maksymalne wsparcie postawy ciała u osób o ograniczonej mobilności. Dzięki kołkom montażowym dla bezproblemowego i łatwego montażu, **E2 Back Support** jest również dostępne w szerszym zakresie szerokości i wysokości co daje maksymalne dopasowanie. Nowa technologia **Ripple Foam** gwarantuje kontrolę temperatury i lepsze zanurzenie, tym samym zapewniając najwygodniejsze podparcie ciała w historii.

Ergonomiczna konstrukcja

Nowa, ergonomiczna konstrukcja zwiększa wsparcie i rozkład nacisku, aby zapewnić bardziej precyzyjne i wygodne dopasowanie. Oparcie zostało wyprofilowane tak, aby podierać miednicę i umożliwić prześwit w okolicy bioder w celu zwiększenia stabilności i równowagi.



Obudowa

- ▶ Wycięcia zapewniające przepływ powietrza
- ▶ Pionowe szczeliny do mocowania osprzętu
- ▶ Wcięcie na kość ogonową
- ▶ Wstępnie nawiercone otwory pod podparcie brzucha PostureFlex



Technologia pianki Ripple

Pofalowana powierzchnia pianki zwiększa przepływ powietrza, zapewniając odpowiednią cyrkulację, kontrolę temperatury i redukcję wilgoci. Pianka o wysokiej sprężystości odciąża kręgosłup, zapewnia lepsze zanurzenie i redukcję sił ścinających.



Pokrowiec

- ▶ Odporny na wilgoć i oddychający pokrowiec zewnętrzny Meshtex™
- ▶ Pianka i powłoka zachodzą na obudowę, zapewniając ochronę i wygodę



Zespół kołków montażowych

Oparcia są montowane do wózka i zabezpieczane za pomocą łatwego w regulacji kołka montażowego. Elastyczne okucia są zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych kształtów i rozmiarów ciała; można je nawet regulować, gdy użytkownik siedzi na wózku. Można je również ustawić tak, aby ominąć przeszkody w ramie - takie jak podłokietniki, wszelkie usztywnienia, itp.



Kołki montażowe

- ▶ Regulowana wysokość i szerokość
- ▶ Pasuje do wózków o takiej samej szerokości jak model lub o 2,5 cm szerszych/węższych
- ▶ Wysokość oparcia można regulować nawet wtedy, gdy użytkownik siedzi na wózku
- ▶ Sprzęt można ustawić tak, aby ominąć przeszkody w postaci podłokietników i innych usztywnień
- ▶ Standardowy interfejs MiniSet na wysokościach oparcia do 41 cm, standardowy interfejs EasySet na wysokościach oparcia 46/51 cm

Oparcie Matrix E2 Back Support jest dostępne w dwóch rodzajach profilowanych głębokości



▲ **E2 Back**
E2 Standard - Profil 8cm

▲ **E2 Deep Back**
E2 Deep - Profil 15cm

Specyfikacja Produktu

- ▶ Szerokość: 36/38/41/43/46/48/51cm
- ▶ Wysokość: **NOWOŚĆ** 15/20/26/31/36/41/46/51cm
- ▶ Udźwig: 136kg.



Łatwe w montażu kliny boczne

- ▶ Stałe kliny boczne można zamontować wewnątrz lub na zewnątrz tylnej obudowy
- ▶ Regulowana wysokość w pionowym otworze, można przesunąć
- ▶ Kompatybilne ze standardowymi oparciami E2 o profilu 26 cm i wyższym

Montaż wewnątrz Montaż na zewnątrz



Odchylane kliny boczne

- ▶ Standardowo kompatybilny z oparciami E2 o szerokości 26 cm i wyższymi, wyrównanie z oparciami o szerokości 31 cm i wyższymi
- ▶ Dostępne w 4 rozmiarach podkładki: XS / S / M / L

Pełna gama akcesoriów



▲ Kręgosłup

Podparcie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa oddziałuje na miednicę, pomagając zachować wyprostowaną postawę.

- Wyprofilowane anatomiczne podparcie PSIS/krzyżowo-lędźwiowe.
- Można przyciąć do pożądanego rozmiaru.
- Formowane zapięcie na pętelkę do mocowania do tylnej obudowy i w celu łatwej regulacji.



▲ Pokrowiec antypoślizgowy Matrix Protect Slip

Aby chronić oparcie. Można czyścić atestowanymi chusteczkami dezynfekującymi, aby zapewnić większą higienę. Łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu do prania.



▲ Podparcie brzucha PostureFlex

Zaprojektowane w celu zwiększenia ciśnienia wewnątrz brzucha dla lepszej kontroli głosu i oddechu. Zapewnia wygodną, wyprostowaną postawę ciała z elastycznym rozciąganiem dla czynności funkcjonalnych.

Łatwe mocowanie w kształcie dziurki od klucza

- Dostępne 3 wysokości montażu w wywierconych otworach na tylnej obudowie.
- Dostępne w 2 rozmiarach: M / L
- Opcjonalna poczwórna zapadka dla łatwego i samodzielnego zakładania oraz zdejmowania PostureFlex



▲ Płyta interfejsu zagłówka

Lekka płyta o niskim profilu, mocująca zagłówek. Może być zainstalowana bez zdejmowania pokrowca. Dołączona do wszystkich oparc o szerokości 36 cm i wyższych. Opcjonalny, wyjątkowo mocny stalowy uchwyt zagłówka do ekstremalnych zastosowań lub intensywnego użytkowania.



▲ Płyta interfejsu paska na ramię

Płyta interfejsu do precyzyjnego umieszczania prowadnic paska. Modele: E2CHI-S: 36/38 cm szerokości pleców E2CHI-M: 41 do 51 cm szerokości pleców



▲ Klapy Matrix

Można je przymocować do oparcia za pomocą wstępnie wszytej pętelki umieszczonej w dolnej części poszewki na poduszkę. Dostępne w 4 rozmiarach: XS / S / M / L

Pełna gama mocowań osprzętu ▼

do różnego rodzaju zastosowań i większej kompatybilności z naszymi wózkami inwalidzkimi

Standardowy osprzęt



MiniSet:

- Standardowo we wszystkich oparciach E2/E2D o wysokości do 41 cm



EasySet:

- Standardowo we wszystkich oparciach E2/E2D o szerokości 46 cm i 51 cm

Opcjonalny osprzęt



Staly MiniSet:

- Montaż na stałe wymaga użycia narzędzi do demontażu, zalecany do rozwiązań z opcją pochylenia/kołyski
- Opcjonalnie tylko dla tylnych paneli E2/E2D z interfejsem Easy Set Mounting Pin, niekompatybilny z MiniSet



Staly EasySet:

- Montaż na stałe wymaga użycia narzędzi do demontażu, zalecany do rozwiązań z opcją pochylenia/kołyski
- Tylko opcjonalnie dla głębokich oparc E2/E2 z interfejsem Easy Set Mounting Pin (wysokość 46 i 51 cm)



Split:

- Umożliwia prześwit nad przeszkodami w ramie, na szybkozłączkach
- Opcjonalnie tylko dla tylnych paneli E2/E2D z interfejsem Easy Set Mounting Pin, niekompatybilny z MiniSet



Heavy-Duty MiniSet:

- Zalecany dla cięższych użytkowników lub przy intensywnym użytkowaniu
- Szybkozłączki



Heavy-Duty EasySet:

- Zalecany dla cięższych użytkowników lub przy intensywnym użytkowaniu

Regulacje: Kąt (40°), głębokość (5 cm z przodu lub za tylnymi rurkami oparcia można przesunąć, aby umożliwić obrót.

Dopasowania: Rurki o długości 2,5 cm, w zestawie wkładki do rurek o długości 1,9 cm i 2,2 cm

Zbuduj rodzinę produktów do pozycjonowania siedzenia

Firma Invacare oferuje również pełną gamę produktów do siedzenia, które uzupełnią Twoje oparcie E2.



Pas Bodypoint



Poduszka Invacare Matrx® Libra



Zagłówek Invacare Matrx® Elan



Tel: +44 61 487 70 70
hqueurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom
ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy: ul.
Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy: ul.
Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544



Yes, you can.®



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23

matrx[®]
SEATING SERIES

Seating Series



**Tak, dasz radę...
i nigdy wcześniej nie było tak łatwo!**



Yes, you can.

Biorąc pod uwagę liczbę dostępnych obecnie nowych produktów do pozycjonowania, do siedzenia, naturalnym jest wybór tych, które znasz najlepiej. Seria **siedzisk Matrx** firmy **Invacare (Invacare Matrx Seating Series)** w połączeniu z szeroką gamą poduszek firmy **Invacare** zapewnia rozwiązanie, które jest wysoce skuteczne w spełnianiu najszerzego zakresu potrzeb użytkowników. Ta broszura jest źródłem informacji o serii **siedzisk Matrx** firmy **Invacare**.

Firma **Invacare** zobowiązuje się do dostarczania produktów, które przewyższą Twoje oczekiwania. Wraz ze zmianą projektu siedzisk, zaangażowanie **Invacare** w innowacyjność, jakość, a przede wszystkim zapewnienie komfortu użytrkownikom pozostaną takie same.

Oparcie Invacare Matrx® Elite



Oparcie Invacare **Matrx Elite** zaprojektowano tak, aby zapewniało poczucie pewności siedząc na wózku, dając tym samym optymalne podparcie ciała. Atrakcyjna, lekka konstrukcja jest idealna dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia.

8 cm - głębokość profilu



Podparcie krzyżowo-lędźwiowe

Ośłona zewnętrzna:

- Pokrowiec/pianka oversize dające dodatkowy komfor i ochronę
- Odporna na wilgoć i z oddychającego materiału
- Zawiera wyjmowaną podkładkę lędźwiową

Osprzęt (zamawiany osobno):

- Osprzęt montowany i regulowany w ciągu kilku minut – regulacje można wykonywać, gdy użytkownik siedzi na wózku
- Dostępne osprzęty montażowe: Easy Set, Split lub Fixed (stały)
- Zobacz na stronie 8 - zakładka Hardware (osprzęt)

Obudowa

- Stylowa i oddychająca tylna obudowa
- Lekka - większość modeli poniżej 1,36 kg

Podparcie krzyżowo-lędźwiowe:

- Zawiera wyjmowaną podkładkę pozycjonującą

* Opcjonalny styl Full Back (pełne oparcie) – bez wycięć na łopatki

Standard			
Szerokość	31 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 46 cm, 51 cm	Kod produktu	Szerokość
Wysokość	26 cm, 31 cm, 36 cm, 41 cm, 46 cm, 51 cm		Wysokość
Udźwig	136 kg		Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego

Kod produktu	Szerokość	Wysokość	Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego
PBE3126NH	31 cm	26 cm	31-33 cm
PBE3131NH	31 cm	31 cm	31-33 cm
PBE3136NH	31 cm	36 cm	31-33 cm
PBE3141NH	31 cm	41 cm	31-33 cm
PBE3146NH	31 cm	46 cm	31-33 cm
PBE3326NH	33 cm	26 cm	33-36 cm
PBE3331NH	33 cm	31 cm	33-36 cm
PBE3336NH	33 cm	36 cm	33-36 cm
PBE3341NH	33 cm	41 cm	33-36 cm
PBE3346NH	33 cm	46 cm	33-36 cm
PBE3626NH	36 cm	26 cm	36-38 cm
PBE3631NH	36 cm	31 cm	36-38 cm
PBE3636NH	36 cm	36 cm	36-38 cm
PBE3641NH	36 cm	41 cm	36-38 cm
PBE3646NH	36 cm	46 cm	36-38 cm
PBE3651NH	36 cm	51 cm	36-38 cm
PBE3826NH	38 cm	26 cm	38-41 cm
PBE3831NH	38 cm	31 cm	38-41 cm
PBE3841NH	38 cm	41 cm	38-41 cm
PBE3846NH	38 cm	46 cm	38-41 cm
PBE3851NH	38 cm	51 cm	38-41 cm

Kod produktu	Szerokość	Wysokość	Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego
PBE4126NH	41 cm	26 cm	41-43 cm
PBE4131NH	41 cm	31 cm	41-43 cm
PBE4141NH	41 cm	41 cm	41-43 cm
PBE4146NH	41 cm	46 cm	41-43 cm
PBE4151NH*	41 cm	51 cm	41-43 cm
PBE4326NH	43 cm	26 cm	43-46 cm
PBE4331NH	43 cm	31 cm	43-46 cm
PBE4341NH	43 cm	41 cm	43-46 cm
PBE4346NH	43 cm	46 cm	43-46 cm
PBE4351NH*	43 cm	51 cm	43-46 cm
PBE4626NH	46 cm	26 cm	46-48 cm
PBE4631NH	46 cm	31 cm	46-48 cm
PBE4641NH	46 cm	41 cm	46-48 cm
PBE4646NH	46 cm	46 cm	46-48 cm
PBE4651NH*	46 cm	51 cm	46-48 cm
PBE4826NH	48 cm	26 cm	48-51 cm
PBE4831NH	48 cm	31 cm	48-51 cm
PBE4841NH	48 cm	41 cm	48-51 cm
PBE4846MH	48 cm	46 cm	48-51 cm
PBE4851NH*	48 cm	51 cm	48-51 cm
PBE5126NH	51 cm	26 cm	51-53 cm
PBE5131NH	51 cm	31 cm	51-53 cm
PBE5141NH	51 cm	41 cm	51-53 cm
PBE5146NH	51 cm	46 cm	51-53 cm
PBE5151NH*	51 cm	51 cm	51-53 cm

Oparcie Invacare Matrx Elite Deep Back



Oparcie **Invacare Matrx Elite Deep Back** zostało zaprojektowane z bocznymi podparciami, aby zapewnić stabilizację tułowia, jednocześnie dając przestrzeń dla ramion i bioder. Oferuje prowadzenie linii środkowej z głębokich boków o smukłej konstrukcji, aby umożliwić funkcjonalność.

16 cm - głębokość profilu



Podparcie krzyżowo-lędźwiowe

Kod produktu	Szerokość	Wysokość	Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego
EDB3631NH	36 cm	31 cm	36-38 cm
EDB3641NH	36 cm	41 cm	36-38 cm
EDB3646NH	36 cm	46 cm	36-38 cm
EDB3651NH	36 cm	51 cm	36-38 cm
EDB3831NH	38 cm	31 cm	38-41 cm
EDB3841NH	38 cm	41 cm	38-41 cm
EDB3846NH	38 cm	46 cm	38-41 cm
EDB3851NH	38 cm	51 cm	38-41 cm
EDB4131NH	41 cm	31 cm	41-43 cm
EDB4141NH	41 cm	41 cm	41-43 cm
EDB4146NH	41 cm	46 cm	41-43 cm
EDB4151NH	41 cm	51 cm	41-43 cm
EDB4331NH	43 cm	31 cm	43-46 cm
EDB4341NH	43 cm	41 cm	43-46 cm

Głębokość			
Szerokość	36 cm, 41 cm, 43 cm, 46 cm, 51 cm	Kod produktu	Szerokość
Wysokość	31 cm, 41 cm, 46 cm, 51 cm		Wysokość
Udźwig	136 kg		Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego

EDB4346NH	43 cm	46 cm	43-46 cm
EDB4351NH	43 cm	51 cm	43-46 cm
EDB4631NH	46 cm	31 cm	46-48 cm
EDB4641NH	46 cm	41 cm	46-48 cm
EDB4646NH	46 cm	46 cm	46-48 cm
EDB4651NH	46 cm	51 cm	46-48 cm
EDB4831NH	48 cm	31 cm	48-51 cm
EDB4841NH	48 cm	41 cm	48-51 cm
EDB4846NH	48 cm	46 cm	48-51 cm
EDB4851NH	48 cm	51 cm	48-51 cm
EDB5131NH	51 cm	31 cm	51-53 cm
EDB5141NH	51 cm	41 cm	51-53 cm
EDB5146NH	51 cm	46 cm	51-53 cm
EDB5151NH	51 cm	51 cm	51-53 cm

Pokrowce Elite Back

Kod produktu	Opis	Kod produktu	Opis
PBEC3126	Fits PBE3126	PBEC4141	Fits PBE4141
PBEC3131	Fits PBE3131	PBEC4146	Fits PBE4146
PBEC3136	Fits PBE3136	PBEC4151	Fits PBE4151
PBEC3141	Fits PBE3141	PBEC4326	Fits PBE4326
PBEC3146	Fits PBE3146	PBEC4331	Fits PBE4331
PBEC3326	Fits PBE3326	PBEC4341	Fits PBE4341
PBEC3331	Fits PBE3331	PBEC4346	Fits PBE4346
PBEC3336	Fits PBE3336	PBEC4351	Fits PBE4351
PBEC3341	Fits PBE3341	PBEC4626	Fits PBE4626
PBEC3346	Fits PBE3346	PBEC4631	Fits PBE4631
PBEC3626	Fits PBE3626	PBEC4641	Fits PBE4641
PBEC3631	Fits PBE3631	PBEC4646	Fits PBE4646
PBEC3636	Fits PBE3636	PBEC4651	Fits PBE4651
PBEC3641	Fits PBE3641	PBEC4826	Fits PBE4826
PBEC3646	Fits PBE3646	PBEC4831	Fits PBE4831
PBEC3651	Fits PBE3651	PBEC4841	Fits PBE4841
PBEC3826	Fits PBE3826	PBEC4846	Fits PBE4846
PBEC3831	Fits PBE3831	PBEC4851	Fits PBE4851
PBEC3841	Fits PBE3841	PBEC5126	Fits PBE5126
PBEC3846	Fits PBE3846	PBEC5131	Fits PBE5131
PBEC3851	Fits PBE3851	PBEC5141	Fits PBE5141
PBEC4126	Fits PBE4126	PBEC5146	Fits PBE5146
PBEC4131	Fits PBE4131	PBEC5151	Fits PBE5151

Pokrowce pełne (Full Back Covers)

Kod produktu	Opis
PBEC4151-FB	Fits PBE4151-FB
PBEC4351-FB	Fits PBE4351-FB
PBEC4651-FB	Fits PBE4651-FB
PBEC4851-FB	Fits PBE4851-FB
PBEC5151-FB	Fits PBE5151-FB

Pokrowce Elite Deep Back

Kod produktu	Opis	Kod produktu	Opis
EDBC3631	Fits EDB3631	EDBC4351	Fits EDB4351
EDBC3641	Fits EDB3641	EDBC4631	Fits EDB4631
EDBC3646	Fits EDB3646	EDBC4641	Fits EDB4641
EDBC3651	Fits EDB3651	EDBC4646	Fits EDB4646
EDBC3831	Fits EDB3831	EDBC4651	Fits EDB4651
EDBC3841	Fits EDB3841	EDBC4831	Fits EDB4831
EDBC3846	Fits EDB3846	EDBC4841	Fits EDB4841
EDBC3851	Fits EDB3851	EDBC4846	Fits EDB4846
EDBC4131	Fits EDB4131	EDBC4851	Fits EDB4851
EDBC4141	Fits EDB4141	EDBC5131	Fits EDB5131
EDBC4146	Fits EDB4146	EDBC5141	Fits EDB5141
EDBC4151	Fits EDB4151	EDBC5146	Fits EDB5146
EDBC4331	Fits EDB4331	EDBC5151	Fits EDB5151
EDBC4341	Fits EDB4341		
EDBC4346	Fits EDB4346		

Należy pamiętać, że dla wygody wymiary zostały zaokrąglone do najbliższego centymetra. Aby uzyskać dokładniejsze wymiary w milimetrach, zapoznaj się ze Specyfikacjami technicznymi na stronach 10 i 11.

Opcje podpórek bocznych dla oparc Matrix Elite Back



Stale

6 cm regulacji w pionie w tylnej obudowie. Zamontuj wewnątrz tylnej obudowy bez ingerencji w regulację głębokości/kąta. Dostępne w standardowej długości 19 cm x wysokości 13 cm i pediatrycznej długości 14 cm x wysokości 8 cm.

- PBL-S-L Standardowy, lewy klin boczny (każdy) w komplecie z podkładką (19 cm dł. x 13 cm wys.).
- PBL-S-R Standardowy, prawy klin boczny (każdy) w komplecie z podkładką (19 cm dł. x 13 cm wys.).

- PBSS-L mały, lewy klin boczny (każdy) w komplecie z podkładką (14 cm dł. x 8 cm wys.).
- PBSS-R - mały, prawy klin boczny (każdy) w komplecie z podkładką (14 cm dł. x 8 cm wys.).



Offset Fixed - wyrównanie stałe

Zapewnia dodatkowe 8 cm w pionowej pozycji (wyżej lub niżej) w stosunku do otworów montażowych. Dostępne wymiary: dł - 19 cm x wys.- 13 cm.

- PBOL-L LUB PBOL-R Offset lewy lub prawy, stały klin boczny, w komplecie z podkładką (każdy).



Odchylane

6 cm pionowej regulacji na tylnej płycie. Montaż wewnątrz obudowy tylnej bez zakłócania regulacji głębokości/kąta. Łatwy demontaż (szybkoszłącza) , 4 rozmiary podkładek. Całkowicie odchyła się za plecy. Nie przeszkadza w odchyłaniu ramion. Podkładki należy zamawiać osobno (patrz poniżej).

- SAHEB, odchylane w lewo lub w prawo kliny boczne (każdy).




Offset Swing-Away - wyrównanie z odchyleniem

Zapewnia dodatkowe 8 cm w pozycji pionowej (wyżej lub niżej). Montaż wewnątrz tylnej płyty bez zakłócania regulacji głębokości/kąta. Łatwy demontaż (szybkoszłącza), 4 rozmiary podkładek. Podkładki zamawiane oddzielnie (patrz „Podkładki boczne” poniżej).

- OSAH-L LUB OSAH-R - kliny boczne Offset (wyrównanie) w lewo lub w prawo, odchylane (każdy).

Należy pamiętać, że dla wygody wymiary zostały zaokrąglone do najbliższego centymetra. Aby uzyskać dokładniejsze wymiary w milimetrach, zapoznaj się ze Specyfikacjami technicznymi na stronach 10 i 11.

Opcje zagłówków

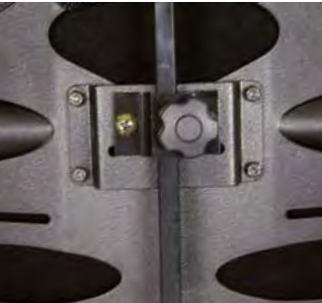

Adapter zagłówka

Umożliwia montaż zagłówka bezpośrednio na oparciach *Invacare Matrix Elite*. Dostępny w 3 rozmiarach. ■ Mały: Do mocowania zagłówków do oparc *Elite* o szerokości 31 cm ■ Średni: Do mocowania zagłówków do oparc *Elite* o szerokości 33 - 43 cm ■ Duży: Do mocowania zagłówków do oparc *Elite* o szerokości 46 - 51 cm



Zestaw zagłówków Soft Pad (miękkie) - PHRK

- Regulacja wielokierunkowa osprzętu - funkcja Multi-Axis
- Głębokość regulowana za pomocą poziomego suwaka
- 25 cm - miękka podkładka



Wzmocnienie wycięcia zagłówka

Oparcia *Matrix PB* i *Elite* są przygotowane do łatwego mocowania zagłówków poprzez wstępnie wywiercone otwory i wycięty obszar na tapicerce zewnętrznego pokrowca. Zapobiega to strzępieniu się materiału, a także umożliwia łatwe zdjęcie pokrowca w celu wyprania bez konieczności zdejmowania płytki mocującej zagłówek.



Podkładki boczne

Do stosowania w połączeniu z klinami bocznymi odchylanymi i Offset SwingAway (dla oparc Elite Back):


- EPAD-XS Ekstra małe 11 cm (dł.) x 8 cm (szer.) (każda).
- EPAD-S małe 13 cm (dł) x 9 cm (szer) (każda).
- EPAD-M średnie 15 cm x 10 cm (szer.) (każda).
- EPAD-L duże 17 cm (dł) x 11 cm (szer.) (każda).

Oparcie Invacare **Matrx PB**



Oparcie Invacare Matrx PB Posture
Oparcie jest wyprofilowane tak, aby zapewnić wypośrodkowanie (środek ciężkości) i pozycjonowanie. Szeroka gama rozmiarów zapewnia ogromne wsparcie i komfort dla różnych klientów.

13 cm- Głębokość profilu -standardowa

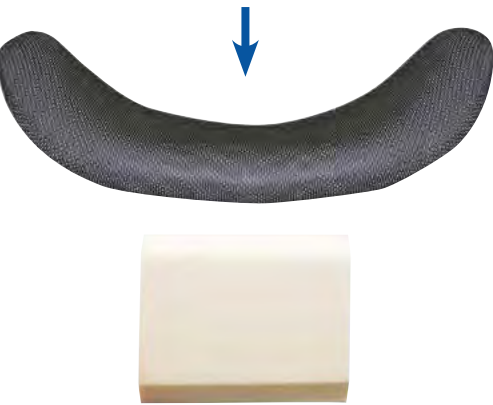

Podparcie krzyżowo-lędźwiowe:

PB BACK			
Kod produktu	Szerokość	Wysokość	Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego
MPB3631NH	36 cm	31 cm	33-38 cm
MPB3641NH	36 cm	41 cm	33-38 cm
MPB4131NH	41 cm	31 cm	38-43 cm
MPB4141NH	41 cm	41 cm	38-43 cm
MPB4151NH	41 cm	51 cm	38-43 cm
MPB4331NH	43 cm	31 cm	41-46 cm
MPB4341NH	43 cm	41 cm	41-46 cm
MPB4351NH	43 cm	51 cm	41-46 cm
MPB4631NH	46 cm	31 cm	43-48 cm
MPB4641NH	46 cm	41 cm	43-48 cm
MPB4651NH	46 cm	51 cm	43-48 cm
MPB5131NH	51 cm	31 cm	48-51 cm
MPB5141NH	51 cm	41 cm	48-51 cm
MPB5151NH	51 cm	51 cm	48-51 cm

Pianka:

- Formowana pianka otacza obudowę, i zapewnia maksymalny komfort oraz ochronę

Pokrowiec:

- Odporny na wilgoć i z oddychającego materiału
- Dostępny w kolorze czarnym

Podparcie krzyżowo-lędźwiowe:

- Zawiera wyjmowaną podkładkę pozycjonującą

Obudowa:

- Wyprofilowana obudowa zapewnia wyjątkowe podparcie i wypośrodkowanie oraz i pozycjonowanie
- Wytrzymała, lekka tylna obudowa ABS zawiera wbudowaną płytkę do mocowania zagłówka

Osprzęt (zamawiany osobno):

- Osprzęt montowany i regulowany w ciągu kilku minut – regulacje można wykonywać, gdy użytkownik siedzi na wózku
- Dostępne osprzęty montażowe: Easy Set, Split lub Fixed
- Zobacz stronę 8 Osprzęt(Hardware)

Standard	
Szerokość	36 cm, 41 cm, 43 cm, 46 cm, 51 cm
Wysokość	31 cm, 41 cm, 51 cm
Udźwig	136 kg

Heavy-Duty	
Szerokość	51 cm, 56 cm, 61 cm
Wysokość	41 cm, 51 cm
Udźwig	227 kg

Oparcie HEAVY DUTY PB BACK		
Kod produktu		
Oparcie	Tylko pokrowiec	Fits Wheelchair Width
HDB5141	HDC5141	51-53 cm
HDB5151	HDC5151	51-53 cm
HDB5641	HDC5641	56-59 cm
HDB5651	HDC5651	56-59 cm
HDB6141	HDC6141	61-64 cm
HDB6151	HDC6151	61-64 cm

Ekstra szerokość	
Szerokość	61-76 cm
Wysokość	41 cm, 51 cm
Udźwig	227 kg


PB BACK COVERS	
Kod produktu	Opis
PBC3631	Fits MPB3631
PBC3641	Fits MPB3641
PBC4131	Fits MPB4131
PBC4141	Fits MPB4141
PBC4151	Fits MPB4151
PBC4331	Fits MPB4331
PBC4341	Fits MPB4341
PBC4351	Fits MPB4351
PBC4631	Fits MPB4631
PBC4641	Fits MPB4641
PBC4651	Fits MPB4651
PBC5131	Fits MPB5131
PBC5141	Fits MPB5141
PBC5151	Fits MPB5151

Oparcie Invacare **Matrx PB Deep Back**



Oparcie *Invacare Matrx PB Deep* jest wyprofilowane tak, aby zapewnić większe podparcie, wypośrodkowanie i stabilną pozycję. Posiada te same funkcje, co standardowe oparcie *Posture Back*, ale ze zwiększoną głębokością profilu dla lepszego wypośrodkowania i pozycjonowania.

18 cm Głębokość profilu-głęboki profil

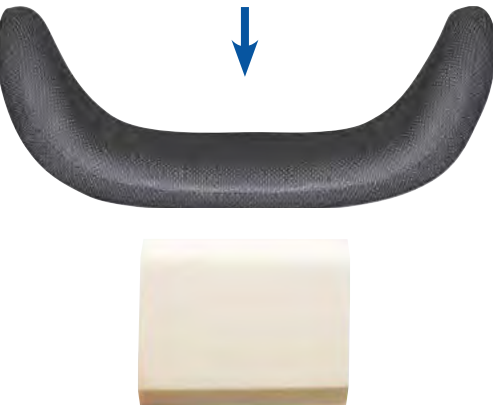

Podparcie krzyżowo-lędźwiowe:

Oparcie PB DEEP BACK			
Kod produktu	Szerokość	Wysokość	Pasuje do szerokości wózka inwalidzkiego
PBD3631NH	36 cm	31 cm	33-38 cm
PBD3641NH	36 cm	41 cm	33-38 cm
PBD4131NH	41 cm	31 cm	38-43 cm
PBD4141NH	41 cm	41 cm	38-43 cm
PBD4151NH	41 cm	51 cm	38-43 cm
PBD4331NH	43 cm	31 cm	41-46 cm
PBD4341NH	43 cm	41 cm	41-46 cm
PBD4351NH	43 cm	51 cm	41-46 cm
PBD4631NH	46 cm	31 cm	43-48 cm
PBD4641NH	46 cm	41 cm	43-48 cm
PBD4651NH	46 cm	51 cm	43-48 cm
PBD5131NH	51 cm	31 cm	48-53 cm
PBD5141NH	51 cm	41 cm	48-53 cm
PBD5151NH	51 cm	51 cm	48-53 cm

Pokrowce na oparcia PB DEEP BACK	
Kod produktu	Opis
DMC3631	Fits PBD3631
DMC3641	Fits PBD3641
DMC4131	Fits PBD4131
DMC4141	Fits PBD4141
DMC4151	Fits PBD4151
DMC4331	Fits PBD4331
DMC4341	Fits PBD4341
DMC4351	Fits PBD4351
DMC4631	Fits PBD4631
DMC4641	Fits PBD4641
DMC4651	Fits PBD4651
DMC5131	Fits PBD5131
DMC5141	Fits PBD5141
DMC5151	Fits PBD5151

Pianka

- Formowana pianka otacza obudowę, i zapewnia maksymalny komfort oraz ochronę

Pokrowiec:

- Odporny na wilgoć i z oddychającego materiału
- Dostępny w kolorze czarnym

Podparcie krzyżowo-lędźwiowe:

- Zawiera wyjmowaną podkładkę pozycjonującą

Obudowa:

- Profilowana obudowa (standardowa/głęboka) zapewnia wyjątkowe podparcie, wypośrodkowanie i pozycjonowanie
- Wytrzymała, lekka obudowa skorupa ABS zawiera wbudowaną płytkę do mocowania zagłówka

Osprzęt (zamawiany osobno):

- Osprzęt montowany i regulowany w ciągu kilku minut – regulacje można wykonywać, gdy użytkownik siedzi na wózku
- Dostępne osprzęty montażowe: Easy Set, Split lub Fixed
- Zobacz stronę 8 Osprzęt(Hardware)

Głębokość	
Szerokość	36 cm, 41 cm, 43 cm, 46 cm, 51 cm
Wysokość	31 cm, 41 cm, 51 cm
Udźwig	136 kg

Heavy-Duty	
Szerokość	51 cm, 56 cm, 61 cm
Wysokość	41 cm, 51 cm
Udźwig	227 kg

HEAVY DUTY PB DEEP BACK		
Kod produktu		
Oparcie	Tylko pokrowiec	Fits Wheelchair Width
DHD5141	DDC5141	51-53 cm
DHD5151	DDC5151	51-53 cm
DHD5641	DDC5641	56-59 cm
DHD5651	DDC5651	56-59 cm
DHD6141	DDC6141	61-64 cm
DHD6151	DDC6151	61-64 cm

Ekstra szerokość	
Szerokość	61-76 cm
Wysokość	41 cm, 51 cm
Udźwig	227 kg

Należy pamiętać, że dla wygody wymiary zostały zaokrąglone do najbliższego centymetra. Aby uzyskać dokładniejsze wymiary w milimetrach, zapoznaj się ze Specyfikacjami technicznymi na stronach 10 i 11.

Należy pamiętać, że dla wygody wymiary zostały zaokrąglone do najbliższego centymetra. Aby uzyskać dokładniejsze wymiary w milimetrach, zapoznaj się ze Specyfikacjami technicznymi na stronach 10 i 11.

Osprzęt Invacare *Matrix*

Osprzęt *Invacare Matrix Easy Set* można łatwo zamontować w ciągu kilku minut, a wszystkie regulacje można przeprowadzić, gdy użytkownik siedzi na wózku inwalidzkim.





Kluczowe właściwości i korzyści w funkcjonalności

- Szybkozłączki - łatwiejsze przenoszenie
- Nieograniczona regulacja głębokości 10,2 cm, kąta (40°) i obrotu
- Pasuje do rurek o średnicy 1,9 cm, 2,2 cm i 2,5 cm

Mocowanie klapy - opcjonalnie

Wszystkie oparcia **Matrix PB**, **Matrix Elite** i **Matrix MX1** zawierają zapięcia na pętelki, co ułatwia montaż klapy (opcjonalnie). Dostępne będą cztery standardowe rozmiary klap, które pasują do wszystkich standardowych oparć o szerokości od 30,5 do 50,5 cm . Numery modeli PLAP - XS/S/M/L. Oparcia **Matrix PB** o szerokości większej niż 50,5 cm można zamówić z klapami w momencie składania zamówienia.

Opcje i właściwości

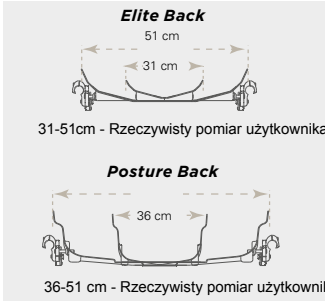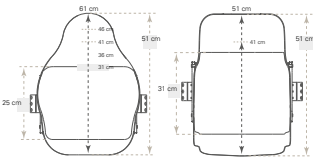

Styl

Oparcia *Invacare Matrix: Elite, Elite Deep, PB i PB Deep* są wymienne w przypadku osprzętu Easy Set.

Wysokość

Dostępnych jest kilka wysokości oparcia, które zapewniają stabilną pozycję od dolnej do górnej części klatki piersiowej.

Szerokość

Dostępne są szerokości oparcia od 28 do 74 cm - to zapewnia idealne dopasowanie do każdego użytkownika.

Głębokość profilu

Wybór 4 głębokości profili w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia i wypośrodkowania.

Akcesoria - Kołki montażowe

Standardowe kołki

Standardowe kołki montażowe (dołączone do wszystkich oparć *Invacare Matrix PB/Elite*) umożliwiają dopasowanie oparcia *Invacare Matrix PB* do wózków węższych o 2,5 cm lub o tej samej szerokości modelu. Umożliwiają dopasowanie oparcia *Elite* do wózków o tej samej szerokości

Dłuższe kołki

Dłuższe kołki montażowe (dołączone do wszystkich oparć *Invacare Matrix PB/Elite*) umożliwiają dopasowanie oparć *Invacare Matrix PB i Elite* do wózków o szerokości 2,5 cm



Wydłużone/rozszerzone kołki montażowe

Opcjonalne wydłużone/rozszerzone kołki montażowe dostępne dla oparć *Invacare Matrix PB i Elite* (nie dostępne dla oparć *Heavy Duty PB*). Umożliwiają dopasowanie oparcia do wózków o szerokości do 5 cm.

Regulacje osprzętu Easy Set



Głębokość

Regulacja 5 cm za tylnymi rurkami.



Głębokość

Regulacja 5 cm przed tylnymi rurkami.



Kąt

20° - zakres regulacji kąta oparcia w przód.



Kąt

20° - zakres regulacji kąta oparcia w tył.



Rotacja

Oparcie może być ustawione w sposób umożliwiający rotację miednicy/tułowia.

Inne opcje montażowe osprzętu



Osprzęt Heavy Duty “Easy-Set”

- Standardowy z oparciami typu Heavy Duty
- Zalecany dla użytkowników o wadze powyżej 136 kg, o dużym napięciu mięśniowym lub przy intensywnym użytkowaniu



Osprzęt stały Space Saver

- Nieprzełożony
- Wymaga narzędzi do zdjęcia oparcia z wózka
- Oszczędność miejsca w przypadku zastosowań o mniejszej szerokości
- W pełni regulowany, dostępny jako opcja bezpłatna



Osprzęt Split


- Daje prześwit między oparciem a pałąkiem z tyłu lub innymi elementami zamontowanymi z tyłu
 - Niezalecany w oparciach Heavy-Duty
- Dostępny jako opcja bezpłatna




Osprzęt ETAC

Osprzęt umożliwiający stosowanie oparć **Matrix** z wózkami inwalidzkimi **ETAC**.

Specyfikacja oparcí Invacare **Matrx**

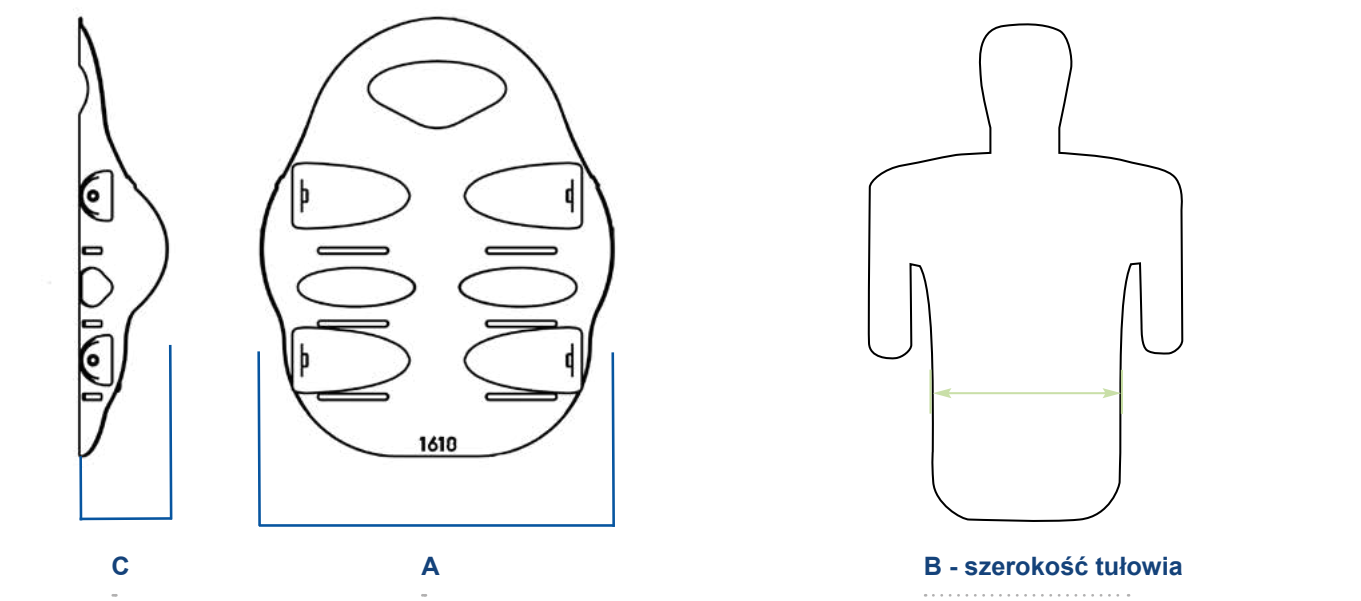


Oparcie <i>Invacare Matrx Elite Back</i>									
Wysokość oparcia		255 mm, 305 mm, 355 mm ((dostępne w szerokościach 305 mm, 330 mm, and 355 mm), 405 mm, 455 mm, 505 mm)							
Szerokość	305 mm	330 mm	355 mm	380 mm	405 mm	430 mm	455 mm	480 mm	505 mm
Tylko obudowa oparcia									
A – szerokość zewnętrzna	245 mm	260 mm	315 mm	340 mm	365 mm	390 mm	415 mm	440 mm	465 mm
C-Głębokość profilu	76 mm	76 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Obudowa oparcia z pokrowcem i pianką									
B - szerokość tułowia	175 mm	200 mm	250 mm	275 mm	300 mm	325 mm	350 mm	375 mm	400 mm

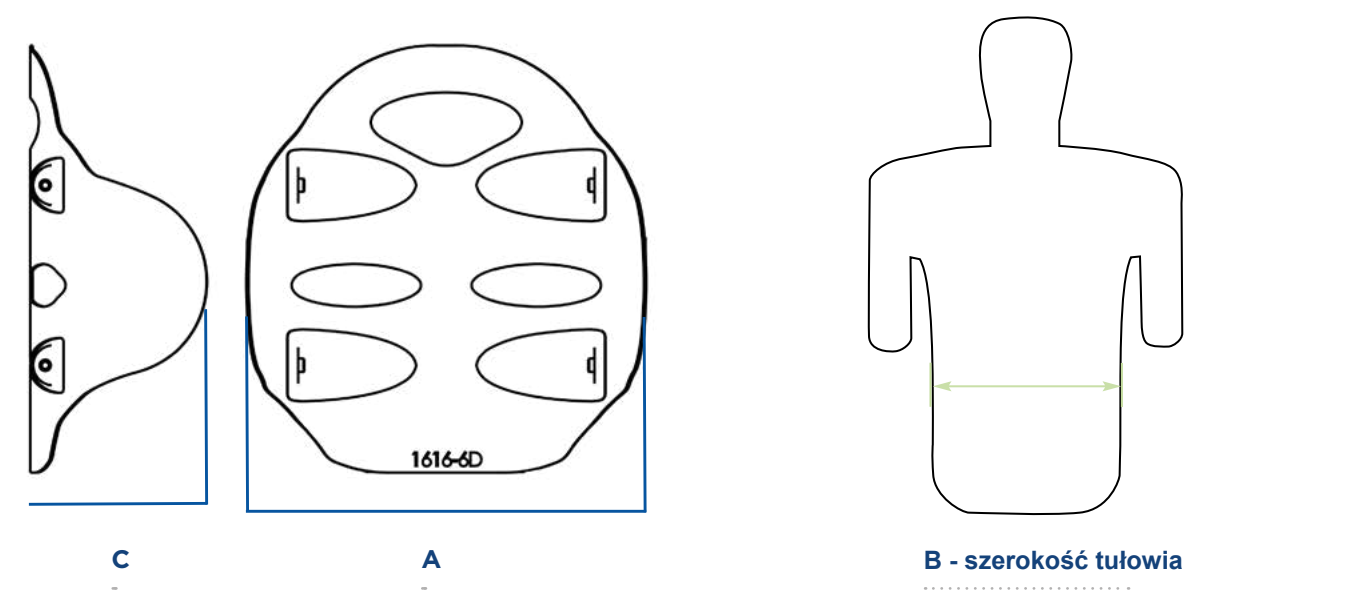


Oparcie <i>Invacare Matrx Elite Deep</i>							
Wysokość oparcia		305 mm, 405 mm, 455 mm, 505 mm					
Width	355 mm	380 mm	405 mm	430 mm	455 mm	480 mm	505 mm
Tylko obudowa oparcia							
A-Szerokość zewnętrzna	335 mm	360 mm	385 mm	410 mm	435 mm	460 mm	480 mm
C-Contour Depth	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm
Obudowa oparcia z pokrowcem i pianką							
B - szerokość tułowia	250 mm	275 mm	300 mm	325 mm	350 mm	375 mm	400 mm
Regulacja głębokości	100 mm (50 mm in front or behind)						
Regulacja kąta	40 °						
Waga produktu	Standard - 1.36 kg Deep – 1.81 kg						
Udźwig	136 kg						
Ograniczona gwarancja	2 lata						

Specyfikacja oparcí Invacare **Matrx**

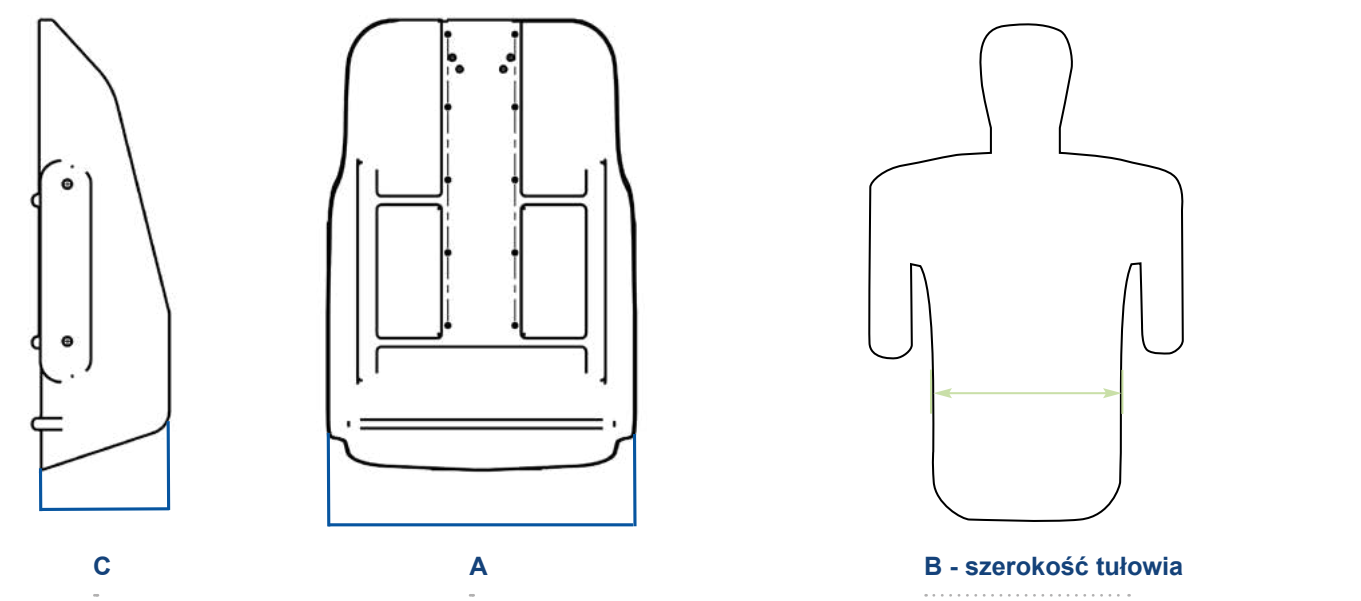



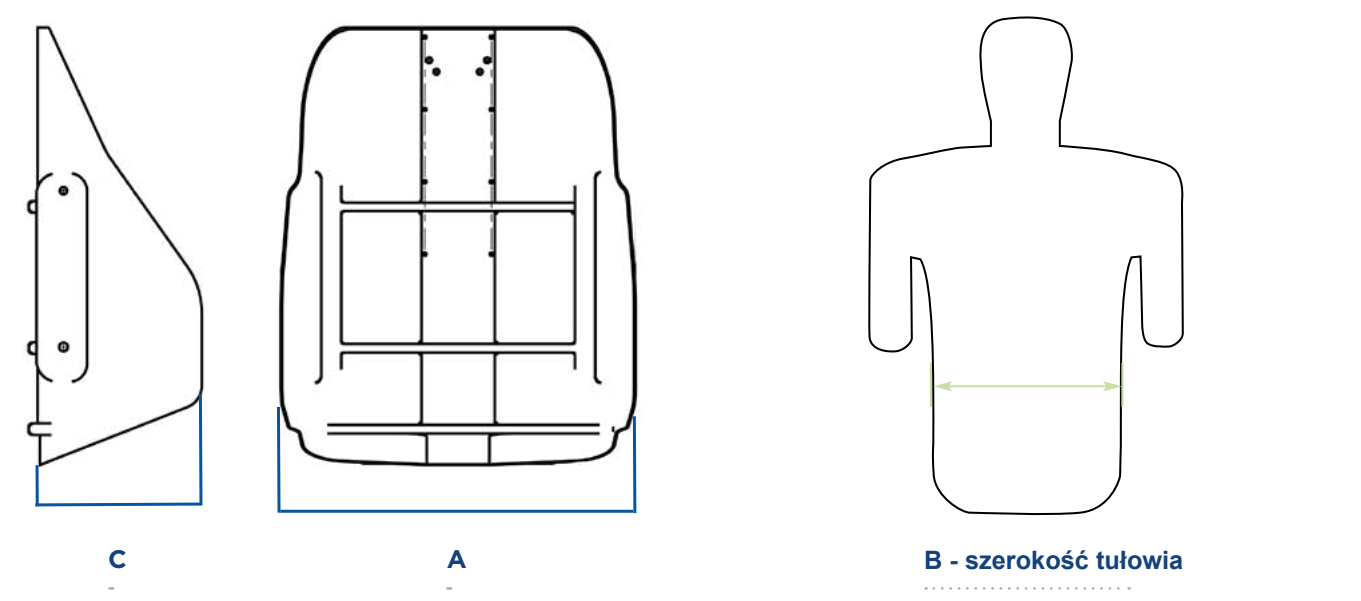

Oparcie <i>Invacare Matrx PB</i>					
Wysokość oparcia		305 mm, 405 mm, 505 mm			
Szerokość	355 mm	405 mm	430 mm	455 mm	505 mm
Tylko obudowa oparcia					
A-Szerokość zewnętrzna	310 mm	360 mm	385 mm	420 mm	465 mm
C-Głębokość profilu	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Obudowa oparcia z pokrowcem i pianką					
B - szerokość tułowia	230 mm	275 mm	300 mm	330 mm	375 mm



Oparcie <i>Invacare Matrx PB Deep Back</i>					
Wysokość oparcia		305 mm, 405 mm, 505 mm			
Szerokość	355 mm	405 mm	430 mm	455 mm	505 mm
Tylko obudowa oparcia					
A-Szerokość zewnętrzna	320 mm	370 mm	395 mm	435 mm	475 mm
C-Głębokość profilu	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm	178 mm
Obudowa oparcia z pokrowcem i pianką					
B - szerokość tułowia	230 mm	275 mm	300 mm	330 mm	375 mm
Regulacja głębokości	100 mm (50 mm z przodu lub z tyłu)				
Regulacja kąta	40 °				
Waga produktu	Standard - 1.81 kg Deep (głębokie) - 2.25 kg				
Udźwig	136 kg				
Ograniczona gwarancja	2 lata				

Dane techniczne

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

	Szerokość	Waga obudowy oparcia	Maksymalna temperatura czyszczenia	Maksymalna waga użytkownika
				
Elite Back	305 - 505 mm	1.36 kg	Cover: 60°	136 kg
Elite Deep Back	305 - 505 mm	1.81 kg	Cover: 60°	136 kg
PB Back	355 - 760 mm	1.81 kg	Cover: 60°	136 kg
PB Deep Back	355 - 760 mm	2.25 kg	Cover: 60°	136 kg
HD PB Back	505 - 610 mm	3.15 kg	Cover: 60°	227 kg
HD PB Deep Back	505 - 610 mm	3.70 kg	Cover: 60°	227 kg




Testy zderzeniowe-
Crash Testing

Próba ogniowa
EN 1021: Part 1 & 2

Biokompatybilność::
ISO 10993-5

Kolor

Tkanina z siateczki Tex

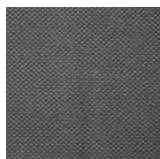

Należy pamiętać, że kolory mogą się nieznacznie różnić od tych wyświetlanych powyżej.

Tel: +44 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górcewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
el.: 536 447 544



Yes, you can.®



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech™ Solution



Poduszka Slimline z unikalnym
systemem dwóch worków na plyn



Yes, you can.

Poduszka **Invacare *Matrx Flo-tech Solution*** wykorzystuje połączenie cienkiej, ukształtowanej piankowej podstawy poduszki i podwójnej warstwy worków z płynem na obszarze guzów kulszowych oraz w odcinku krzyżowym. Podwójne worki z płynem i unikalny, formowany piankowy kształt zwiększają powierzchnię podparcia. Zapewnia to wyższy poziom ochrony dla pacjentów zidentyfikowanych jako osoby o bardzo wysokim ryzyku wystąpienia odleżyn lub dla tych, u których wystąpiło już uszkodzenie tkanek.

Opcje i właściwości



Pokrowiec odporny na wchłanianie

Pokrowiec jest dwustronnie rozciągliwy, wodoodporny i przepuszcza parę wodną. Pokrowiec ma antypoślizgową podstawę z uchwytem do przenoszenia.



Dostępne aż 44 rozmiary

Poduszka **Invacare *Matrx Flo-tech Solution*** jest dostępna w 44 rozmiarach, od 38 x 41 do 51 x 46 cm (380 x 410 do 510 x 460 mm). (Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli rozmiarów).



Opcje poduszki **Invacare *Matrx Flo-tech Deep Solution***

Dostępna jest również opcja głębokiej podstawy piankowej o grubości 10 cm (100 mm) w 12 rozmiarach. (Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli rozmiarów).



Powłoka Ultra-fresh™, która chroni przed drobnoustrojami i nieprzyjemnym zapachem

Specjalna ochrona antybakteryjna została dodana do wszystkich pianek **Flo-tech**. Dzięki niej poduszki są odporne na rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Zapewnia też dłuższą świeżość.

Profilowana, smukła, piankowa podstawa poduszki typu slimline z dużym, podwójnym workiem na płyn, pokrywającym całą górną powierzchnię poduszki



Obszar, gdzie skóra dotyka piankowej poduszki jest chroniony, ponieważ płyn przemieszcza się, aby rozprzecznić nacisk z dala od wystających kości. Dodatkowa warstwa płynu jest wbudowana pod obszar guzów kulszowych oraz odcinka krzyżowego, aby jeszcze bardziej zwiększyć właściwości redukujące nacisk poduszki. Dzięki temu jest ona odpowiednia dla użytkowników w grupie bardzo wysokiego ryzyka wystąpienia odleżyn.

Poduszka profilowana Slimline

Niektórzy użytkownicy wolą poduszkę typu Slimline (smukłą), ponieważ uważają ją za bardziej użytkową w codziennym życiu. Niski profil jest szczególnie korzystny dla ułatwienia przesiadania się w bok.

Dane techniczne

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.


Różne rozmiary	Wysokość	Waga całkowita produktu	Maksymalna waga użytkownika	Maksymalna temperatura czyszczenia
				
Gama 44 rozmiarów	78 mm	3.08 kg	140 kg	80°

Wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match - Badanie ogniowe mebli tapicerowanych i BS 7176- Specyfikacja odporności na zapłon mebli tapicerowanych przeznaczonych do użytku poza domem poprzez badanie materiałów kompozytowych (Crib 5)-test ogniowy

Zastrzeżenia

1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkownika jest ustalane przy założeniu, że wybrana poduszka ma odpowiednią szerokość i głębokość dla potencjalnego użytkownika/użytkowników.

Kolory

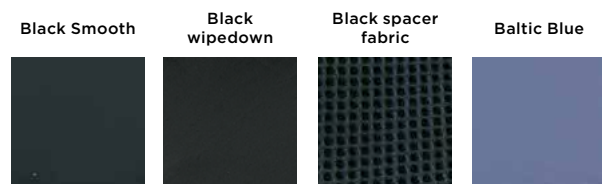

Tel: +44 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Neuhofweg 51
 4147 Aesch BL
 Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
 Siedziba główna, Salon Wystawowy
 Bytom ul. Chorzowska 30c
 tel.: 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
 ul. Górczewska 47
 tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
 ul. Ludwika Solskiego 15
 tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
 ul. Zamenhoffa 9
 tel.: 536 447 544



Yes, you can.



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech™ Image



Poduszka Slimline (smukła)
z workiem na płyny



Yes, you can.

Poduszka **Invacare *Matrix Flo-tech Image*** wykorzystuje połączenie smukłej, ukształtowanej podstawy poduszki z pianki i worka z płynem pokrywającego obszar odcinka krzyżowego kręgosłupa, zwiększając rozkład nacisku i zanurzenie guzów kulszowych w poduszkę. Ta konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony użytkownikom, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia odleżyn. Ten smukły format poduszki jest idealny zarówno do użytku na wózku inwalidzkim, jak i na przykład na krześle.

Opcje i właściwości



Pokrowiec odporny na wchłanianie

Pokrowiec jest dwustronnie rozciągliwy, wodoodporny i przepuszcza parę. Pokrowiec ma antypoślizgową podstawę z uchwytem do przenoszenia.



Dostępna w 23 rozmiarach Opcja Sag Compensator

Poduszka **Invacare *Matrix Flo-tech Image*** jest dostępna w 23 rozmiarach, od 360 x 330 do 460 x 410 mm. (Szczegóły w tabeli rozmiarów).



Opcja Sag Compensator służy do kompensacji ugięcia poduszki na siedzisku wózka inwalidzkiego i zapewnienia prawidłowego ułożenia poduszki.



Powłoka Ultra-fresh™, która chroni przed drobnoustrojami i nieprzyjemnym zapachem

Specjalna ochrona antybakteryjna została dodana do wszystkich pianek **Flo-tech**. Dzięki niej poduszki są odporne na rozwój bakterii powodujących nieprzyjemny zapach. Zapewnia też dłuższą świeżość.

Poduszka o smukłej, profilowanej konstrukcji z pianki i żelu



Niektórzy użytkownicy wolą poduszkę typu slimline, ponieważ uważają ją za bardziej użytkową przy wykonywaniu codziennych czynności. **Invacare *Matrix Flo-tech Image*** łączy zalety yprofilowanej górnej powierzchni z pianki z dużym workiem na płyn pokrywającym obszar guzów kulszowych i odcinka krzyżowego kręgosłupa. Zapewnia to zwiększone podparcie i redukcję nacisków.

Wyprofilowana powierzchnia siedziska z workiem wypełnionym żelem

Zapewnia lepszą stabilizację i podparcie postawy; formowane wypustki z pianki i płyn łączą się skutecznie, aby zmniejszyć siły ścinające i siły tarcia wpływające bezpośrednio na skórę.

Dane techniczne


Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje sprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

Różne rozmiary	Wysokość	Waga całkowita produktu	Maksymalna waga użytkownika	Maksymalna temperatura czyszczenia
				
Gama 50 rozmiarów	78 mm	1.82 kg	140 kg	80°

Wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match - Badanie ogniowe mebli tapicerowanych i BS 7176- Specyfikacja odporności na zapłon mebli tapicerowanych przeznaczonych do użytku poza domem poprzez badanie materiałów kompozytowych (Crib 5)-test ogniowy

1. Maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkownika jest ustalane przy założeniu, że wybrana poduszka ma odpowiednią szerokość i głębokość dla potencjalnego użytkownika/ użytkowników.

Kolory

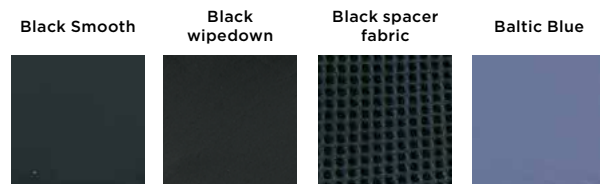

Tel: +44 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Neuhofweg 51
 4147 Aesch BL
 Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o. www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
 Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom
 ul. Chorzowska 30c
 tel.: 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
 ul. Górczewska 47
 tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
 ul. Ludwika Solskiego 15
 tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
 ul. Zamenhoffa 9
 tel.: 536 447 544



Yes, you can.



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23

matrx[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}



Idealne dopasowanie
do kształtu ciała użytkownika



Yes, you can.

Poduszka **Invacare Matrx Contour Visco^{NG}** to anatomicznie profilowana, w 100% wiskoelastyczna poduszka piankowa. Posiada doskonałe właściwości redystrybucji nacisku, aby poprawić komfort i stabilizować miednicę. Jej konstrukcja o niskim profilu ułatwia użytkownikowi napędzanie wózka stopami i umożliwia dostęp do niższych stołów czy biurek.

Tylny profil

► Wyprofilowany promień daje dodatkowe podparcie za obszarem miednicy, zapewniając optymalne ustawienie miednicy. Promień poduszki może pasować pod tapicerkę oparcia lub wyprofilowane sztywne oparcie, wypełniając lukę, która zwykle występuje, gdy używane są kwadratowe poduszki. Zwiększony obszar, gdzie skóra styka się z powierzchnią poduszki poprawi redystrybucję nacisku i ochronę skór przed urazami i uszkodzeniami.

Przednia krawędź poduszki

► Zapewnia maksymalne podparcie ud, co wpływa na właściwe ustawienie nóg i redystrybucję nacisku, bez narażania obszaru podkolanowego przy stawie kolanowym na urazy. Przednia krawędź jest również dostosowana do osób z napięciem w obszarze podkolanowymi, co pozwala na ustawienie stóp pod kątem 90 lub mniejszym i umożliwia napęd wózka stopami.











► Poduszka **Matrx Contour Visco^{NG}** zapewnia doskonałe zanurzenie i otulenie. Siedząc na poduszce użytkownik poczuje, jak pianka wiskoelastyczna powoli dostosowuje się do kształtu ciała, zwiększając powierzchnię kontaktu i tym samym redystrybuując nacisk.

Matrx Contour Visco^{NG} jest dostępna w szerokiej gamie rozmiarów i możliwości udźwigu, co daje najlepsze dopasowanie do użytkownika. Zawiera 2 pokrowce z 2 zamkami błyskawicznymi, łatwe do zdjęcia w celu czyszczenia i konserwacji. Pokrowce są odporne na nietrzymanie moczu i bi-elastyczne, aby umożliwić skuteczne zanurzenie ciała użytkownika w piankowej poduszce. Antypoślizgowa podstawa sprawia, że poduszka pozostaje na swoim miejscu, a uchwyt do przenoszenia ułatwia przenoszenie poduszki z jednej powierzchni na drugą.

Dane techniczne▼

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

								
	Szerokość ▼	Głębokość ▼	Wysokość ▼	Wysokość ▼	Waga całkowita produktu ▼	Maksymalna waga użytkownika ▼	Maksymalna temperatura czyszczenia ▼	
Matrx Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=100mm B=100mm	100mm	1.3kg	140Kg*	90°	

Wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match - Badanie ogniowe mebli tapicerowanych

* Poduszki o szerokości siedziska 380 i 405 mm - minimalna waga użytkownika 40 kg.
* Poduszki o szerokości siedziska 430 mm i większej - minimalna waga użytkownika 60 kg.

Tel: +44 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c

tel. 327874086, 516 293 265
Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
el.: 536 447 544



Yes, you can.®

matrx[®]
SEATING SERIES

Libra[®] Cushion



Doskonała funkcjonalność, najwyższy
poziom ochrony i pozycjonowania



Yes, you can.

Dzięki idealnej równowadze zanurzenia ciała, odciążenia i otulenia, poduszka **Invacare Matrx Libra** zapewnia najwyższy poziom ochrony skóry i pozycjonowania. Formowana piankowa podstawa skutecznie redystrybuuje siły w kierunku bioder i ud, zapewniając stabilizację w celu optymalizacji funkcjonalności. Unikalny dwuwarstwowy worek na płyn zapewnia całkowite otulenie wystających kości. Lekka i bezobsługowa poduszka Libra o niskim profilu jest uzupełnieniem różnorodnej podstawy ciała, a jednocześnie wspomaga manualne czy i elektryczne napędzanie wózka. Dostępna jest pełna gama akcesoriów pozycjonujących dających dodatkowe podparcie i prawidłowe pozycjonowanie.



Unikalna konstrukcja


- Połączenie pianki i płynu zapewnia najwyższy poziom ochrony skóry, pozycjonowanie i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika
- Nowy dwuwarstwowy worek na płyn z technologią Flo-tech™ firmy *Invacare* otula wystające kości i zmniejsza siły ścinania, wykorzystując znajdujący się w środku płyn odporny na temperaturę, zapewniający niezawodną ochronę
- Bardzo trwała podstawa z pianki formowanej metodą HR: innowacyjna konstrukcja zwiększa zanurzenie i poprawia postawę ciała



Korzyści funkcjonalne


- Poprawia stabilność miednicy ze wszystkich stron, optymalizując jej funkcjonalność
- Odpowiednia dla użytkowników o bardzo wysokim ryzyku uszkodzenia skóry (odleżyny)
- Poduszka Libra jest lekka, ma niski profil i jest bezproblemowa w utrzymaniu - idealne uzupełnienie aktywnego stylu życia użytkownika
- Polecana wszystkim użytkownikom, włączając tych o szczególnych indywidualnych potrzebach dotyczących pozycji siedzącej

Opcje i właściwości

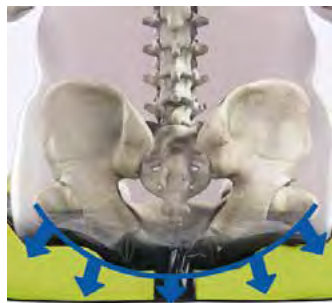

Immersja - zanurzenie

Maksymalizuje powierzchnię styku skóry i powierzchni poduszki w celu zmniejszenia dużego nacisku. Ciśnienie = Siła/Powierzchnia.

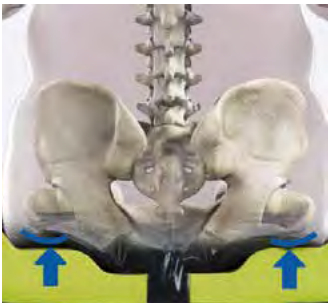

Odciążenie

Przenosi siły z dala od guzów kulszowych, przenosząc większą część ciężaru na krętarze, biodra i uda.



Osłona

Worek z płynem całkowicie otacza wystające kości, nawet podczas zmiany pozycji ciała.



Stabilna miednica


Ułożenie miednicy zapewnia boczne podparcie krętarzy i przednio-tylną stabilizację miednicy, co sprzyja prostej postawie kręgosłupa, To z kolei wpływa na funkcjonowanie kończyn górnych, kontrolę głowy i funkcje fizjologiczne.

Opcje i właściwości



Cięcie typu „Waterfall”

Dla napiętych ścięgien w obszarze pod kolanami, łatwiejszego przenoszenia i sprawniejszego napędzania wózka stopami.

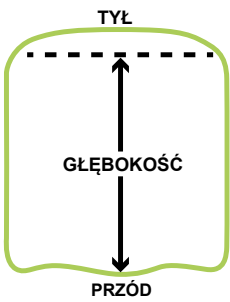

Rozmiar poduszki

Rzeczywista głębokość siedziska jest o 380 mm większa, mierzona pośrodku poduszki ze względu na promień tylnej części poduszki.



Promień tylnej części poduszki

380 mm zakrzywienia przedłużenia poduszki dla maksymalnej powierzchni, co minimalizuje szczelinę między siedziskiem a oparciem. Stabilizuje płyn w nachylonych pozycjach. Poduszka posiada wycięcie na kość ogonową, co przynosi dodatkową ulgę i odciążenie dla kręgosłupa użytkownika.



Klin przedni

Zwiększa nachylenie, zapobiega zsuwaniu się użytkownika z poduszki i redukuje siły ścinania.



Przycięty klin przedni

Odpowiedni przy ograniczonym zgięciu bioder i/lub obniżeniu wysokości siedziska do łatwiejszego napędzania wózka stopami.



Klin stożkowy

Daje lepsze podarcie mięśni przywodzicieli.



Klin stożkowy

Poprawa pochylenie i rotację miednicy. Należy umieścić klin z tyłu poduszki.



Klin boczny

Wzmacnia stabilizację po bokach, zapewniając lepsze wypośrodkowanie pozycji ciała.



Dodatkowy worek na płyn

Do odpowiedniej ochrony/ do stosowania po skosie poduszki. Leży idealnie w głównym worku i dopasowuje się bardzo dobrze w obszarze miednicy.



Klin odwodzący

Do wygodnego i właściwego ułożenia ud i bioder w linii środkowej.



Boczna kieszeń do wygodnego przechowywania

Zawiera sznureczek do otwierania.





Dostępne rozmiary

Szerokość (mm)	x	Głębokość (mm)
355	x	305
355	x	355
355	x	405
380	x	405
380	x	455
380	x	505
405	x	405
405	x	455
405	x	505
430	x	405
430	x	430
430	x	455
430	x	505
455	x	405

Szerokość (mm)	x	Głębokość (mm)
455	x	455
455	x	505
480	x	405
480	x	455
480	x	505
505	x	405
505	x	455
505	x	505
530	x	455
530	x	505
530	x	560
560	x	455
560	x	505
560	x	560

Dane techniczne

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe na temat tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

Waga całkowita produktu	Maksymalna waga użytkownika	Maksymalna temperatura czyszczenia	Czyszczenie powierzchni
			
Matrix Libra 1.6 kg	Standard 136 kg Heavy-Duty 227 kg	Pokrowiec zewnętrzny: 80°	Wewnętrzna wyściółka: wilgotną szmatką



Opcje pokrowca

Black smooth	Spacer	Black wipedown
		
Wodoodporny Przepuszczający parę wodną	Przepuszczający parę wodną	Wodoodporny Przepuszczający parę wodną

Należy pamiętać, że kolory mogą się nieznacznie różnić od tych wyświetlanych powyżej.

Tel: +44 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Szwajcaria

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o. www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom
ul. Chorzowska 30c
tel. 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
el.: 536 447 544



Yes, you can.



© 2023 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie podane informacje są poprawne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. UE – 04/23