

AQUATEC®

Orca

Podnośnik wannowy



Najlepsze wrażenia z kąpieli



Yes, you can.

*Aquatec* **Orca** to **najwyższej jakości i niezwykle trwała seria podnośników kąpielowych**, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić **komfort, bezpieczeństwo i poczucie pewności** osobom najbardziej potrzebującym wsparcia podczas kąpieli. **Orca** oferuje większą przestrzeń na nogi, łatwość demontażu i ergonomiczne sterowanie ręczne. Cechuje go wysoka wydajność oraz posiadanie bardzo lekkiego akumulatora.

- Limit wagowy aż do 140 kg
- **Orca XL** posiada limit wagowy do 170 kg
- Użytkownik siedzi niżej i dalej w kierunku tylnej części wanny
- Podnośnik daje większą przestrzeń na nogi w celu ułatwienia i poprawienia czynności kąpielowych
- Zwiększona wysokość oparcia zapewnia lepsze wsparcie w pozycji pionowej lub leżącej



#### Wygodny, bezpieczny i wysoce wydajny

Seria *Aquatec* **Orca** została zaprojektowana z myślą o użytkowniku chcąc zapewnić wygodną i prostą kąpiel. Najważniejsze cechy to:

- Odchylane oparcie
- Zintegrowany zagłówek
- Sterowanie ręczne za pomocą pilota z mechanizmem szybkozłącza
- Akumulator z technologią Sony™
- Automatyczne odblokowanie w celu szybkiego wyjęcia z wanny
- Możliwość odchylenia oparcia do 40°

Wzmocniony mechanizm nożycowy w serii **Orca** łączy bezpieczne podnoszenie z kompaktową konstrukcją, podczas gdy minimalna wysokość siedziska wynosząca zaledwie 60 mm zapewnia dużo miejsca na głębszą i wygodniejszą kąpiel.

#### *Aquatec* **Orca F**

Pionowy podnośnik do wanny z oparciem stałym, który zapewnia wsparcie dla osób, które wolą kąpać się w pozycji pionowej.



#### *Aquatec* **Orca XL**

Mocny podnośnik wannowy o maksymalnej wadze użytkownika 170 kg.





## Opcje i właściwości



### Teksturowana powierzchnia siedziska

**Orca** posiada teksturovaną powierzchnię, która w razie potrzeby **umożliwia użytkowanie bez osłon**. Boczne klapy są umieszczone na zawiasach równo i połączone z powierzchnią siedziska, co umożliwia wygodne i bezpieczne przenoszenie na boki, bez "szczypania" skóry.



### Dwuczęściowa konstrukcja

Po przesunięciu do przodu, oparcie **Orca** składa się i automatycznie odblokowuje. Oparcie i podstawę **można z łatwością wyjąć z wanny**. Dwie części idealnie do siebie pasują dzięki czemu **podnośnik jest wyjątkowo kompaktowy i łatwy do przechowywania**.



### Łatwy do czyszczenia

**Orca** łączy ze sobą otwartą, przejrzystą konstrukcję z jej gładkimi powierzchniami, aby zapewnić bezproblemowe czyszczenie.

## Accessories Aquatec bath lift



### Odchylane specjalne oparcie

Indywidualnie regulowane części boczne dla bezpiecznego pozycjonowania. **1573970** Biały do **Orca** (przy zamówieniu z podnośnikiem wannowym) **1471623** Biały, do **Orca** (do doposażenia)



### Height-adjustable headrest

Do bezpiecznego podparcia głowy i szyi. Polecany w połączeniu ze specjalnym oparciem. W komplecie wszystkie części do montażu zagłówka. **15461** Biały, dla wszystkich podnośników **Orca**



Please complete the **Orca** dimension sheet.

### Wykonane na zamówienie klapy boczne

Ułatwiają transfer z podnośnika. **1574239** Klapy boczne (para) z pokrywą, białe do **Orca** (przy zamawianiu z podnośnikiem) **1471606** Klapy boczne (jednostka) bez pokryw do **Orca / Orca F** (przy doposażaniu)



### Pasy bezpieczeństwa

Aby bezpiecznie utrzymać użytkownika. **1471209** Pas piersiowy, biały do **Orca / Orca XL** **1471210** Pas biodrowy, biały, do **Orca / Orca F / Orca XL**



### Pas piersiowy i biodrowy

Miękki, przyjazny dla skóry materiał. **1528702** dla **Orca**




### Walek blokujący, zatrzymujący

Zapobiega zsuwaniu się z siedziska. Dostępne dla wszystkich podnośników wannowych z napędem elektrycznym. **1525932** - Niebieski (7 cm wysokości) **1525933** - Niebieski (12 cm wysokości)



### Adaptory wysokości

Podnośnik **Orca** może być dostosowany do pełnej gamy wysokości wanny. Adaptory wysokości 2, 4 lub 6 cm można szybko zamontować w podstawie podnośnika wannowego. **15170** Adapter o wysokości 2 cm (4 szt.) zestaw do konwersji **14694** Adapter o wysokości 2 cm (4 szt.) Zestaw do przedłużania, bez zestawu do konwersji

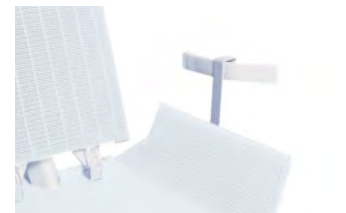



### Deflektory klap bocznych

Stosowany do uchwytów w wannie. W razie potrzeby deflektor klapy bocznej można również skrócić. **15309** do wszystkich podnośników wannowych z napędem akumulatorowym (1 szt.)

## Dane techniczne

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe dotyczące tego produktu, w tym instrukcję obsługi, odwiedź lokalną stronę internetową Invacare.

Wymiary	Aquatec Orca	Aquatec Orca F	Aquatec Orca XL
Szerokość siedziska bez klap bocznych	375 mm	375 mm	375 mm
Szerokość siedziska z klapami bocznymi	715 mm* (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Głębokość siedziska	590 mm (B)	590 mm (B)	590 mm (B)
Maksymalna wysokość siedziska	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Minimalna wysokość siedziska.	60 mm	60 mm	60 mm
Szerokość oparcia	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Wysokość oparcia	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Całkowita głębokość (pionowe oparcie)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Całkowita głębokość (oparcie odchylane)	920 mm	-	920 mm
Wysokość całkowita z oparciem	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Obszar podstawy	580 x 295 mm	580 x 295 mm	580 x 295 mm
Grubość nakładki	3 mm	3 mm	3 mm
Więcej informacji			
Całkowita waga bez sterowania ręcznego	10,8 kg	11,4 kg	11,6 kg
Całkowita waga bez akumulatora	-	-	-
Waga siedziska	6,6 kg	7,2 kg	7,4 kg
Waga, oparcie	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Waga, sterowanie ręczne	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Waga, akumulator	-	-	-
Ładowność	140 kg	140 kg	170 kg
Maksymalnie odchylenie paorcia do	40°	-	40°
Kolor	Biały	Biały	Biały

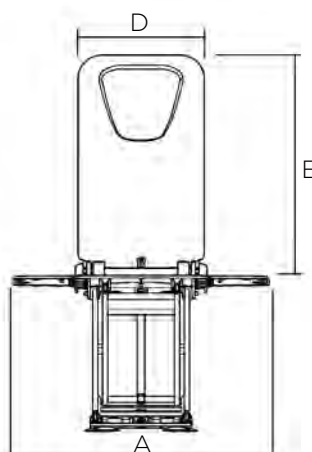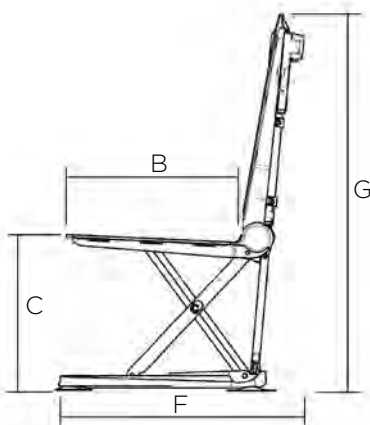

Tel: +41 61 487 70 70  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Szwajcaria

"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.j.  
Adres: Chorzowska 30C  
41-910 Bytom  
Telefon: 516 293 265  
E-mail: biuro@kuschall.eu  
https://partner-med.pl

PARTNER  
TWOJA PRZYSZŁOŚĆ



Yes, you can.



233 / 5 000  
Wyniki tłumaczenia

© 2018 Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że wszystkie przytoczone informacje były aktualne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez poprzedniej konsultacji. Orca - UE - 03/2022