

Aquatec® | Wózki prysznicowe



*Aquatec **Ocean**, **Ocean XL**, **Ocean Vip**, **Ocean Vip XL**, **Ocean Dual Vip**, **Ocean E-Vip***

.....
Seria wózków prysznicowych Aquatec **Ocean** oferuje odpowiedni model spełniający wszystkie wymagania

AQUATEC®



Yes, you can.®


Aquatec **Ocean**

- Stabilna rama ze stali nierdzewnej
- Indywidualnie regulowana wysokość siedziska: narzędzia nie są konieczne
- Regulowane, łatwo zmywalne oparcie z klamrami na szybkozłączkach, które można idealnie dopasować do użytkownika
- Niezajmujący dużo miejsca uchwyt do kierowania wózkiem w celu umożliwienia optymalnego ustawienia go nad toaletą
- Ergonomiczne, odchylane podłokietniki; można je regulować na dwóch różnych poziomach wysokości
- Regulowane, odchylane i zdejmowane podnóżki w celu łatwego transferu użytkownika
- Płyty podnóżka składane, z chropowatą powierzchnią, posiadają pasy na pięty zapewniające bezpieczną/stabilną pozycję

Aquatec **Ocean** jest dostępny, co następuje:

- W wersji standardowej z kółkami
- Model z napędem manualnym, z 4 kołami 24 "i, z osiami na szybkozłączkach
- Wersja XL (ładowność 180kg oraz więcej miejsca między podłokietnikami), z kołami
- Wszystkie modele można doposażyć w koła 24 "i / lub w koła z modelu XL

Opcje i właściwości



Koła w Ocean 24 "

Model z napędem manualnym, z kołami z 24", osiami na szybkozłączkach i czterema kółkami.



Ocean XL

Więcej przestrzeni między podłokietnikami o udźwigu do 180 kg.



Indywidualnie regulowana wysokość siedziska: bez użycia narzędzi.



Łatwy demontaż do użytku mobilnego, np. w podróży.



Stabilna rama ze stali nierdzewnej.


Aquatec **Ocean Vip**

- Stabilnarama ze stali nierdzewnej.
- Pochylenie siedziska można regulować indywidualnie (kąt nachylenia 0 ° - 35 °)
- Sprężynagazowa ze stali nierdzewnej
- Niezwykła stabilność nawet przy maksymalnym kącie nachylenia
- Wysokość siedziska regulowana w 3 krokach, bez użycia narzędzi
- Bardzo wygodne, ergonomiczne wyprofilowane siedzisko
- Wózek łatwy do czyszczenia z możliwością regulacji wysokości oparcia za pomocą klamry na szybkozłączach niezwykle łatwo dopasowuje się do użytkownika

Ocean Vip jest dostępny, co następuje:

- W wersji standardowej z kołami
- W wersji standardowej z kołami i uchwytem do sedesu and
- W wersji standardowej z kołami, uchwytem na sedes i miękkim siedziskiem
- W wersji **XL** (więcej przestrzeni między podłokietnikami) z kołami
- W wersji **Ocean Vip** można zastosować w podłokietniki z XL

Opcje i właściwości



Pochylenie siedziska

Kąt nachylenia 0 ° - 35 °.



Zagłówki

W komplecie zagłówki z regulacją wysokości i głębokości.



Blokada kierunkowa

Łatwe w obsłudze hamulce na 3 kółkach, 1 kółko z blokadą kierunkową ułatwiającą pchanie wózka wzdłuż po prostych powierzchniach.



Regulowana wysokość siedziska

Regulacja w 3 krokach, bez użycia narzędzi.


Aquatec **Ocean Dual-Vip**

- Pochylenie siedziska regulowane indywidualnie (kąt nachylenia 0 ° - 35 °)
- Dwie dodatkowe sprężyny gazowe ze stali nierdzewnej obniżające oparcie (kąt nachylenia 10 ° - 50 °)
- Druga dźwignia z blokadą bezpieczeństwa do obniżania oparcia
- Szczególnie stabilny nawet przy maksymalnym kącie nachylenia, w zestawie z antytipierami
- Regulowane oparcie z możliwością regulacji, łatwe do czyszczenia, posiada z klamry na szybkozłączkach - można dostosować do użytkownika

Ocean Dual Vip jest dostępny, co następuje:

- Wersja standardowa z kółkami
- The **Ocean Vip** można doposażyć w rozkładane oparcia dla modelu **Ocean Dual Vip** i antytipery
- **Ocean Dual Vip** można doposażyć w podłokietniki XL

Opcje i właściwości



Powierzchnia siedziska 0°, oparcie 25°



Pełny zakres nachylenia siedziska 35°, oparcie 50°



Posiada antytipery


Aquatec **Ocean E-Vip**

- Wysokość siedziska regulowana elektrycznie, bardzo płynnie między 50 a 105 cm
- Siedzisko można przechylić elektrycznie do przodu i do tyłu (kąt nachylenia -5 ° do 35°)
- Szczególnie stabilny nawet przy maksymalnym kącie pochylenia i maksymalnej wysokości siedzenia
- Wyraźna dźwignia manualna do prostej regulacji wysokości siedziska i nachylenia siedziska (tylko 4 przyciski)
- Zamknięte podzespoły elektroniczne: idealne rozwiązanie jeśli chodzi o użytkowanie pod prysznicem
- Można czyścić w automatycznych pralniach w temperaturze do 85 ° C!
- Wyjmowany akumulator można łatwo naładować

Ocean E-Vip jest dostępny, co następuje:

- Wersja standardowa z kołami
- **Ocean E-Vip** można doposażyć w podłokietniki XL

Opcje i właściwości



Maksymalny kąt pochylenia i maksymalna wysokość siedziska



Wyjmowany akumulator



Przejrzysty panel sterowania manualnego

Akcesoria Aquatec Ocean



Miękkie siedzisko

Z wycięciem w kształcie klucza

16341 dla **Ocean / Ocean XL / Ocean E-Vip 1470075** dla **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**



Miękka wkładka do siedzenia

Do miękkiego siedzenia z wycięciem w kształcie klucza.

16343 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**



Miękkie siedzisko

Z małym, owalnym otworem.

16342 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**



Ośłona przed wodą

Na zatrzask, do miękkiego siedzenia z wycięciem w kształcie klucza.

16511 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**.

Akcesoria Aquatec Ocean


Uniwersalne, miękkie siedzisko
Zamknięta powierzchnia siedziska
1526032 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**



Ergonomiczne specjalne miękkie siedzisko
Wyjątkowo miękka, teksturowana powierzchnia **531259** miękka dla **Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip**



Drażek bezpieczeństwa
Dla dodatkowego bezpieczeństwa. Powierzchnia z miękkim obiciem. Łatwy w montażu.
10167-10 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**. Długość: 54 cm
1470078 XL drażek bezpieczeństwa dla wszystkich modeli z wersji **XL Ocean**. Długość: 62 cm



Pasy bezpieczeństwa
Do bezpiecznego pozycjonowania. Indywidualnie regulowany, o dużej ładowności, łatwy w montażu. Łatwy do czyszczenia. Dla wszystkich modeli z serii **470081** Pas na klatkę piersiową, szary **1470082** Pas biodrowy, szary



Blokada podłokietnika
Do zablokowania podłokietnika i kąta.
1470077 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**



XL oparcie
Zwiększa odległość między podłokietnikami o 8 cm. Zestaw Retrofit do **Ocean**.
1534979



Szersze podłokietniki XL
Zwiększa odległość między podłokietnikami o 4 cm z każdej strony. Zestaw Retrofit do **Ocean Vip, Ocean Dual Vip** and **Ocean E-Vip 1470086** Szersze podłokietniki XL (para)



Koła 24 "(zestaw)
Zawiera hamulce i demontowane osie.
16379 dla **Ocean / Ocean XL**



Podkładka pod kończynę po amputacji (pokazane dla Ocean)

Wyścielana, z regulacją wysokości i kąta.
16616 dla **Ocean / Ocean XL** (lewa lub prawa)
1470083 lewa dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip i Ocean EVip**
1470827 prawa dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip i Ocean E-Vip**



Podkładka pod łydkę (pokazane dla Ocean)

Wyścielana, z regulacją wysokości i kąta.
16615 dla **Ocean / Ocean XL** ((lewa lub prawa) lewa dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip i Ocean EVip**
1470084 prawa dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip i Ocean E-Vip**



Sedes
With handle and cover.
10230 dla wszystkich modeli z serii **Ocean**. Długość: 46 cm

Uchwyt do sedesu (nie pokazano)
16335 dla **Ocean / Ocean XL**
1470076 dla **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**
1471233 dla **Ocean E-Vip**



Zagłówek/Podpórka pod szyję (podpórka pod szyję pokazana)
1531465 Zagłówek dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip** and **Ocean E-Vip**
1531608 podpórka pod szyję dla **Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip** i **Ocean E-Vip**

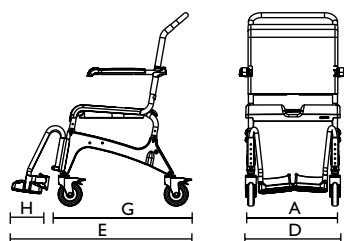
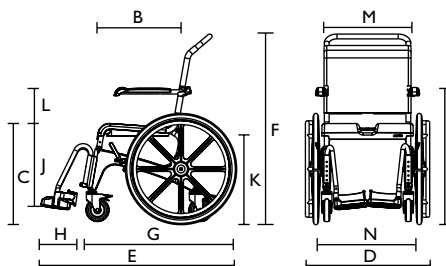
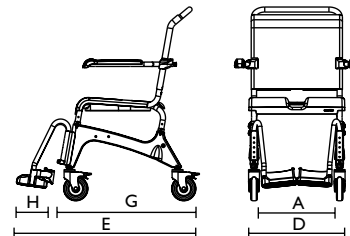
Dane techniczne

Numery zamówień	Aquatec Ocean	Aquatec Ocean 24" wheels	Aquatec Ocean XL
Wózek prysznicowy z kołami	7.10.900		7.13.900
Wózek prysznicowy z kołami 24"		7.12.900	

Wymiary			
Szerokość siedziska	48 cm (A)	48 cm (A)	48 cm (A)
Głębokość siedziska	45 cm (B)	45 cm (B)	45 cm (B)
	45 cm (B)	47.5 - 60 cm (C)	47.5 - 60 cm (C)
Szerokość całkowita	56 cm (D)	67.5 cm (D)	64 cm (D)
Głębokość całkowita	90 cm (E)	106 cm (E)	90 cm (E)
Wysokość całkowita	94 - 107 cm (F)	94 - 107 cm (F)	94 - 107 cm (F)
Głębokość bez podnóżków	70 cm (G)	85.5 cm (G)	70 cm (G)
Głębokość płyty podnóżka	15.5 cm (H)	15.5 cm (H)	15.5 cm (H)
Wysokość do podłokietników	68 - 85 cm (I)	68 - 85 cm (I)	68 - 85 cm (I)
Wysokość, od podnóżków do siedziska	25.5 - 49.5 cm (J)	25.5 - 49.5 cm (J)	25.5 - 49.5 cm (J)
Wysokość, od podłoża do dolnej krawędzi siedziska: z uchwytem sedesu/ bez uchwyty sedesu	39 - 52 cm (K) 41 - 54 cm (K)	39 - 52 cm (K) 41 - 54 cm (K)	39 - 52 cm (K) 41 - 54 cm (K)
Wysokość, od siedziska do podłokietników	21 / 25 cm (L)	21 / 25 cm (L)	21 / 25 cm (L)
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	46 cm (M)	46 cm (M)	54 cm (M)
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska	20.5 cm	20.5 cm	20.5 cm
Głębokość, wycięcie w płycie siedziska	32 cm	32 cm	32 cm
Regulacja wysokości z podziałką	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm
Ø Koła	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Koła napędowe	–	24" (610 mm)	–
Szerokość pomiędzy kołami 24"	–	54 cm (N)	–

Więcej informacji			
Waga	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg
Ładowność	150 kg	150 kg	180 kg
Kolor	Biały	Biały	Biały

Pasy na pięty wchodzą w zakres dostawy., natomiast uchwyt na sedes i sam sedes nie.

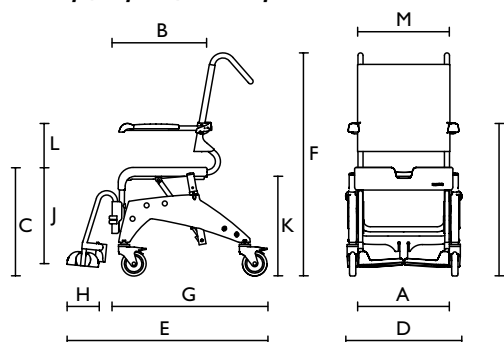
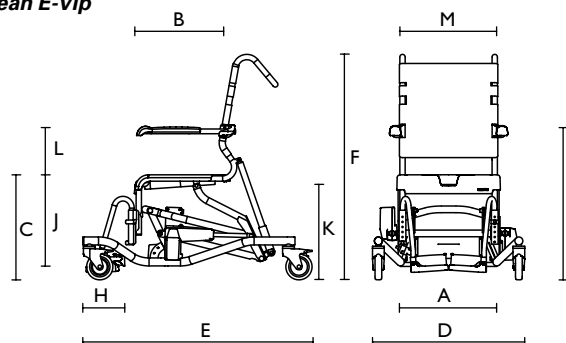
Ocean z kołami

Ocean z kołami 24"

Ocean XL


Dane techniczne

Numerzy zamówień	Aquatec Ocean Vip z odchylanym oparciem	Aquatec Ocean Vip XL z odchylanym oparciem	Aquatec Ocean Dual Vip z odchylanym do pozycji półleżącej oparciem	Aquatec Ocean E-Vip
Wózek prysznicowy z kołami	1470000	1470788	1470829	1471208
Wózek prysznicowy z kołami i uchwytem na toaletę	1470712			1522373
Wózek prysznicowy z kołami i uchwytem na sedes i miękkim siedziskiem	1470713			

Wymiary				
Szerokość siedziska	50 cm (A)	50 cm (A)	50 cm (A)	48 cm (A)
Głębokość siedziska	45 cm (B)	45 cm (B)	45 cm (B)	45 cm (B)
Wysokość siedziska	51 - 61 cm (C)	51 - 61 cm (C)	51 - 61 cm (C)	50 - 105 cm (C)
Szerokość całkowita	59.5 cm (D)	62.5 cm (D)	62.5 cm (D)	73 cm (D)
Głębokość całkowita	106 cm (E)	106 cm (E)	106 cm (E)	101 cm (E)
Wysokość całkowita bez regulowanego zagłówka	108.5 - 118.5 cm (F)	108.5 - 118.5 cm (F)	108.5 - 118.5 cm (F)	107 - 162 cm (F)
Głębokość bez podnóżków	84.5 cm (G)	84.5 cm (G)	84.5 cm (G)	101 cm (G)
Głębokość płyty podnóżka	16 cm (H)	16 cm (H)	16 cm (H)	15.5 cm (H)
Wysokość do podłokietników	72 - 86 cm (I)	72 - 86 cm (I)	72 - 86 cm (I)	73 - 132 cm (I)
Wysokość, od podnóżków do siedziska	34.5 - 46.5 cm (J)	34.5 - 46.5 cm (J)	34.5 - 46.5 cm (J)	34.5 - 46.5 cm (J)
Wysokość, od podłoża do dolnej krawędzi siedziska: z uchwytem sedesu/ bez uchwyty sedesu	42 - 52 cm (K) 44 - 54 cm (K)	42 - 52 cm (K) 44 - 54 cm (K)	42 - 52 cm (K) 44 - 54 cm (K)	42 - 97 cm (K) 46.5 - 101.5 cm (K)
Wysokość, od siedziska do podłokietników	21.5 / 24.5 cm (L)	21.5 / 24.5 cm (L)	21.5 / 24.5 cm (L)	23 - 27 cm (L)
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	47.5 cm (M)	55.5 cm (M)	47.5 cm (M)	47 cm (M)
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska	20.5 cm	20.5 cm	20.5 cm	20.5 cm
Głębokość, wycięcie w płycie siedziska	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Kąt przechyłu siedziska	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Kąt przechyłu oparcia	-	-	10° - 50°	-
Regulacja wysokości z podziałką	5 cm	5 cm	5 cm	bezpstopniowa
Ø Koła	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)

Więcej informacji				
Waga	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Ładowność	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

Ocean E-Vip



Invacare® H263 / H273 Lima

- Stabilna, odporna na korozję aluminiowa rama
- Łatwy w obsłudze mechanizm składania umożliwia oszczędność miejsca i ułatwia transport
- Zmienne, wyściełane siedzisko z wycięciem może być używane w czterech orientacjach i tym samym ułatwia wykonanie czynności związanych z higieną osobistą
- Odchylane podłokietniki i regulowane na wysokość, odchylane i odpinane podnóżki w celu prostego przenoszenia użytkownika
- Podwójna blokada na wszystkich 4 kółkach zapewnia niezawodne zatrzymywanie i unieruchomienie
- Miękkie oparcie z szybko schnącego materiału.
- Bardzo dobre pozycjonowanie nad toaletą

Lima jest dostępny, co następuje::

- W wersji standardowej z kołami
- W wersji z napędem manualnym z kołami 24"
- W obu modelach:: uchwyt na sedes, sedes, wyściełane siedzisko i pas biodrowy wchodzi w zakres dostawy

Opcje i właściwości



H273 / Lima z kołami 24"



Różnorodność w ustawieniu siedziska posiadającego wycięcie jak w sedesie



Składany



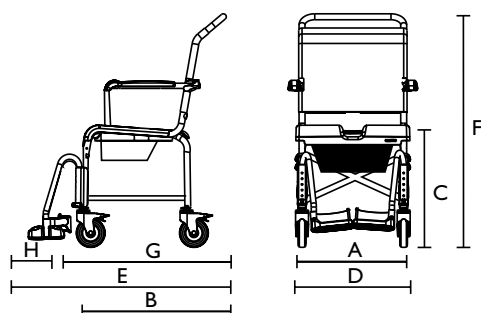
Wyposażony w pas biodrowy

Dane techniczne

Numery zamówień	Invacare® H263 Lima	Invacare H273 Lima 24" wheels
Wózek prysznicowy z kołami	1525732	
Wózek prysznicowy z kołami 22"		1525733

Wymiary		
Szerokość siedziska (A)	46 cm	46 cm
Głębokość siedziska (B)	46 cm	46 cm
Wysokość siedziska (C)	58 cm	58 cm
Waga całkowita (D)	57 cm	68 cm
Głębokość całkowita (E)	105 cm	112 cm
Wysokość całkowita (F)	100 cm	100 cm
Szerokość całkowita po złożeniu	22.5 cm	33.5 cm
Głębokość całkowita po złożeniu	105 cm	112 cm
Wysokość całkowita po złożeniu	100 cm	100 cm
Głębokość bez podnóżków	76 cm	76 cm
Głębokość płyty podnóżka (H)	16.5 cm	16.5 cm
Wysokość do podłokietników	78 cm	78 cm
Wysokość, od podnóżków do siedziska	32.5 – 46 cm	32.5 – 46 cm
Wysokość, od podłoża do dolnej krawędzi siedziska: z uchwytem sedesu/ bez uchwytu sedesu	34 cm 53.5 cm	34 cm 53.5 cm
Wysokość, od siedziska do podłokietnika	21 cm	21 cm
Szerokość pomiędzy podłokietnikami	47.5 cm	47.5 cm
Szerokość, wycięcie w płycie siedziska	19 cm	19 cm
Głębokość, wycięcie w płycie siedziska	36 cm	36 cm
Ø Koła	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Koła napędowe	–	24" (610 mm)
Szerokość między kołami 24 "	–	55 cm

Więcej informacji		
Waga	14.0 kg	18.5 kg
Ładowność	135 kg	135 kg
Kolor	Granat-biały	Granat-biały

Invacare H263 Lima

Invacare International Sarl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196 Gland
Szwajcaria
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11 hqeuropa@invacare.com www.invacare.eu.com

© Invacare® International Sarl 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie pomiary zostały wykonane zgodnie ze standardowymi warunkami testu Invacare®, chyba że podano inaczej. Wszystkie cytowane informacje są uważane za prawidłowe w momencie druku. Invacare® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji.

Wózki prysznicowe EU - 09/2010