

# *Küschall*<sup>®</sup>

## COMPACT



## **ŚWIAT BEZ GRANIC**

W Kuschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli posiadasz moc, aby to osiągnąć. Kuschall Compact oferuje wszechstronność i niezawodność w jednym produkcie. Pokaż swoje oblicze, postaw na wygodę. **Otwórz swój świat.**

## **KÜSCHALL COMPACT**

Kuschall Compact jest absolutnym symbolem **niezawodności** i wysokiej jakości. Wózek jest wyposażony w odchylany lub stały podnózek, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb w celu **zwiększenia poczucia komfortu**. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyższego poziomu konfigurowalności, czy aktywnego produktu, wyjątkowa funkcjonalność wózka będzie pasować do Twojego stylu życia.

## **HYDROFORMOWANIE**

Hydroformowanie wniosło wartość dodaną do serii DNA Compact. Podczas, gdy wszechstronność i komfort pozostają niezmienione, waga została zmniejszona nawet o 500gram. Profil hydroformowanej ramy zapewnia większą sztywność tam, gdzie jest to konieczne oraz posiada bardzo współczesny design.

## PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

- Całkowite przeprojektowanie przedniej ramy i podpórek. Dzięki hydroformowaniu uzyskano redukcję masy do 500 gram.

## PODNÓŻEK

- Wybierz wózek z odchylanymi podnóżkami, idealnymi do transportu i do transferu lub ze stałą przednią częścią ramy (kąt 80 ° lub 70°) dla zapewnienia większej sztywności.

## PŁYTA PODNÓŻKA

- Nowa seria podnóżków pasuje do wszystkich szerokości siedziska i jest kompatybilna z nowoczesnym stylem projektowania dzięki nowej antypoślizgowej, jednoczęściowej płycie podnóżka.





# KÜSCHALL® COMPACT

## SYSTEM SKŁADANIA

- Łatwy system blokowania „jednym palcem” i mechanizm blokady wzdłużnej do zabezpieczenia rurek siedziska w fazie rozkładania wózka.

## KRZYŻAK

- Zaprojektowany specjalnie dla użytkowników, u których występuje zmniejszona siła mięśniowa. Zapewnia także wsparcie przy większej wadze użytkownika bez zastosowania dodatkowego materiału do rur ramy.

## TRZYMA SIĘ TORU

- Intuicyjna i unikalna regulacja obudowy kółka doskonale nadaje się do utrzymania stałego kierunku poruszania się.

## WIDELEC

- Nowa, przejrzysta konstrukcja oraz zintegrowane łożyska. Zbieranie brudu jest znacznie zmniejszone, a konserwacja i ogólne utrzymanie łatwiejsze.



# KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI


## NIEZAWODNY

Imponująca sztywność - jak dotychczas, najmniejsza utrata energii podczas poruszania się uzyskana. To wszystko dzięki wbudowanemu, różnym rozwiązaniom technicznym w połączeniu z jednym elementem podnóżka. Compact składa się łatwiej niż jakikolwiek składany wózek aktywny, dzięki specjalnie zaprojektowanemu krzyżakowi, który sprawdzi się u użytkowników ze zmniejszoną siłą mięśniową.



## WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Unikalne cechy i zalety dotyczą podnóżków, które są dostępne odpowiednio pod kątem 70 ° lub 80 ° oraz regulowany precyzyjny mechanizm blokujący przy minimalnym luzie. Składane oparcie sprawia, że wózek to jest naprawdę małym i kompaktowym zestawem transportowym.

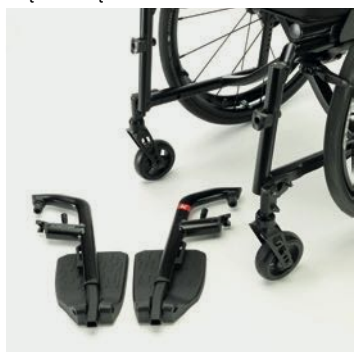

## ZWIĘKSZONY KOMFORT

Wiele opcji pozwala dostosować wózek w zależności od potrzeb, takich jak rama przewidziana w celu lepszego ułożenia nóg. Łatwiej jest utrzymać stopy na podnóżku, a większa zwrotność z przodu oznacza, że wózek potrzebuje mniej miejsca przy manewrach.



## LĘJSZY DZIĘKI HYDROFORMOWANIU

Rama została unowocześniona w każdym calu, dzięki technologii hydroformowania. Dokonano także dokładnego przeprojektowania, co spowodowało znaczną redukcję wagi do 500gram.



# KONFIGURACJA

## 1 WYBIERZ KOLOR RAMY



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

## 2 STYL NAKLEJEK



## 3 KOLOR NAKLEJEK



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**SZEROKOŚĆ  
SIEDZISKA**  
280 – 500 mm  
w odstępach 20 mm



**WYSOKOŚĆ  
SIEDZISKA**  
przód: 370 – 530 mm  
tył: 360 – 500 mm w  
odstępach 10 mm



**CAMBER**

0° / 3°



**GŁĘBOKOŚĆ  
SIEDZISKA**  
320 – 500 mm  
w odstępach 20 mm



**KĄT RAMY**  
70° / 80°  
Rama prosta lub  
rama  
przywiedziona



**CAŁKOWITA WAGA  
Z KOŁAMI**  
ok. 10.5 kg (rama odchylana)  
ok. 9.6 kg (rama stała)



**DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/  
PODUDZIA**  
200 - 510 mm  
w odstępach 10 mm



**SZEROKOŚĆ  
CAŁKOWITA**  
Szerokość siedziska + 160 mm



**WAGA  
TRANSPORTOWA  
(BEZ KÓŁ)**  
ok. 7.8 kg (rama odchylana)  
ok. 6.7 kg (rama stała)



**WYSOKOŚĆ  
OPARCIA**  
300 – 510 mm  
w odstępach 15 mm



**SZEROKOŚĆ  
CAŁKOWITA  
PO ZŁOŻENIU**  
ok. 290 mm



**MAKSYMALNA  
WAGA  
UŻYTKOWNIKA**  
130 kg



**KĄT  
OPARCIA**  
82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



**DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA**

70°: ok. 870 – 1220 mm  
80°: ok. 850 – 1200 mm



**CRASH TEST**

Zatwierdzony - Spełnia  
wymagania ISO 7176-19



Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

E-mail: [biuro@partner-med.pl](mailto:biuro@partner-med.pl)  
Telefon +48 516 293 265  
Lub 32 733 79 99

PARTNER MED POLSKA sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 30C  
41-910 Bytom

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i K-Series s7 znakami towarowymi Invacare International GmbH. dokonano wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie oddania do druku.  
W ramach ciągłego

doskonalenia produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikacji istniejących modeli w dowolnym momencie. © lipiec 2019, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. EU - 1659367