

# KATALOG PRODUKTÓW



*TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™*



**GTM MOBIL** jest **Polską** firmą, która od 2004 roku zajmuję się projektowaniem i produkcją wózków inwalidzkich do aktywnej rehabilitacji oraz profesjonalnych wózków sportowych.

Firma, która początkowo była realizacją marzeń 2 przyjaciół, dziś jest największym producentem zarówno wózków aktywnych jak i sportowych nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Wózkami aktywnymi **GTM MOBIL** porusza się na co dzień ponad 80% członków polskiej kadry paraolimpijskiej. Na wózkach sportowych sukcesy odnoszą między innymi szermierze, koszykarze, rugbiści, lekkoatleci, tenisiści oraz kolarze.



### GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Wszystkie elementy składowe naszych wózków wykonane są z materiałów najwyższej jakości, dobierane na podstawie przeprowadzonych analiz i testów.

Każdy wózek jest indywidualnie dobierany do użytkownika. Rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań, w zależności od cech antropometrycznych oraz sprawności ruchowej, dobór odpowiedniego wyposażenia, dbałość o szczegóły zaspokoją najbardziej wymagających klientów.

Procesy projektowe i produkcyjne wykonywane są przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a dzięki ścisłej współpracy z osobami używającymi naszych wózków ciągle rozwijamy i udoskonalamy naszą ofertę.

### CERTYFIKATY I NAGRODY

Produkty firmy **GTM MOBIL** posiadają deklarację zgodności CE oraz spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Były testowane i badane zgodnie z normami europejskimi.

Posiadamy własne laboratorium do badań mechanicznych wszystkich produktów, w którym badamy nasze ramy według zwiększonych wymagań w stosunku do obowiązujących norm. Współpracujemy także z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, dzięki czemu nasze konstrukcje odznaczają się nie tylko wysoką wytrzymałością, ale także lekkością i mobilnością.



Wózek GTM Hammer otrzymał nagrodę  
Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 2005”





# WÓZKI AKTYWNE DLA DOROSŁYCH



## GTM BASIC

- klasyczna, zamknięta rama
- bardzo wytrzymała konstrukcja
- regulowany środek ciężkości

str. 5



## GTM1

- klasyczna, zamknięta rama
- regulowany środek ciężkości
- wymiary standardowe i indywidualne

str. 7



## GTM MUSTANG

- rama otwarta
- regulowany środek ciężkości
- nowoczesny design
- wymiary standardowe lub indywidualne

str. 9



## GTM ENDEAVOUR

- rama otwarta
- indywidualne wymiary
- stały środek ciężkości

str. 11



## GTM HAMMER

- indywidualne wymiary
- wzmocniona konstrukcja podsiedzeniowa
- dla cięższych użytkowników

str. 13



## GTM SHOCK-ABSORBER

- amortyzacja siedziska
- indywidualne wymiary
- stały środek ciężkości

str. 15



## GTM CHALLENGER

- otwarta rama
- indywidualne wymiary
- regulowany środek ciężkości

str. 17



## GTM CARISA

- smukła, zamknięta rama
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- regulowany środek ciężkości

str. 19



## GTM JAGUAR

- bardzo niska waga
- klasyczna, zamknięta rama
- bardzo wytrzymała konstrukcja

str. 21



## GTM PRESIDENT

- odchylane podnóżki
- indywidualne wymiary
- regulowany środek ciężkości

str. 23





**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**

- **KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **BARDZO WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

**GTM BASIC** to wózek **GTM1** skonfigurowany w taki sposób, aby jego cena nie przekraczała dofinansowania z NFZ i 150% z PCPR. Wózek o klasycznej, zamkniętej budowie ramy z regulacją położenia środka ciężkości.

Mimo okrojonego wyboru dodatkowego wyposażenia, Basic posiada wszystko, co jest niezbędne w codziennym, wygodnym użytkowaniu, a wytrzymała rama zapożyczona z modelu **GTM1** gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność nawet przy dużym obciążeniu.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne
- Kółka przednie 4", plastikowa czarna felga
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczki wyciągane, plastikowe
- Dwuramienné widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowie malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Hamulec nożycowy
- Platforma podnóżka
- Ciągi stalowe
- Rączki do pchania
- Podnóżek dzielony
- Zagłówek
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie



Standardowe koła ze szprychami stalowymi w klasycznym, krzyżowym zaplocie



Hamulce boczne - łatwe w użyciu, przydatne w codziennym użytkowaniu



Boczki wyciągane - ochronią ubranie przed zabrudzeniami

- **KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**
- **WYMIARY STANDARDOWE LUB INDYWIDUALNE**

Klasyczny wózek o zamkniętej budowie ramy. Bardzo wytrzymały, a zarazem lekki i estetyczny, wykonany z wysokiej jakości lotniczego stopu aluminium.


Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru optymalnych dla każdego użytkownika parametrów, pozwala zadowolić zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie 4", plastikowa czarna felga
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczki wyciągane, plastikowe
- Dwuramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas lydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa lub podnóżek dzielony / odchylany
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Boczki karbonowe, składane z oparciem lub podłokietnikami
- Jednoramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie

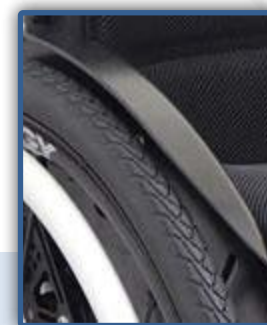

Boczek z błotnikiem osłaniającym ubranie przed zachlapaniem



Koła Spinergy – najbardziej znane koła ze szprychami węglowymi, w zaplocie radialnym



Przednie koła z felgą aluminiową, zamontowane na dwuramiennym widelcu

**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**





- **RAMA OTWARTA**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**
- **NOWOCZESNY DESIGN**
- **WYMIARY STANDARDOWE LUB INDYWIDUALNE**

Jeden z najnowszych modeli w stajni **GTM**, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych technologii, w połączeniu z wysoką jakością użytych materiałów i precyzją wykonania, dają lekki, a zarazem bardzo wytrzymały produkt najwyższej klasy. Wózek o regulowanym położeniu środka ciężkości oraz wysokości podnóżka. Dzięki otwartej budowie ramy i składanemu oparciu typu „lock-down”, po złożeniu zajmuje niewiele miejsca w transporcie.

**GTM Mustang** występuje także w wersji indywidualnej, w której wszystkie wymiary ramy są dostosowywane do konkretnych wymagań klienta.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Siedzisko ergonomiczne
- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie plastikowe 4"
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Boczki wyciągane
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Oparcie anatomiczne / ergonomiczne
- Podnóżek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa
- Koła tylne Spinergy
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Boczki składane z oparciem lub podłokietnikami
- Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie
- Elementy stabilizujące – zagłówki, peloty boczne
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie



Standardowa, plastikowa platforma podnóżka z możliwością zamocowania dodatkowego pasa na stopy



Aluminiowe kółko mocowane do widelca jednoramiennego, części anodowane na niebiesko



Karbonowy boczek z błotnikiem - bardzo sztywny i wytrzymały

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™



- **RAMA OTWARTA**
- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **STAŁY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Całkowicie indywidualny wózek o otwartej budowie ramy. Dzięki sztywnej konstrukcji i stałemu ustawieniu środka ciężkości, jest to jeden z najlżejszych wózków **GTM**.


Możliwość indywidualnego określenia prawie każdego wymiaru oraz wyboru niemalże wszystkich elementów wyposażenia sprawia, że wózek ten zadowoli nawet najbardziej wymagającego użytkownika, który dokładnie wie, czego potrzebuje przy codziennym użytkowaniu. Określenie „szyty na miarę” doskonale oddaje charakter **GTM Endeavour**.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie aluminiowe 4"
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczek sztywne, wyciągane lub składane z oparciem, karbonowe
- Dwuramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas lędźwiowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Oparcie anatomiczne / ergonomiczne
- Podnóżek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"z uszczelnionymi łożyskami
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Podłokietniki lub boczek karbonowe o indywidualnych wymiarach
- Jednoramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie anti-wywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie

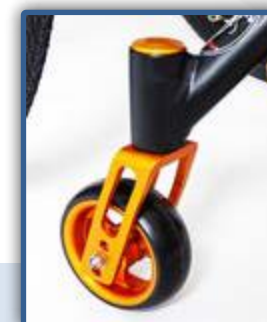

Kółka aluminiowe anodowane wraz z widelcem dwuramiennym - różne warianty kolorystyczne uatrakcyjnają wygląd



Szttywne oparcie - dzięki brakowi dodatkowych elementów mocujących - obniża wagę wózka i zwiększa jego sztywność całkowitą



Szttywne boczki z przykręconymi błotnikami karbonowymi - lekkie, eleganckie i praktyczne

**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **WZMOCNIONA KONSTRUKCJA PODSIEDZENIOWA**
- **DLA CIĘŻSZYCH UŻYTKOWNIKÓW**

Pierwszy całkowicie indywidualny wózek **GTM**, o sztywnej konstrukcji, stałym ustawieniu środka ciężkości i otwartej budowie ramy.

Poprzednik Endeavour'a, od którego różni się jedynie sposobem połączenia siedziska z belką główną. Siedzisko Hammera opiera się na dwóch rurach w kształcie trójkąta, co pozwala na jego użytkowanie przez osoby powyżej 100 kg.

Wózek **GTM Hammer** otrzymał Nagrodę Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie aluminiowe 4"
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczki sztywne, wyciągane lub składane z oparciem, karbonowe
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Ergonomiczny kształt siedziska
- Sztywne oparcie
- Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Podłokietniki
- Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie



Specjalna tapicerka oparcia – środek wykonany z perforowanej Alcantary, boki natomiast z gładkiej czerwonej skóry



Koła Spinergy LX12 z zamontowanymi grubymi ciągami, zaadaptowanymi z wózków rugby



Podnóżek aluminiowy z indywidualną platformą aluminiową w kształcie podnóżka





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **AMORTYZACJA SIEDZISKA**
- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **STAŁY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Najbardziej zaawansowany technologicznie wózek w stajni **GTM**. Pełna amortyzacja siedziska i zawieszenie kółek przednich niemal w pełni redukują drgania, pozwalając na komfortową jazdę po nierównym podłożu bez obciążania kręgosłupa.

Zastosowany amortyzator gazowo olejowy ma pełną regulację sztywności oraz możliwość zablokowania, dzięki czemu można uzyskać pełną sztywność ramy. Wózek wykonany z najwyższej jakości materiałów takich jak lotnicze aluminium, skóra czy włókno węglowe, które gwarantują niezawodność i komfort użytkowania.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Siedzisko ergonomiczne, amortyzowane
- Podnózek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe / standardowe
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie aluminiowe, amortyzowane
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Pasy oparcia z Alcantary
- Boczek sztywne, wyciągane lub składane z oparciem, karbonowe
- Widelce kółek przednich amortyzowane lub standardowe
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas łydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Oparcie anatomiczne / ergonomiczne
- Podnózek tytanowy lub platforma plastikowa / karbonowa
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"z uszczelnionymi łożyskami
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Podłokietniki
- Elementy stabilizujące – klin / zagłówek / peloty boczne
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie
- Osłony na szprychy z logo GTM
- Kolorowe szwy



Amortyzator gazowo-olejowy zapewnia płynniejszą i bardziej komfortową jazdę



Koła Spinergy LX12 z ciągami z pokryciem silikonowym dla lepszego chwytu



Amortyzowane widelce kółek przednich





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **OTWARTA RAMA**
- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Wózek aktywny o otwartej budowie ramy i indywidualnych, dopasowanych do użytkownika wymiarach. **GTM Challenger**, podobnie jak **GTM Mustang**, posiada regulację środka ciężkości.

Elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego są takie same jak w modelach Hammer i Endeavour.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnózek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne ze szprychami stalowymi w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie aluminiowe 4"
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczki sztywne, wyciągane, lub składane z oparciem, karbonowe
- Dwuramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Ergonomiczny kształt siedziska
- Sztywne oparcie
- Podnózek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa lub podnózek dzielony 1- lub 2-stronny
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Podłokietniki
- Jednoramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie



4" plastikowe kółka przednie, z felgą w kolorze czarnym, zamocowane na dwuramiennym widelcu



Tapicerka wykonana z wytrzymałego materiału - Alcantary. Dodatkowo wszyta kieszonka pozwala na schowanie drobiazgów



Dodatkowo wspawana belka pod siedziskiem pozwala na swobodną zmianę balansu





- **SMUKŁA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
- **WYMIARY STANDARDOWE LUB INDYWIDUALNE**

Wózek zaprojektowany specjalnie z myślą o kobietach. Konstrukcją przypomina wózek **GTM1** o zamkniętej budowie ramy, jednak jego wymiary i cieńsze rurki sprawiają, że jest lżejszy i bardziej elegancki.

Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru optymalnych dla każdej pani parametrów, pozwala zadowolić najbardziej wymagające przedstawicielki płci pięknej.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne
- Kółka przednie 4", plastikowa czarna felga
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem
- Boczki wyciągane, plastikowe
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowie malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas lędźwiowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Sztywne oparcie
- Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa lub podnóżek odchylany / dzielony
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Schwalbe / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4" lub 5"
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Rączki do pchania
- Boczki karbonowe, składane z oparciem lub podłokietnikami
- Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie



Regulowany środek ciężkości



Boczek składany razem z oparciem



Lekkie błotniki karbonowe oraz ciągi gumowe dla lepszego chwytu

**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**



- **BARDZO NISKA WAGA**
- **KLASYCZNA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **BARDZO WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**

Najlżejszy wózek w stajni **GTM** – klasyczny, o zamkniętej budowie ramy. Bardzo wytrzymały, a zarazem lekki i estetyczny, wykonany z wysokiej jakości lotniczego stopu aluminium.

Regulacja położenia środka ciężkości oraz możliwość doboru optymalnych dla każdego użytkownika parametrów, pozwala zadowolić zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych użytkowników.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne Spinergy LX12, 24"
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run
- Hamulec nożycowy kompaktowy
- Kółka przednie 4", aluminiowe
- Siedzisko na mocnej i lekkiej płachcie, z regulacją napięcia na pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie składane
- Boczeki wysuwane, plastikowe lub karbonowe
- Dwuramiennie widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowie malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy
- Przednia poszewka z dwiema kieszeniami

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Podnóżek tytanowy, platforma karbonowa
- Ciągi aluminiowe czarne, stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Obszycie poduszki i oparcia skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie



Kompaktowe hamulce nożycowe



Koła Spinergy - najbardziej znane koła ze szprychami węglowymi, w zaplocie radialnym



Przednie kółeczka z felgą aluminiową, zamontowane na dwuramiennym widelcu

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **ODCHYLANE PODNÓŻKI**
- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Wózek **GTM President** przeznaczony jest głównie dla osób, które podczas poruszania wspomagają się nogami. Odchylane na obydwie strony i wyjmowane podnóżki umożliwiają postawienie stóp na podłodze zarówno podczas jazdy jak i podczas wsiadania i schodzenia z wózka.

Wózek bardzo wytrzymały, o zamkniętej budowie ramy i regulowanym środku ciężkości, z możliwością zastosowania wszelkich rozwiązań ergonomicznych. Indywidualnie dobierane wymiary pozwalają na ich dokładne dostosowanie do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek typu „Swing away”, otwierany na zewnątrz, łatwo demontowalny
- Koła tylne w zaplocie radialnym lub krzyżowym
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Hamulce boczne lub nożycowe
- Kółka przednie 4” lub 5” aluminiowe
- Siedzisko proste lub ergonomiczne, na pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne lub składane
- Tapicerka oparcia z przewiewnego materiału
- Podłokietniki / boczki z włókna węglowego / plastikowe, wyciągane lub składane z oparciem
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Rączki do pchania

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Podnóżek tytanowy, platforma plastikowa / karbonowa
- Koła tylne Spinergy / terenowe / sportowe
- Ciągi stalowe, tytanowe lub pokryte gumą
- Opony Marathon+ / Tufo / Kenda
- Kółka przednie aluminiowe 4” lub 5”, uszczelnione
- Obszycie poduszki i oparcia, skórzane lub z Alcantary
- Obszycie ramy
- Elementy stabilizujące – klin / zagłówek / peloty boczne
- Jednoramienne widelce mocujące kółka przednie
- Anodowane elementy aluminiowe
- Rama polerowana lub malowanie na zamówienie
- Osłony na szprychy z logo GTM
- Kolorowe szwy



Rączki do pchania w rurek oparcia - posiadają płynną regulację wysokości, z możliwością złożenia na czas transportu



Odchylane stopki, przeznaczone dla osób, które w czasie jazdy wspomagają się nogami



Wygodne podłokietniki, posiadają regulację wysokości, pozwalają usiąść wygodnie jak w fotelu



# WÓZKI SPORTOWE



## KOSZYKÓWKA - GTM GLADIATOR

- wytrzymała, sztywna rama
- duży kąt nachylenia kół dla lepszej zwrotności
- wersja regulowana lub sztywna

str. 27



## RUGBY OFENSYWNY - GTM RAPTOR

- najwytrzymalsza rama GTM
- pełny ofensywny przedni zderzak
- koła ofensywne, z ciągami zintegrowanymi

str. 29



## RUGBY - GTM ZOLTAR

- wytrzymała, sztywna rama
- duży kąt nachylenia kół dla lepszej zwrotności
- charakterystyka defensywna lub defensywno-ofensywna

str. 31



## TENIS - GTM OPEN

- sztywna, zamknięta rama
- duży kąt kół dla lepszej zwrotności
- w pełni indywidualne wymiary

str. 33



## SZERMIERKA - GTM FENCE

- sztywna, zamknięta rama
- bardzo wytrzymała konstrukcja
- pałąk boczny - do przytrzymania

str. 35



## TANIEC - GTM TANGO

- indywidualne wymiary
- duża zwrotność
- lekka i wytrzymała konstrukcja

str. 37



# GTM GLADIATOR



**GTM GLADIATOR** to wózek dla koszykarzy. Jest wykonywany w dwóch wersjach – regulowanej lub sztywnej.

Wersję regulowaną proponujemy graczom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z koszykówką i nie są pewni, jakie ustawienia będą dla nich optymalne.

Wersję sztywną polecamy graczom zawodowym oraz tym, którzy doskonale wiedzą, jaką geometrię powinien mieć ich wózek i którzy oczekują maksymalnej sztywności, lekkości oraz wytrzymałości.

Obie wersje są wykonywane z indywidualnymi wymiarami.

- **WYTRZYMAŁA, SZTYWNA RAMA**
- **DUŻY KĄT NACHYLENIA KÓŁ DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI**
- **WERSJA REGULOWANA LUB SZTYWNA**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą
- Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym
- Ośki pół-calowe
- Ciągi aluminiowe lub stalowe
- Opony Schwalbe Speed Air
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne
- Boczeki wspawane, z zaczepionymi pasami
- Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie
- Pojedyncze zabezpieczenie antywywrotne, wspawane
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Regulacja wysokości podnóżka
- Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami przytrzymującymi stopy
- Ciągi tytanowe
- Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej, z opcją ergonomicznego kształtu
- Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry
- Pasy oparcia skórzane
- Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji
- Opony Tufo lub Kenda
- Koła Spinergy SLX 24
- Sportowe ośki do kół - 25mm
- Oparcie anatomiczne lub "ergo"
- Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie



Koła sportowe Spinergy SLX 24-szprychowe



Profesjonalny pas sportowy Pelvi.Loc 2DA



Sztywny podnóżek z dodatkową bandą z przodu

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™





- **NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁA RAMA GTM**
- **PEŁNY OFENSYWNY PRZEDNI ZDERZAK**
- **KOŁA OFENSYWNE, Z CIAGAMI ZINTEGROWANYMI**

**GTM RAPTOR** to ofensywny wózek do rugby, doskonały dla ofensywnych napastników. Posiada wzmocnioną konstrukcję w stosunku do innych wózków sportowych, co czyni go najwytrzymalszym wózkem w stajni **GTM**.

Rama wykonywana indywidualnie na zamówienie, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Rugby na wózkach IWRF.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą
- Koła ofensywne z osłoną zintegrowaną z ciągiem
- Ośki pół-calowe
- Ciągi aluminiowe, zintegrowane z osłoną koła
- Opony Schwalbe Speed Air
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach, z opcją ergonomicznego kształtu
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne
- Szeroki pas stabilizujący tułowie oraz dodatkowe paski na nogi
- Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami lub proste wspawane wsporniki
- Dwuramiennie, krótkie widelce mocujące kółka przednie
- Podwójne zabezpieczenie antywywrotne z zamontowanymi osłonami u spodu
- Pełny zderzak ofensywny
- Pas łydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Regulacja wysokości podnóżka
- Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami przytrzymującymi stopy
- Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry
- Pasy oparcia skórzane
- Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji
- Opony Tufo lub Kenda
- Sportowe ośki do kół - 25mm
- Oparcie anatomiczne lub "ergo"
- Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
- Dodatkowy, przykręcany zderzak
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie



Platforma podnóżka z regulacją wysokości



Koło ofensywne, z ciągiem aluminiowym zintegrowanym w osłonę koła



Osłony na wsporniki antywywrotne zapobiegają podważaniu i blokowaniu przez innych graczy

**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**





- **WYTRZYMAŁA, SZTYWNA RAMA**
- **DUŻY KĄT NACHYLENIA KÓŁ DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI**
- **CHARAKTERYSTYKA DEFENSYWNA LUB DEFENSYWNO-OFENSYWNA**

**GTM ZOLTAR** jest wózkiem defensywnym do rugby. Jest zbudowany na solidnej bazie z wytrzymałych profili, posiada zderzak przedni oraz może posiadać dodatkowe zderzaki boczne, dzięki którym z wózka defensywnego zmienia się w wózek ofensywno-defensywny.

Wykonywany według indywidualnych wymiarów zawodnika, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Rugby na Wózkach IWFR.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnózek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą
- Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym
- Ośki pół-calowe
- Ciągi aluminiowe lub stalowe
- Opony Schwalbe Speed Air
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach, z opcją ergonomicznego kształtu
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne
- Szeroki pas stabilizujący tułowie oraz dodatkowe paski na nogi
- Boczeki wspawane, z zaczepionymi pasami lub proste wspawane wsporniki
- Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie
- Podwójne zabezpieczenie antywywrotne z zamontowanymi osłonami u spodu
- Przedni zderzak defensywny
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Regulacja wysokości podnóżka
- Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami przytrzymującymi stopy
- Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Ciągi tytanowe lub pokryte grubą, czerwoną gumą
- Obszycie ramy poliestrowe, z Alcanary lub skóry
- Pasy oparcia skórzane
- Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji
- Opony Tufo lub Kenda
- Koła ofensywne z osłoną zintegrowaną z ciągiem
- Sportowe ośki do kół - 25mm
- Oparcie anatomiczne lub "ergo"
- Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie
- Boczne zderzaki ofensywne



Przedni zderzak defensywny



Koła z ciągami powlekаными gumą oraz z mocnymi osłonami na szprychy



Paski kolanowe, pozwalające na lepszą stabilizację zawodnika

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **SZTYWNA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **DUŻY KĄT KÓŁ DLA LEPSZEJ ZWROTNOŚCI**
- **W PEŁNI INDYWIDUALNE WYMIARY**

**GTM OPEN** to wózek dla tenisistów, na sztywnej ramie. Wykonany jest z wysokogatunkowego stopu aluminium.

Rama jest wykonywana według indywidualnych wymiarów i potrzeb zawodnika, zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji ITF.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy sztywny, zespawany z ramą
- Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym
- Ośki pół-calowe
- Ciągi aluminiowe lub stalowe
- Opony Schwalbe SpeedAir
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne
- Boczki wspawane, z zaczepionymi pasami
- Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie
- Pojedyncze zabezpieczenie antywywrotne, wspawane
- Proszkowie malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas lycowy
- Pasy oparcia Alcantara, wierzch tapicerki oddychający

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Regulacja wysokości podnóżka
- Platforma podnóżka z dodatkowymi bandami przytrzymującymi stopy
- Ciągi tytanowe
- Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej, z opcją ergonomicznego kształtu
- Obszycie ramy poliestrowe, z Alcantary lub skóry
- Pasy oparcia skórzane
- Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji
- Opony Tufo lub Kenda
- Koła Spinergy SLX 24
- Sportowe ośki do kół - 25mm
- Osłony szprych z logo GTM
- Oparcie anatomiczne lub „ergo”
- Boczki z płyty aluminiowej, wspawanej na stałe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie



Koła sportowe Spinergy SLX24 wraz z anodowanymi cięgami aluminiowymi i oponami Kenda Kontender



Profesjonalny pas sportowy Pelvi.Loc 2DA



Podnóżek aluminiowy z bandami z przodu oraz po bokach, dla lepszej stabilizacji stóp





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **SZTYWNA, ZAMKNIĘTA RAMA**
- **BARDZO WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
- **PAŁĄK BOCZNY - DO PRZYTRZYMANIA**

**GTM FENCE** to wózek dla szermierzy. Wykonywany jest według indywidualnych wymiarów zawodnika, zgodnie z przepisami Międzynarodowego Komitetu Szermierki IFC.

W pełni sztywna i wytrzymała rama zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas dynamicznej i ostrej walki, pozwalając skupić się wyłącznie na przeciwniku.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z regulacją wysokości
- Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym
- Ośki 12mm lub 1" calowe
- Ciągi aluminiowe lub stalowe
- Opony Schwalbe Right Run / SpeedAir
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa, twarda lub miękka, w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne, wyściełane przewiewnym materiałem
- Szeroki pas na nogi, zapinany na rzep
- Boczek plastikowy montowany na przyspawanym wsporniku
- Dwuramiennne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Platforma podnóżka aluminiowa lub karbonowa
- Ciągi tytanowe
- Siedzisko sztywne na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Tapicerka skórzana lub z Alcantary
- Pas sportowy Pelvi.Loc 2DA
- Koła Spinergy SLX 24
- Ośki sportowe - 25mm
- Flexel - wypełnienie opony zastępujące dętkę



Sportowe koła z w zaplocie radialnym. Zastąpienie dętki Flexelem eliminuje ryzyko jej pęknięcia



Demontowalny pałək, służący do przytrzymywania się podczas walki



Podnóżek z platformą aluminiową, z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia platformy





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **INDYWIDUALNE WYMIARY**
- **DUŻA ZWROTNOŚĆ**
- **LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**

**GTM TANGO** jest profesjonalnym wózkiem do tańca, spełnia wymagania każdego tancerza, bez względu na stopień zaawansowania sportowego.

Wykonywany według indywidualnych wymiarów i potrzeb tancerza.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Platforma podnóżka plastikowa lub aluminiowa, z regulacją kąta nachylenia, z paskiem na stopy
- Regulacja wysokości podnóżka
- Koła tylne sportowe, w zaplocie krzyżowym
- Ośki metryczne lub pół-calowe
- Ciągi aluminiowe lub stalowe
- Opony Schwalbe Speed Air
- Kółka przednie 3", rolkowe
- Siedzisko na regulowanych pasach
- Poduszka gąbkowa w poszewce z przewiewnego materiału
- Oparcie sztywne
- Boczki plastikowe, przykręcane do ramy
- Dwuramienne, krótkie widelce mocujące kółka przednie
- Zabezpieczenie antywywrotne
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy
- Pasy oparcia – Alcantara

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Platforma podnóżka karbonowa lub aluminiowa z bandami
- Siedzisko na płycie aluminiowej lub karbonowej
- Ciągi tytanowe
- Obszycie ramy poliestrowe, z Alcantary lub skóry
- Dodatkowe paski zapinane na rzep, stabilizujące nogi lub tułów
- Pas Pelvi.Loc 2DA dla lepszej stabilizacji
- Opony Tufo lub Kenda
- Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM
- Oparcie anatomiczne lub "ergo"
- Boczki z płyty aluminiowej, wstawiane na stałe lub przykręcane karbonowe
- Rama polerowana lub malowana na zamówienie
- Skórzana tapicerka oparcia / siedziska
- Pasy oparcia skórzane



Skórzana tapicerka, łączona, wykonywana na specjalne zamówienie



Plastikowa platforma podnóżka, z regulacją kąta nachylenia



Zabezpieczenie antywywrotne, mocowane na stałe, z regulacją wysunięcia





# WÓZKI DZIECIĘCE



## **GTM SMYK**

- dla dzieci od 3 lat
- wysoki pałąk dla rodziców
- regulowany środek ciężkości

str. 41



## **GTM JUNIOR**

- dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym
- rama zamknięta
- regulowany środek ciężkości

str. 43



## **GTM KID**

- wózek młodzieżowy
- lekka i sztywna rama
- regulowany środek ciężkości

str. 45





**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**

## GTM SBYK

- **DLA DZIECI OD 3 LAT**
- **WYSOKI PAŁĄK DLA RODZICÓW**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Aktywny wózek dla najmłodszych użytkowników, uwzględnia potrzeby zarówno dziecka, jak i rodzica. Pozwala na aktywne uczestnictwo w grach i zabawach i samodzielne poruszanie się dziecka, pozwalając tym samym na jego prawidłowy rozwój.

Posiada cechy wózka dla dorosłych, dzięki czemu pozwala od początku uczyć się prawidłowych nawyków i przygotowuje do późniejszego korzystania z wózków dla młodzieży i dorosłych. Zabezpieczenia antywywrotne i osłony na szprychy zapobiegają upadkom i nieprzewidzianym wypadkom aktywnego malucha.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą
- Koła tylne 17"
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Marathon Plus z paskiem odbłaskowym
- Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM
- Zabezpieczenia antywywrotne
- Dziecięce hamulce boczne
- Kółka przednie rolkowe
- Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona
- Boczek z włókna szklanego, z osłoną koła, przykręcane do ramy
- 3-punktowy pas zabezpieczający przed zsunięciem z siedziska
- Wysoki pałąk dla rodziców
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowane malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Obszycie ramy
- Pas łydkowy

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Karbonowa platforma podnóżka
- Tapicerka moro (tkanina parasolowa), skórzana lub z Alcantary, kolorowe szwy
- Boczeki karbonowe, proste lub z osłoną koła
- Rączki do pchania wkręcane
- Zagłówek
- Peloty boczne



3-punktowy pas zabezpieczający przed zsunięciem z siedziska



Wysoki pałąk dla rodziców, pozwalający na wygodne prowadzenie i asekurację



Standardowa plastikowa platforma podnóżka - tu w wersji montowanej do przednich rurek





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **DLA DZIECI W WIEKU Wczesnoszkolnym i szkolnym**
- **RAMA zamknięta**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Aktywny wózek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, przystosowany do wagi **do 50 kg**. Możliwość doboru wymiarów do indywidualnych potrzeb dziecka daje możliwość wczesnego zapobiegania wadom postawy i nieprawidłowym nawykom ruchowym.

Możliwość regulacji położenia środka ciężkości oraz składane zabezpieczenia antywywrotne pozwalają na naukę samodzielnej jazdy na 2 kołach, będącej wstępem do dalszych elementów aktywnej jazdy na wózku i samodzielności w codziennych czynnościach.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą
- Koła tylne w zaplocie radialnym, 20" lub 22"
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM
- Kółka antywywrotne
- Dziecięce hamulce boczne
- Kółka przednie 4", plastikowe
- Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona
- Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem, w kolorze czarnym lub czerwonym
- Boczki wyciągane, plastikowe lub z włókna szklanego, proste lub z osłoną koła
- Rączki do pchania z regulacją wysokości
- Dwuramienné widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Karbonowa platforma podnóżka
- Kółka aluminiowe 4" lub 5"
- Tapicerka moro (tkanina parasolowa)
- Podnóżek odchylany jedno - lub dwustronny
- Boczki karbonowe
- Koła Spinergy 22"
- Opony Schwalbe Marathon Plus
- Ciągi stalowe
- Nakładki na ciągi 22"
- Podłokietniki
- Zagłówki
- Peloty boczne
- Obszycie ramy



Dziecięce hamulce boczne z grubszą rączką dla większej wygody



Przezroczysta, plastikowa osłona na szprychy, chroni koła w czasie zabaw



Standardowa, plastikowa platforma podnóżka, pozwalająca na regulację kąta pochylecia



TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **WÓZEK MŁODZIEŻOWY**
- **LEKKA I SZTYWNA RAMA**
- **REGULOWANY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI**

Aktywny wózek dla młodzieży w wieku szkolnym, **do 75 kg**. Posiada wszystkie cechy wózka dla dorosłych, ale jego wymiary są dopasowane do młodszych użytkowników. Regulowany środek ciężkości i składane kółka antywywrotne pozwalają na samodzielną i bezpieczną naukę czy doskonalenie elementów aktywnej jazdy na wózku oraz pokonywania barier architektonicznych.

Kolejny po wózku dziecięcym, doskonale przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania na aktywnym wózku dla dorosłych.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą
- Koła tylne w zaplocie radialnym 22"
- Ciągi aluminiowe
- Opony Schwalbe Right Run szare lub niebieskie
- Przezroczyste osłony na szprychy z logo GTM
- Kółka antywywrotne
- Dziecięce hamulce boczne
- Kółka przednie 4", plastikowe
- Poduszka gąbkowa, poszewka czarna lub czerwona
- Oparcie składane, wyściełane przewiewnym materiałem, w kolorze czarnym lub czerwonym
- Boczek wyciągane, plastikowe lub z włókna szklanego, proste lub z osłoną koła
- Rączki do pchania z regulacją wysokości
- Dwuramienne widelce mocujące kółka przednie
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM
- Pas tydkowy

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Siedzisko sztywne na płycie karbonowej
- Karbonowa platforma podnóżka
- Kółka aluminiowe 4" lub 5", plastikowe 5"
- Tapicerka moro (tkanina parasolowa), skórzana lub z Alcantary, kolorowe szwy
- Hamulce nożycowe
- Boczek składane z oparciem, plastikowe / z włókna szklanego / karbonowe
- Podnóżek odchylany jedno – lub dwustronny
- Koła Spinergy 22"
- Opony Schwalbe Marathon Plus
- Ciągi stalowe
- Nakładki na ciągi 22"
- Rączki do pchania wkręcane
- Podłokietniki
- Zagłówki
- Peloty boczne
- Obszycie ramy



Boczek wyjmowany z blonnikiem, wykonanym z włókna szklanego, chroni przed zabrudzeniem ubrania



Zabezpieczenie antywywrotne, chroni przed nadmiernym wychyleniem i przewróceniem



Rączki do pchania mocowane w pałąku oparcia - z możliwością regulacji wysokości - są doskonałym rozwiązaniem dla rodziców





# HANDBIKE



## GTM BLACKBIRD JUNIOR

- smukła, sztywna rama
- lekka i wytrzymała konstrukcja
- regulacja fotela przód-tył

str. 49



## GTM BLACKBIRD

- bardzo lekka i sztywna konstrukcja
- aerodynamiczny profil
- tworzony indywidualnie wg potrzeb klienta

str. 51



## GTM BLACKBIRD XC

- bardzo lekka i sztywna konstrukcja
- tworzony indywidualnie wg potrzeb klienta
- zwiększony prześwit między ramą a podłożem

str. 53





**TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™**

## GTM Blackbird JUNIOR

- **SMUKŁA, SZTYWNA RAMA**
- **LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
- **REGULACJA FOTEŁA PRZÓD-TYŁ**

**GTM Blackbird JUNIOR** jest poziomym rowerem rehabilitacyjnym o napędzie ręcznym. Służy do aktywnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z urazem rdzenia kręgowego lub z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych.

W celu umożliwienia bezpiecznej jazdy rowerem, **GTM Blackbird JUNIOR** jest wyposażony w dwa hamulce. Jeden z nich znajduje się bezpośrednio w piaście co umożliwia komfortowe hamowanie. Dodatkowy hamulec służy jako hamulec postojowy, który idealnie sprawdza się podczas wsiadania na rower.

**GTM Blackbird JUNIOR** jest ręcznie robiony, każdy szczegół jest starannie wykonany i montowany. Każda oś w rowerze jest zamontowana na łożyskach, nawet ręczki, co powoduje zwiększenie trwałości. Siedzisko jak i podnóżki pozwalają na bardzo dużą regulację, dzięki czemu możliwe jest idealne dopasowanie do użytkownika.


Z myślą o każdej grupie wiekowej, **GTM Blackbird JUNIOR** występuje w trzech wersjach wielkościowych: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Podnóżek aluminiowy z plastikową platformą, z regulacją wysokości i kąta pochylenia
- Regulowany fotel
- Suport regulowany w dwóch płaszczyznach
- Opony Schwalbe Marathon Plus z odblaskowym paskiem
- Hamulce: torpeda w przedniej piaście, v-brake jako awaryjny
- Siedzisko na regulowanych pasach wraz z poduszką
- Oparcie z systemem pasów pozwalających na regulację głębokości
- Kufer
- Oświetlenie i chorągiewki ostrzegawcze
- Koła zębate: przód 36 zębów, tył 23 zęby
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów RAL Classic
- Korby dobierane indywidualnie

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Obszycie poduszki skórzane lub z Alcantary
- Oparcie skórzane lub z Alcantary
- Przednia piaśta: Shimano Nexus, 3, 7 lub 8 biegów

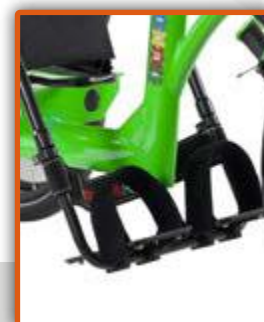

Regulowany podnóżek dla lepszego dopasowania wraz z pasami na stopy



Kufer z zamontowanym oświetleniem, zwiększającym bezpieczeństwo na drodze



Łatwe w demontażu koła oraz błotniki chroniące ubranie przed zachlapaniem





TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

- **BARDZO LEKKA I SZTYWNA KONSTRUKCJA**
- **AERODYNAMICZNY PROFIL**
- **TWORZONY INDYWIDUALNIE WG POTRZEB KLIENTA**

**GTM Blackbird** to wysokiej klasy handbike przeznaczony dla ekstremalnych sportowców. Jego charakterystyczna pozioma konstrukcja, w połączeniu ze stopem aluminium 7020, gwarantuje wyjątkową sztywność i mniejsze straty energii podczas jazdy.

**GTM Blackbird** jest dostępny w dwóch wersjach ramy: Light i Ultra Light. W wersji Ultra Light waga roweru została zmniejszona do minimum, co czyni go bezwzględny dla konkurentów.

Blackbird został wyposażony w system wewnętrznego wzmocnienia ramy, co w połączeniu ze wzmocnioną tuleją prowadzenia widelca sprawia, że rower pozostaje sztywny nawet pod dużym obciążeniem.


W celu zmniejszenia oporów powietrza, stworzono aerodynamiczną konstrukcję roweru. Pozioma pozycja rowerzysty i wewnętrzne umieszczenie/zamocowanie podnóżka zmniejsza profil aerodynamiczny, co przy takim samym nakładzie energii pozwala poruszać się szybciej.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- Manetki Shimano SLX przód / tył, montowane przy rączkach
- Kaseta Shimano SLX 10-rzędowa
- Hamulec bezpieczeństwa Shimano 105
- Sztywny suport
- Koła tylnie i przednie Mavic Open Pro 26"
- Łożyska stalowe
- Aluminiowy podnóżek
- Wspornik pod kolano – zapewnia wygodę i lepszą skrętność roweru
- Fotel na bazie sztywnej, aluminiowej płyty
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Klamko-manetki szosowe, Tiagra / Ultegra
- Kasety 10- lub 11-rzędowe
- Koła przednie Corima, karbonowe
- Łożyska ceramiczne
- Koła tylnie 20" Delfi / Corima
- Hamulec bezpieczeństwa Ultegra / Dura Ace
- Podnóżek tytanowy
- Chorągiewka
- Lusterko
- Błotnik
- Światło ostrzegawcze
- Licznik rowerowy SCIO
- Fotel karbonowy

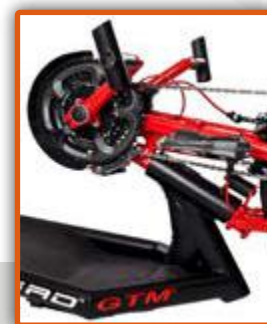

Sztywny suport w opcji z szosowymi klamko - manetkami

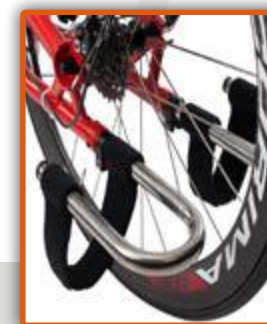

Tytanowy podnóżek z pasem podtrzymującym nogi



Ultra-lekkie karbonowe koła Corima





- **BARDZO LEKKA I SZTYWNA KONSTRUKCJA**
- **TWORZONY INDYWIDUALNIE WG POTRZEB KLIENTA**
- **ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT MIĘDZY RAMĄ A PODŁOŻEM**

**GTM Blackbird XC** jest terenową wersją sportowego roweru Blackbird. Rama XC zbudowana jest w tej samej technologii co jej odpowiednik szosowy, co zapewnia lekkość, sztywność i wytrzymałość. Charakteryzuje się większym niż w rowerze szosowym prześwitem, dzięki czemu możliwa jest ostra jazda poza utwardzonymi ścieżkami.

Ze względu na urozmaicenie terenu, do którego dedykowany jest **Blackbird XC**, pozycja użytkownika jest bliższa siedzącej. Poprawia to widzenie terenu i pozwala szybciej reagować na zbliżające się przeszkody.

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


- Manetki Shimano SLX przód / tył, montowane przy rączkach
- Kaseta Shimano SLX 10-rzędowa
- Hamulec bezpieczeństwa Shimano 105
- Sztywny lub regulowany suport
- Koła przednie Mavic XM317 26"
- Koła tylne Dartmoor Fortress 20"
- Opony terenowe
- Hamulce tarczowe przód / tył
- Łożyska stalowe
- Aluminiowy podnóżek
- Wspornik pod kolano – zapewnia wygodę i lepszą skrętność roweru
- Fotel na bazie sztywnej, aluminiowej płyty
- Proszkowe malowanie ramy z palety kolorów GTM

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Klamko-manetki szosowe, Tiagra / Ultegra
- Kasety 10- lub 11-rzędowe
- Podnóżek tytanowy
- Chorągiewka
- Lusterko
- Błotnik
- Światło ostrzegawcze
- Licznik rowerowy SCIO



TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI™

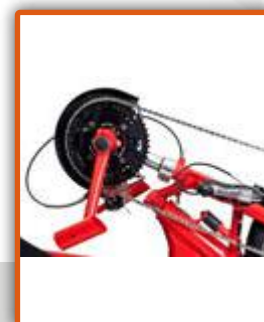

Regulowany suport – pozwala na ustawienie odległości od ciała i dostosowanie do długości ramion



Koła terenowe z szerokimi oponami, gwarantującymi dobrą przyczepność na naturalnym podłożu



Tarczowe hamulce zapewniają doskonałe hamowanie w ciężkich warunkach




# AKCESORIA

## KOŁA PRZEDNIE



## KOŁA TYLNE

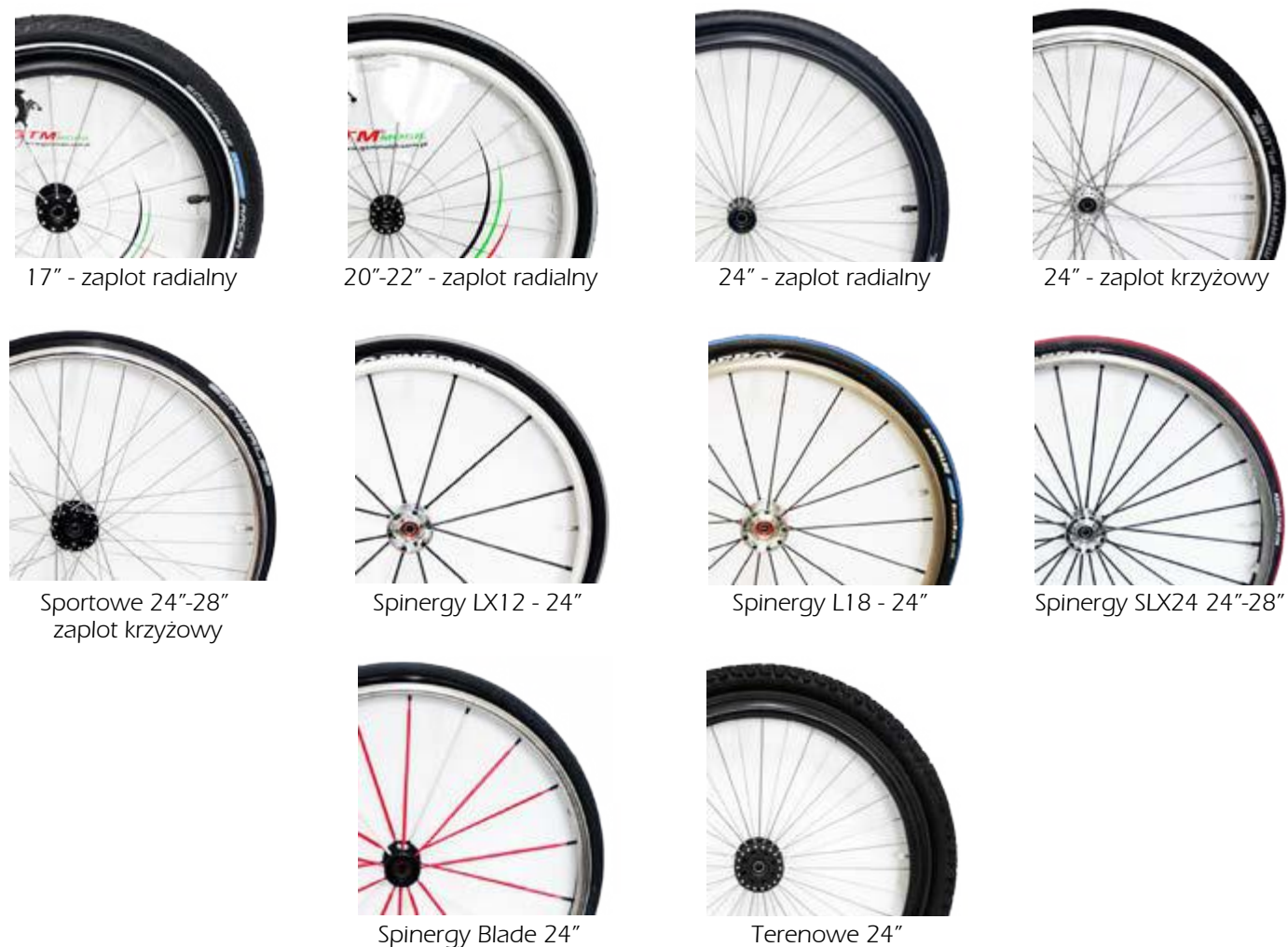

## OPONY



## CIĄGI



## HAMULCE





RĄCZKI DO PCHANIA



**Pałak Smyk** - przeznaczony dla rodziców, posiada regulację wysokości, pozwala na wygodne prowadzenie wózka lub pomoc w jego napędzaniu



**Rączki integralne** - wspawane w oparcie, ich długość dobierana jest indywidualnie do potrzeb użytkownika



**Rączki w pałaku oparcia** - dostępne w 3 długościach, posiadają płynną regulację wysokości oraz są szybko-demontowalne



**Rączki w rurkach oparcia** - dostępne w 2 długościach, posiadają płynną regulację wysokości, z możliwością złożenia na czas transportu



**Rączki wkręcane** - wygodne w użyciu, szybko-demontowalne



**Rączki składane, plastikowe**  
Wygodne w użyciu, lekkie, z możliwością złożenia na czas transportu

KIESZONKI TYŁ




Suwak




Rzep


BOCZKI

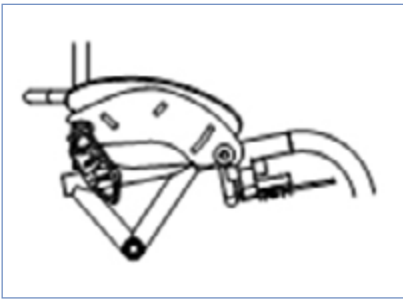


Wyciągane

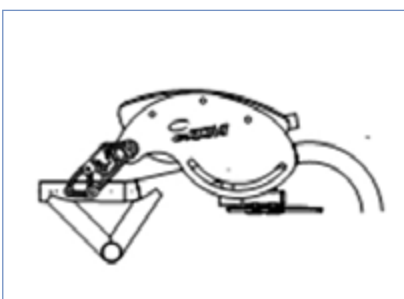


Składane z oparciem

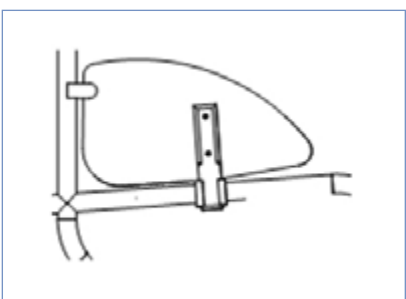


Wysuwane

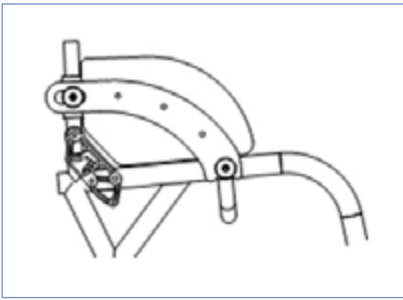


Składane na oparcie

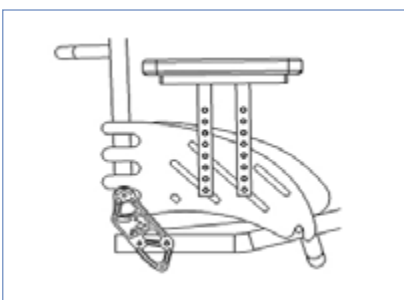


Podłokietniki, wyciągane

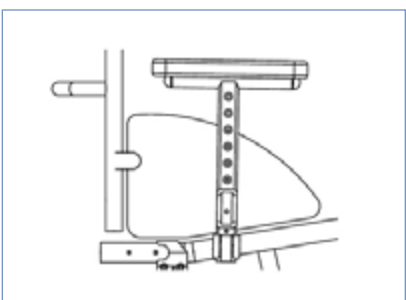


Podłokietniki, wysuwane

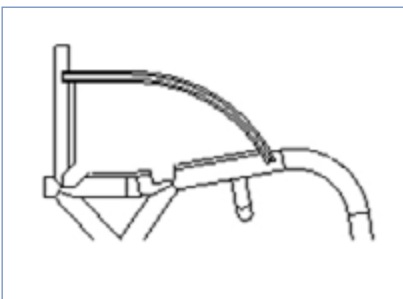

Aluminiowe, wspawane

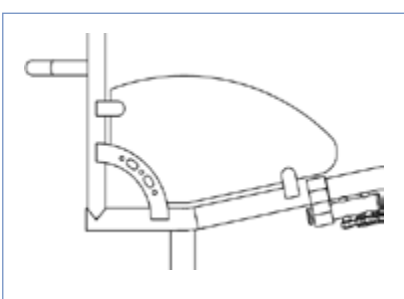

Szttywne, przykręcone do ramy

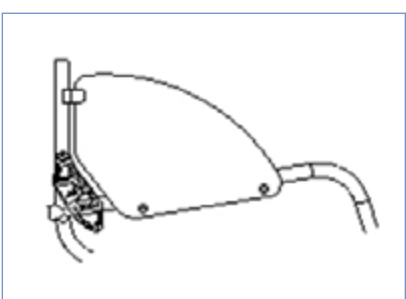

Składane na siedzisko

FREEWHEEL



**FREEWHEEL** to jest to, czego potrzebujesz, aby łatwo poruszać się po trawie, śniegu, szlakach turystycznych i cieszyć się bezpieczną jazdą w dół wyboistymi ścieżkami, chodnikami i krawężnikami.

Nie musisz już siedzieć z boku, zawsze prosić się pomoc, lub przegapić zabawy. Po złączeniu freewheel'a z twoim wózkiem, obracasz jego kółko o 180 stopni, a kółka przednie w twoim wózku unoszą się do góry. Od tej pory wózek porusza się na kołach tylnych oraz freewheel'u, a przednie kółka wózka nie mają kontaktu z podłożem.





Masa własna kompletnego freewheel'a to tylko 2,34kg. Gdy nie jest używany, po prostu zapinamy go do pałaka oparcia wózka, przy pomocy tej samej klamry, która łączy go z podnóżkiem.

Doskonały w podróży, ze względu na swoje kompaktowe wymiary.



# KOLORY

## KOLORY RAMY Z PALETY GTM

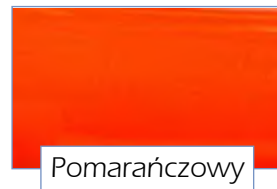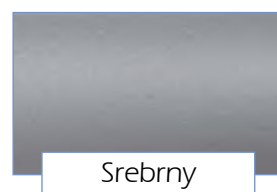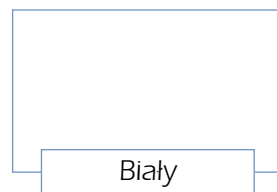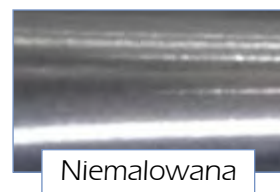

## KOLORY DLA ELEMENTÓW ANODOWANYCH





GTM-MOBIL M-T T. Walisiewicz Sp. Komandytowa • ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa • [www.gtm Mobil.com.pl](http://www.gtm Mobil.com.pl)  
[gtmmobil@gtmmobil.com.pl](mailto:gtmmobil@gtmmobil.com.pl) • [serwis@gtmmobil.com.pl](mailto:serwis@gtmmobil.com.pl) • tel.: + 48 22 213 14 11

Projekt i wykonanie: RTM Studio Interaktywne