



KRYPTON

NIEPOWTARZALNY QUICKIE

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

Doskonale wiemy, że nowe modele wymagają specjalnych rozwiązań. Właśnie dlatego postawiliśmy sobie za cel opracowanie najlepszego wózka z serii Quickie w historii, który będzie wizytówką naszej firmy i który będzie pokazywał nasze nieustanne dążenie do doskonałości. Łącząc najnowsze osiągnięcia inżynierii, stylowy design i doskonałej jakości materiały, stworzyliśmy najlepszy z dotychczasowych modeli serii Quickie – model Krypton.

W naszej firmie nie ma miejsca na kompromisy. Chcąc uzyskać najwyższy poziom funkcjonalności, mogliśmy użyć tylko jednego materiału – popularnych w inżynierii lotniczej włókien węglowych. Dzięki temu udało nam się osiągnąć wyjątkową wytrzymałość i doskonałą zwrotność w pełni regulowanego wózka.





LEKKI.
STYLLOWY.
FUNKCJONALNY.

PIONIERSKA RAMA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Konstrukcja modelu Krypton opiera się na najbardziej zaawansowanej technologii włókna węglowego, pozwalającej osiągnąć zdumiewający stosunek wytrzymałości do wagi.

Wynikiem naszej pracy jest wyjątkowo zwrotny wózek, który cechuje się niewielką wagą, a jednocześnie doskonałą wytrzymałością.

Wystarczy w nim usiąść, aby poczyć różnicę...!

* Konfiguracja dla podanej wagi: SS: 36 cm, GS: 40 cm, z wąską osłoną boczną z włókna węglowego oraz niezwykle lekką tapicerką, lekkim, kompaktowym hamulcem oraz oparcie z włókna węglowego, bez rączek do prowadzenia.



6,2 kg

KRYPTON R

Najlżejszy, w pełni regulowany wózek ze sztywną ramą, którego minimalna waga wynosi 6,2 kg*

8,3 kg

KRYPTON F

Najlżejszy składany wózek na świecie, którego minimalna waga wynosi 8,3 kg*





**ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA**

REWOLUCYJNA INŻYNIERIA

Istnieją różne sposoby konstruowania ram z włókien węglowych. Jesteśmy pierwszą firmą produkującą wózki, która wykorzystuje opatentowaną, innowacyjną technologię splotu włókien węglowych.

Precyzyjny, a jednocześnie niezawodny, w pełni zautomatyzowany proces splotu pozwala stworzyć doskonałą ramę, która w razie potrzeby będzie cechowała się dużą wytrzymałością, a jednocześnie będzie bardzo lekka.



1



2



3

1 Zrobotyzowane splatanie włókien węglowych, z których powstanie rama modelu Krypton

2 Audyt jakości podczas procesu produkcji

3 Proces wykańczania ramy z włókien węglowych



WYTRZYMAŁY

WÓZEK, KTÓRY WYTRZYMA PRÓBĘ CZASU

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dowieść niezawodności modelu Krypton. Każda jego część została zatwierdzona dopiero wówczas, gdy inżynierowie testów byli w 100% zadowoleni z jej jakości.

Model ten był również wystawiany na działanie bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur (od -20°C do 70°C).

Wszelkie próby trwałości dowiodły, że jest to wózek, który wytrzyma każdą próbę czasu.

I NIEZAWODNY



DWA WÓZKI – JEDEN DUCH



KRYPTON R

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ I
DOSKONAŁA ZWROTNOŚĆ


Zaletą tego modelu jest nie tylko to, że wykorzystano w nim znakomite materiały i nadano mu powabny kształt, ale również jego sportowy charakter i doskonała wytrzymałość. O wyjątkowości modelu Krypton świadczą: w pełni regulowany środek ciężkości, precyzyjne dopasowywanie przedniej i tylnej wysokości siedziska oraz regulacja kąta ustawienia oparcia.

KRYPTON F

NAJLŹEJSZY ZE WSZYSTKICH
SKŁADANYCH WÓZKÓW

Nie ważne, z której strony na niego spojrzymy, model Krypton F jawi się jako kwintesencja piękna. Najważniejszym elementem wózka jest doskonale zaprojektowany krzyżak, który idealnie mieści się pod siedziskiem tak, że jest prawie niewidoczny, co podkreśla minimalizm konstrukcji tego wózka opartego na otwartej ramie.



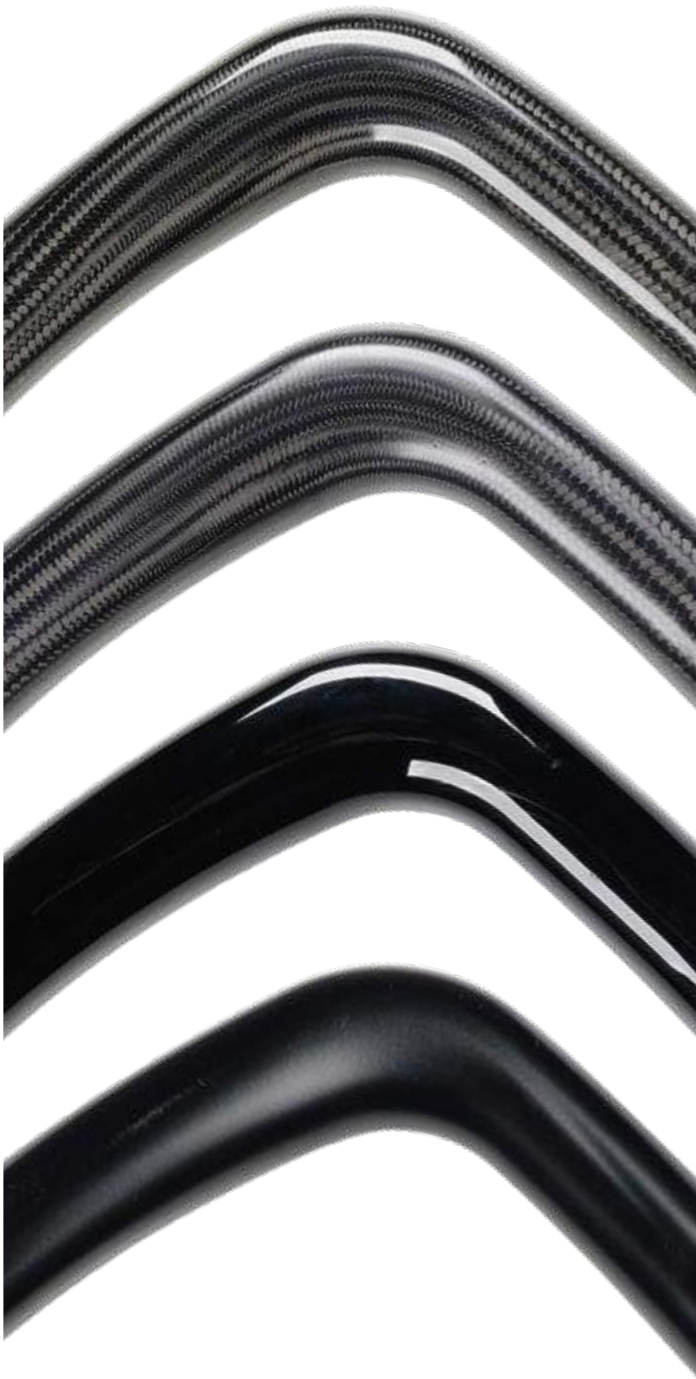

DBAŁOŚĆ O DETALE

Wybór modelu Krypton to zaledwie początek procesu personalizacji wózka, którego opcje pozwalają opracować swój własny styl i cieszyć się nim.

OPCJE WYKOŃCZENIA RAMY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Transparentna powłoka błyszcząca – luksusowa transparentna powłoka o wysokim połysku

Transparentna powłoka matowa – szlachetny, powściągliwy styl

Po prostu czarna – powłoka w kolorze czarnym, błyszcząca lub matowa


Naturalna powłoka z włókna węglowego – bez powłoki; wersja minimalistyczna; pozwala zaoszczędzić 100g wagi. Wyglądem przypomina bezbarwną powłokę matową.





KÓŁKA PRZEDNIE DWIE POZYCJE

Wąski rozstaw ustawionych do tyłu kółek idealnie nadaje się do ciasnych przestrzeni. Szeroki rozstaw kółek ustawionych do przodu zapewnia natomiast lepszą stabilność przedniej części wózka.

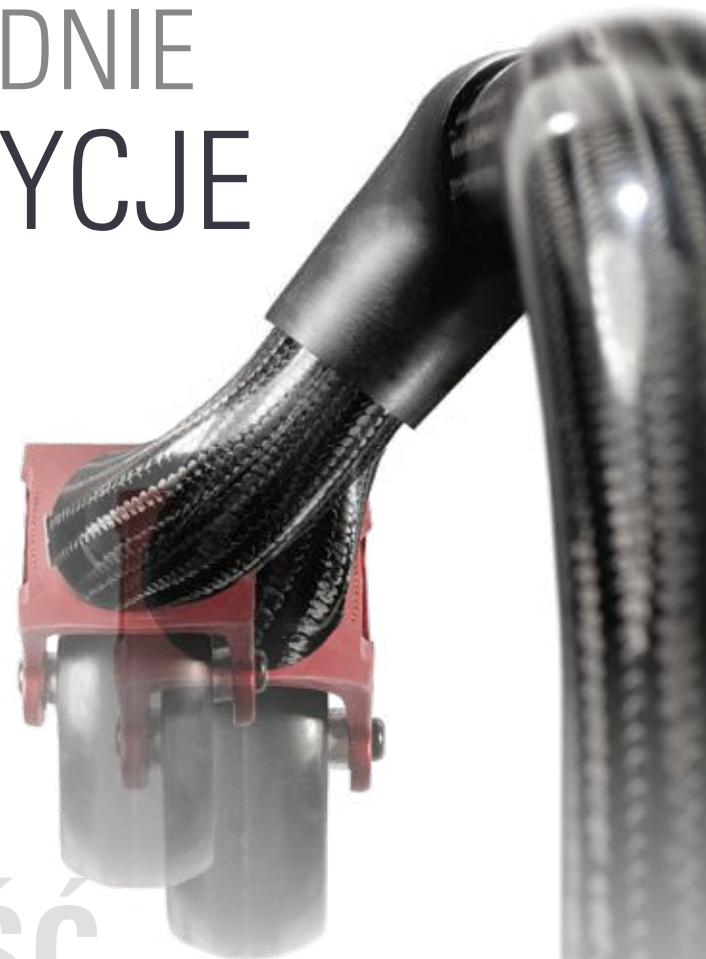

AKCENTY KOLORYSTYCZNE

Istnieje możliwość wyboru jednego z pięciu stylów widelców, kół, tapicerki i naklejek.

WSZECHSTRONNOŚĆ.

STYL.

QUICKIE

RODZINA NAJLŹEJSZYCH REGULOWANYCH WÓZKÓW

Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej niezależności oraz innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań, które pomogą naszym użytkownikom prowadzić wymarzony styl życia.



XENON² od 8,8 kg



NITRUM od 7,2 kg



KRYP

NA



RAMA SKŁADANA

TON F od 8,3 kg



KRYPTON R

od 6,2 kg

RAMA SZTYWNA

DANE TECHNICZNE

	Krypton R – wózek z ramą sztywną	Krypton F – wózek w ramą składaną
Maks. waga użytkownika	125 kg	110 kg
Wersja rama	Sztywna rama	Rama składana
Rama	Z włókna węglowego	Z włókna węglowego
Szerokość siedziska	320 - 460 mm	320 - 460 mm
Głębokość siedziska	340 - 480 mm	340 - 480 mm
Wysokość siedziska z przodu	430 - 550 mm	430 - 550 mm
Wysokość siedziska z tyłu	380 - 500 mm	370 - 500 mm
Wysokość oparcia	250 - 450 mm	250 - 475 mm
Kąt pochylenia oparcia	59° - 105°	75° - 103°
Kąt pochylenia kół	0°/3°	0°/2°/4°
Całkowita szerokość//długość//	760 mm // 930 mm // 950 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Maks. szerokość cofania	700 mm	700 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	7°	7°
Kółka przednie // Koła tylne	3"/4"/5"/6" // 24"/25"	3"/4"/5"/6" // 24"/25"
Waga wózka	od 6,2 kg	od 8,3 kg
Waga po demontażu	od 3,65 kg	od 5,8 kg
Waga najcięższej części	Koło tylne 1,1 kg	Koło tylne 1,1 kg
Części demontowalne	Koła tylne (demontowane na czas transportu)	Koła tylne, uchwyty & osłony boczne (demontowane na czas transportu)
Wykończenie ramy	Powłoki: naturalna, transparentna błyszcząca i matowa, czarna błyszcząca i matowa	Powłoki: naturalna, transparentna błyszcząca i matowa, czarna błyszcząca i matowa
Crash test	Niedopuszczony do transportu w pojeździe	
Transport bez Użytkownika	Dozwolony do transportu (w samochodzie i samolocie)	
Przeznaczenie i środowisko	Dla Użytkowników z ograniczoną mobilnością (dzieci & dorośli); do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.	



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl

Producent:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4, Germany

D-69254 Malsch / Heidelberg

Tel. +49 (0)7253 980-0

W celu uzyskania informacji na temat pełnej specyfikacji produktu, opcji dodatkowych i akcesoriów, prosimy zapoznać się z formularzem zamówienia. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z firmą Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą zapoznać się z niniejszą broszurą w formacie PDF. Broszura jest dostępna na stronie www.Sunrise-Medical.pl

