



Küschall®
CHAMPION

ORIGINALNY

—
MISTRZ



Küschall.eu



*SKŁADANY I
SUPER
KOMPAKTOWY*

CHAMPION

Poznaj Küschall Champion, nasz oryginalny i pierwszy składany wózek inwalidzki z otwartą ramą. Precyzyjnie zaprojektowany z solidniejszym, hybrydowym mechanizmem składania, zapewniającym jeszcze lepszy napęd po załączeniu. Łatwy w składaniu i rozkładaniu jednym płynnym ruchem, co ułatwia podróżowanie i przechowywanie.

*SOLIDNA
KONSTRUKCJA*





ORYGINALNA KONSTRUKCJA

Zaprojektowany z pasją i miłością, Küschall Champion nie ma sobie równych. Lider innowacji i ciągły rozwój, aby dać Ci wózek, który przetrwał próbę czasu i zapewnia niezawodną jazdę za każdym razem.



SUPER KOMPAKTOWY

Łatwy w transporcie i przechowywaniu dzięki mechanizmowi składania jednym ruchem, składanemu oparciu i szybko wypinanym tylnym kołom. Wybierz wersję Swiss Knife „SK” ze składaną ramą przednią, aby stworzyć super kompaktowego Championa.



Küschall Champion SK





MISTRZ INNOWACJI

Skoncentrowany na funkcjonalności i wydajności, Küschall Champion to idealne połączenie. Zaawansowana technologia hydroformowania i innowacyjny mechanizm składania zapewniają sztywniejszą ramę, co przekłada się na energooszczędną jazdę.



PRZEDSTAWIAMY CHAMPION CARBON

Lekki, solidny i stylowy Champion z włókna węglowego zwiększa mobilność bez kompromisów w zakresie osiągnięć. Zwiększona wytrzymałość poprawia responsywność, a wyjątkowo lekka rama ułatwia podnoszenie, składanie i transport. Poczuj się pewnie i poczuj się pewnie dzięki pięknu włókna węglowego.



Zobacz wideo

Wybitny mistrz pod
względem wydajności i
estetyki.

C



-430g*

*Lżejszy niż standardowa rama
wykonana z aluminium



Küschall®
CHAMPION



BUDOWA CHAMPION



CIĄGI CARBOLIFE

Innowacyjny profil obręczy pomaga zwiększyć kontrolę. Chwyt bez wysiłku zmniejsza naprężenia podczas wkręcania.

SYSTEM SKŁADANIA

Składa się bez wysiłku jednym ruchem z wbudowaną regulacją środka ciężkości dla dopasowania do indywidualnych potrzeb.

CHAMPION SL

Spójrz na superlekką i responsywną adaptację Championa:
ZOBACZ WIDEO



HAMULCE LIGHT ACTIVE

Minimalistyczny design, wykonany z precyzją nawet w najdrobniejszych szczegółach.

HYDROFORMOWANA RAMA

Wzmacnia ramę, zapewniając większą sztywność i lepszą efektywność energetyczną podczas napędzania.

Küschall® |

OPCJA LEKKIEJ, WYTRZYMAŁEJ RAMY CARBONOWEJ

Poprawia wydajność napędu i zapewnia pewny estetyczny wygląd.

DOSTOSUJ SWOJEGO *CHAMPIONA*

1. KOLORY RAMY

Standardowe kolory ramy



Pure White

Anthracite
Grey

Space Black



Carmine Red

Azure Blue

Dodatkowe kolory ramy*



Flashy Yellow

Black Glossy

Silver Grey

Pearl Night
Blue



Ruby Red

Dynamite
Orange

Forest Green

*Może wystąpić dłuższy czas dostawy.

2. STYL TAGA




3. KOLOR BOLDA



Red



Black

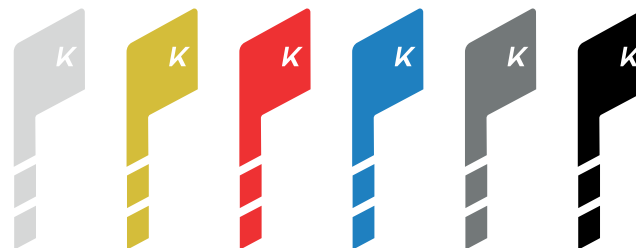

Light Grey

Gold

Red

Blue

Dark Grey

Black

4. PERSONALIZACJA

UNIQUE

Stwórz swój nowy wózek inwalidzki Küschall z UNIQUE. Ta dedykowana usługa stworzy Twój spersonalizowany wózek, zaprojektowany tak, aby pasował do Ciebie i Twojego stylu życia.

unique
Designed by you. Built by us.



Na zdjęciu: Koło
Spinergy z
UNIKALNYMI
funkcjami. Zeskanuj
kod QR na tej stronie,
aby uzyskać więcej
informacji.





DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

360 - 480 mm
regulacja co 20 mm



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

340 - 480 mm
regulacja co 20 mm



WYSOKOŚĆ PODNOŻKA

320 - 500 mm
bezystopniowa regulacja



WYSOKOŚĆ OPARCIA

300 - 465 mm
regulacja co 15 mm



KĄT OPARCIA

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

Przód: 450 - 540 mm
Tył: 390 - 490 mm



KĄT RAMY

75° / 90°
Prosta lub przywiedziona



ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

9 pozycji



POCHYLENIE KÓŁ

0° / 1° / 3°



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

75° 930 mm
90° 830 mm



SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA

SW + 160 - 240 mm



SZEROKOŚĆ PO ZŁOŻENIU

280 - 340 mm



WAGA CAŁKOWITA

8.8 kg



WAGA TRANSPORTOWA

6.3 kg



MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

120 kg



Wszystkie podane wymiary i wagi odnoszą się do szerokości i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i wymiary mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

www.kuschall.eu
www.partner-med.pl
+48 32 733 79 99

Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Raszyńska 12/1, 05-500 Piaseczno
Solskiego 15/16, 85-125 Bydgoszcz
Zamenhofa 9/6, 98-300 Wieluń

