

Küschall®
K-SERIES



NIESTANDARDOWE
POZYCJONOWANIE
DLA OPTYMALNEJ
JAZDY



Küschall.eu

*DOSTOSOWANIE
NIESTANDARDOWE*



*SZTYWNA I
ENERGOOSZCZĘDNA
RAMA*



K-SERIES

K-Series Küschall to kultowa konstrukcja modułowa.

Wiodący prekursor w dziedzinie aktywnych wózków inwalidzkich. Pomysłowy, wszechstronny moduł siedziska ma konfigurację zapewniającą najlepsze właściwości jezdne, gdziekolwiek się udasz.





NA WIGUJ PO SWOIM ŚWIECIE


Dzięki najnowocześniejszej technologii i eleganckiej estetyce, Küschall K-Series pozostaje wierny minimalistycznemu wzornictwu Küschall. Ten wózek zapewnia elastyczność i swobodę, pozwalając Ci bez wysiłku poruszać się po twoim świecie.





SIEDZISKO MODUŁOWE Z REULACJĄ

Sercem K-Series jest modułowy system siedziska. Dzięki pięciu różnym pozycjom środka ciężkości i wielu wysokościami siedziska, istnieją nieograniczone możliwości pozycjonowania – niezależnie regulowane od ramy. To niezwykle pomysłowa konstrukcja, która z łatwością dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

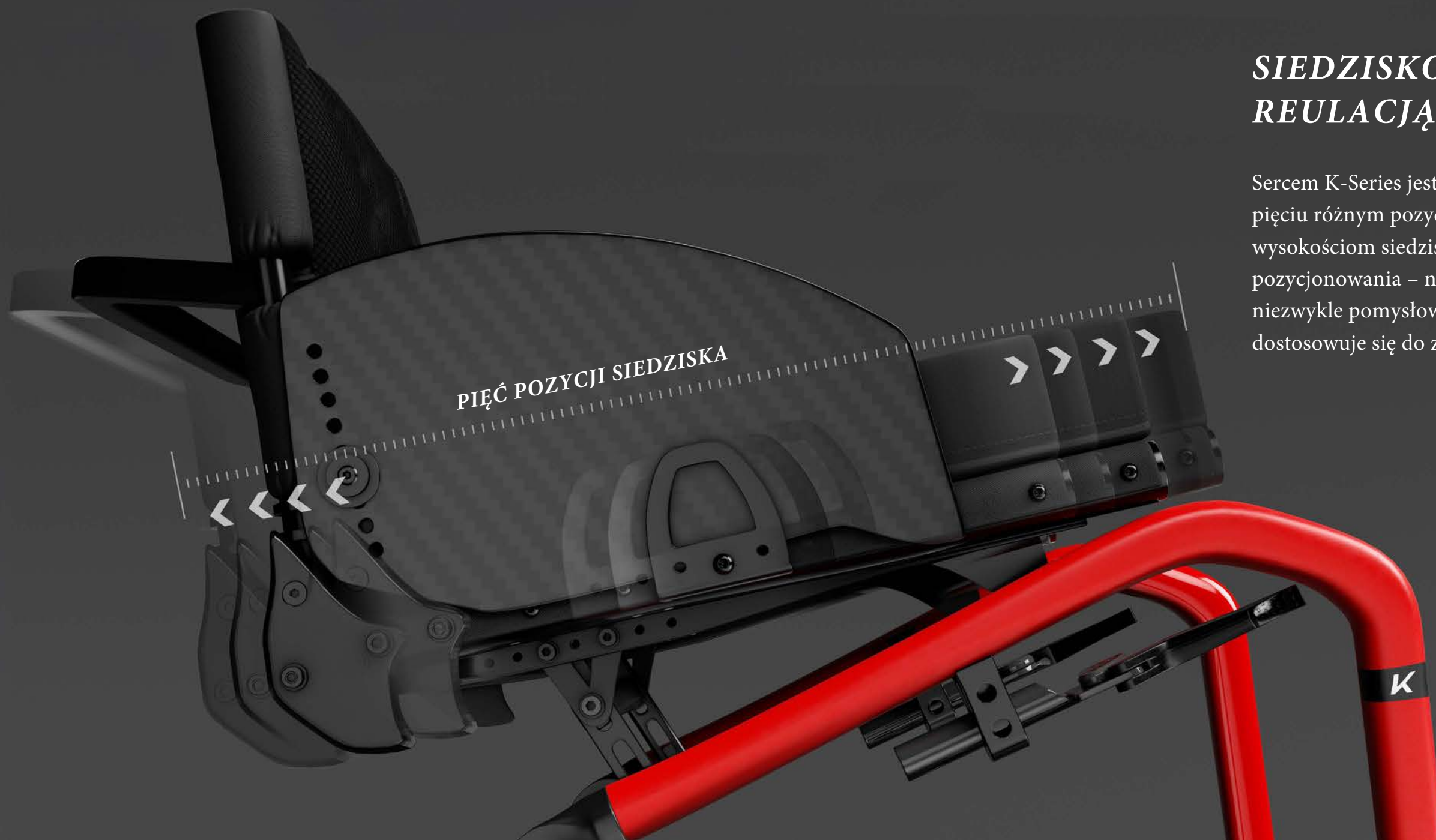



PŁYNNNA I SPÓJNA JAZDA

K-Series charakteryzuje się idealną geometrią do podłoża. Niezależny moduł siedziska izoluje ramę, zapewniając stałą pozycję kół, co przekłada się na płynną i stabilną jazdę.



PRZEDSTAWIAMY K-SERIES CARBON


Codzienna wydajność na wyższym poziomie. K-Series z włókna węglowego zapewnia większą wydajność w i tak już kultowym designiem. Dzięki zwiększonej wytrzymałości i mniejszym stratom energii wózek pracuje wydajniej, zapewniając płynniejszą i bardziej spójną jazdę. Ta sama elastyczność, której ufasz, teraz z bardziej wyrafinowanym i pewnym wykończeniem z włókna węglowego.



Zobacz film

Ciesz się tym samym minimalistycznym i modułowym designem wzmocnionym karbonem.

C

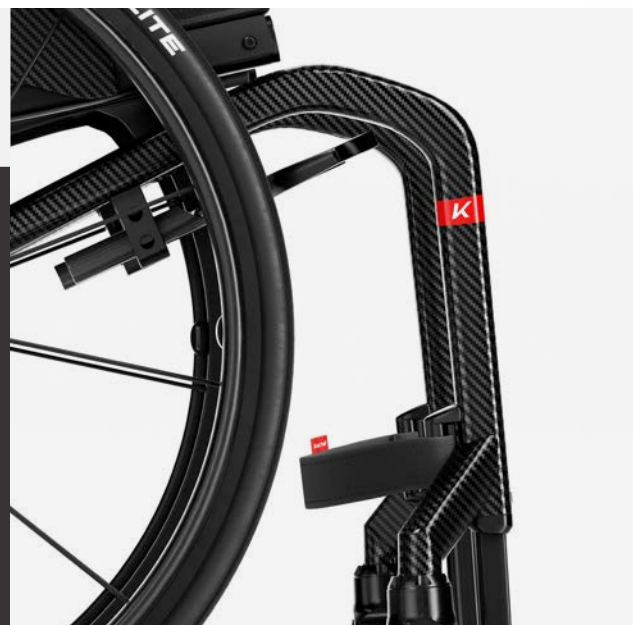

- 290g*

* Lżejszy w porównaniu ze standardową aluminiową ramą K-Series



Küschall®
K-SERIES





BUDOWA K-SERIES

PAŁĄK OPARCIA

Ergonomiczny uchwyt, kluczowy aspekt w fazach podnoszenia i załadunku wózka. Dostępne opcje niskiego pałaku, idealne dla oparcia Matrx®.

OPARCIE

Składane oparcie z sześcioma możliwymi regulacjami kąta nachylenia, umożliwiającymi dopasowanie do różnych potrzeb.

SIEDZISKO MODUŁOWE

Serce K-Series. Moduł siedziska oferuje pięć różnych pozycji środka ciężkości, dzięki czemu można dopasować stopień aktywności jazdy do użytkownika.

Küschall® |

LEKKA RAMA KARBONOWA

Poprawia właściwości jezdne i nadaje wózkowi pewny wygląd.



HYDROFORMOWANA RAMA W STREFIE ZGIĘCIA

Ergonomiczny uchwyt, idealny do zmiany położenia i przesiadania, kąt ramy dostępny pod kątem 90° i 75°.

HAMULCE LIGHT ACTIVE

Aluminiowy hamulec o minimalistycznym designie zapewnia niespotykaną dotąd lekkość. Precyzja nawet w najdrobniejszych szczegółach.

WIDELCE

Profil aluminiowy przyspawany do przedniej rury ramy. Spójna konstrukcja całego wózka.

ZWĘŻANA RAMA

Zwężana rama pozwala na idealne dopasowanie wózka do kształtu ciała użytkownika, co przekłada się na elegancki wygląd.

PODNÓŻEK

Zaprojektowany z płaską powierzchnią dla większego komfortu podczas jazdy i idealnego ułożenia.



DOSTOSUJ SWOJEGO *K-SERIES*

1. KOLORY RAMY

Standardowe kolory ramy



Pure White

Anthracite
Grey

Space Black



Carmine Red

Azure Blue

Dodatkowe kolory ramy*



Flashy Yellow

Black Glossy

Silver Grey

Pearl Night
Blue



Ruby Red

Dynamite
Orange

Forest Green

*Może wystąpić dłuższy czas dostawy.

2. STYL TAGA




3. KOLOR BOLDA



Red

Black

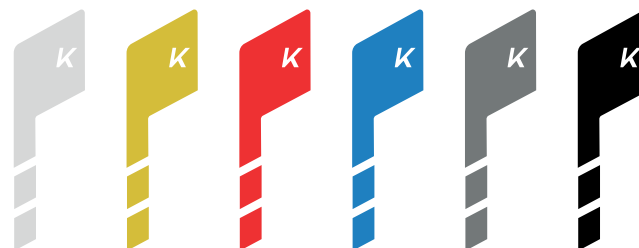

Light Grey

Gold

Red

Blue

Dark Grey

Black

4. PERSONALIZACJA UNIQUE

Stwórz swój nowy wózek inwalidzki Küschall z UNIQUE. Ta dedykowana usługa stworzy Twój spersonalizowany wózek, zaprojektowany tak, aby pasował do Ciebie i Twojego stylu życia.

unique
Designed by you. Built by us.





DANE TECHNICZNE

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA

320 – 500 mm
regulacja co 20 mm



GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

350 – 525 mm
regulacja co 25 mm



WYSOKOŚĆ PODNOŻKA

290 – 480 mm
regulacja co 10mm



WYSOKOŚĆ OPARCIA

270 – 480 mm
regulacja co 15mm



KĄT OPARCIA

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



WYSOKOŚĆ SIEDZISKA

Przód: 450 – 520 mm
Tył: 390 – 490 mm co
10mm



KĄT RAMY

75° / 90°
Rama prosta lub przywiedziona



SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA

SW + 170 mm



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

75° 830 - 1055 mm
90° 760 - 985 mm



ŚRODEK CIĘŻKOŚCI

80mm / 95mm / 110mm /
125mm / 140mm



POCHYLENIE KÓŁ

0° / 3° / 6°



WAGA CAŁKOWITA

7.5 kg



WAGA RAMY

4.8 kg



MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

130 kg



TEST ZDERZENIOWY

Zatwierdzony – spełnia
wymagania
ISO 7176-19



Wszystkie podane wymiary i wagi odnoszą się do szerokości i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i wymiary mogą ulec zmianie w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

www.kuschall.eu
www.partner-med.pl
+48 32 733 79 99

Chorzowska 30c, 41-910 Bytom
Raszyńska 12/1, 05-500 Piaseczno
Solskiego 15/16, 85-125 Bydgoszcz
Zamenhofa 9/6, 98-300 Wieluń

