


WITAMY w Küschall 2.0



Gdzie chcemy być?


PREMIUM / ELEGANCE

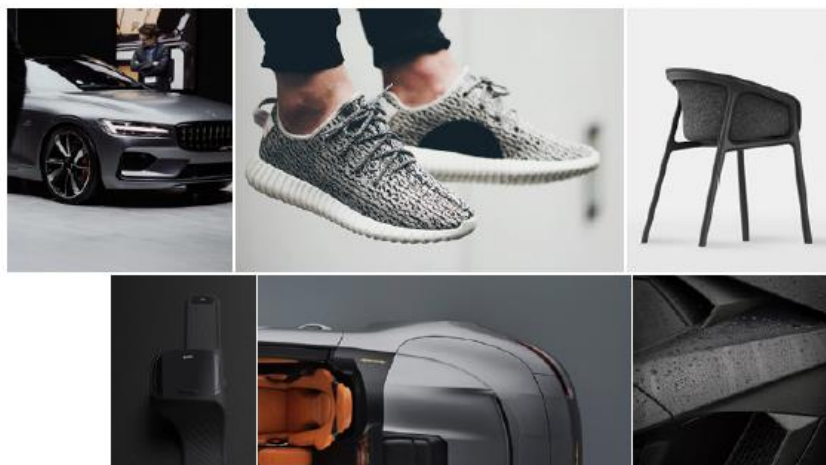

PERFORMANCE / PREMIUM / DYNAMIC / SPORTY



SPORTY / PERFORMANCE / DYNAMIC

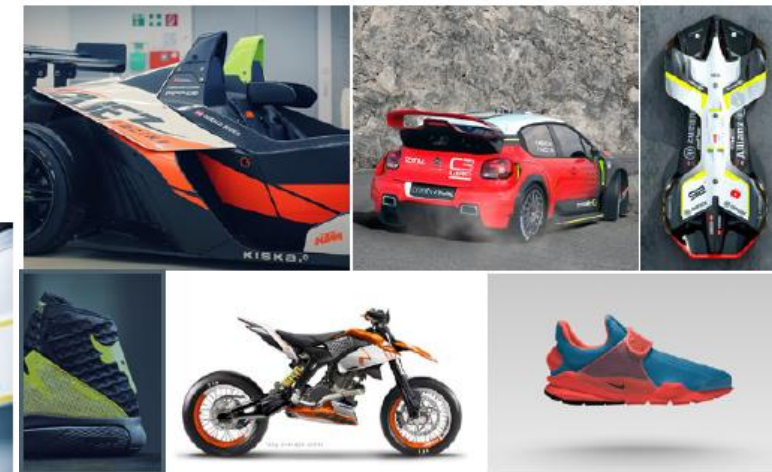

Premium

Küschall

Dynamic / Sporty



| NOWE PORTFOLIO

Nowe Portfolio

Küschall 2.0 wyznacza nowy standard w:

- Stylistyce
- Precyzji i jakości
- Wydajności jazdy
- Personalizacji



Konstrukcja ramy: Hydroformowanie

Główne zalety:

- Lepsza sztywność w celu zoptymalizowania wydajności jazdy
- Nowy ergonomiczny uchwyt na poziomie zgięcia kolana
- Ulepszona jakość ramy
- Redukcja wagi (kompaktowość)



Modne i eleganckie kolory ram z jedwabisto-matowym wykończeniem

- To użytkownik powinien być widoczny na pierwszym planie, gdy ktoś na niego patrzy, a nie wózek
- Nowe kolory ram zostały wybrane właśnie z myślą o powyższym. Mają stylowe jedwabisto-matowe wykończenie (nie błyszczące)
- Etykiety TAG i BOLD wykorzystują wysokiej jakości i klasy naklejki do transferu wody, które są niezwykle trwałe i atrakcyjne wizualnie


RAL 9005
Space black



RAL 7016
Anthracite grey



RAL 9016
Pure white

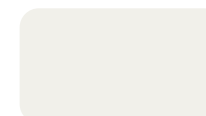

RAL 5009
Azure blue



RAL 3002
Carmine red



Wszystkie wózki 2.0 - nowe części i opcje

- Tylko jeden typ widelców przednich ze zintegrowanymi łożyskami
 - USP: łatwy w utrzymaniu i wymianie
- Nowy, lekki hamulec aktywny wykonany z aluminium
 - USP: trwalszy niż kompozyt od konkurencji i lżejszy od obecnego hamulca aktywnego





Wszystkie wózki 2.0 - nowe części i opcje

- Karbonowe błotniki i boczki
ochraniające odzież przed
zabrudzeniami:
- Nowy design pasujący
do stylistyki 2.0
- Zmniejszają całkowitą szerokość
wózka dzięki cieńszemu podparciu



Wszystkie wózki 2.0 - nowe części i opcje

- Zwiększona kompatybilność z oparciami Invacare Matrix (Elite i MX-2), dodatkowymi napędami Alber oraz dodatkowym przetestowanym w pełni zgodnym z wymogami ISO (w połączeniu z 2.0) pasem Bodypoint Evoflex
- Flo-Tech Lite, Classic i Contour Visco jako oferta poduszek na siedziska
- Nowe ręczki Carbolife Quadro i Gekko jako zamiennik Surge LT
- Nowa ochrona ramy przedniej

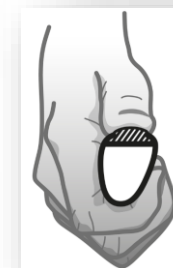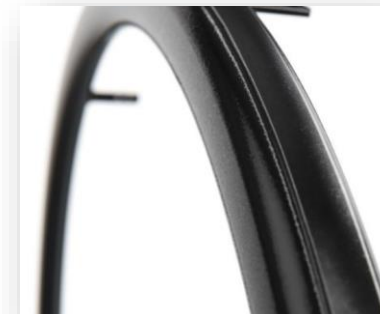

KÜSCHALL CHAMPION




Składany: CHAMPION

- Hydroformowana przednia rama
 - Zoptymalizowana wydajność jazdy dzięki obniżonemu zagięciu ramy (większe usztywnienie) na poziomie zgięcia kolan
 - Ergonomiczny uchwyt do zmiany pozycji i transferu



Składany: CHAMPION

- Opatentowana regulacja kół
 - USP: intuicyjna regulacja, bardzo prosta, lekka
- Widelec
 - Zintegrowane łożyska
 - Przejrzysty design
- Regulacja wysokości (wysokość FSTF)
 - Ze względu na nowy, hydroformowany kształt, regulacje są łatwiejsze

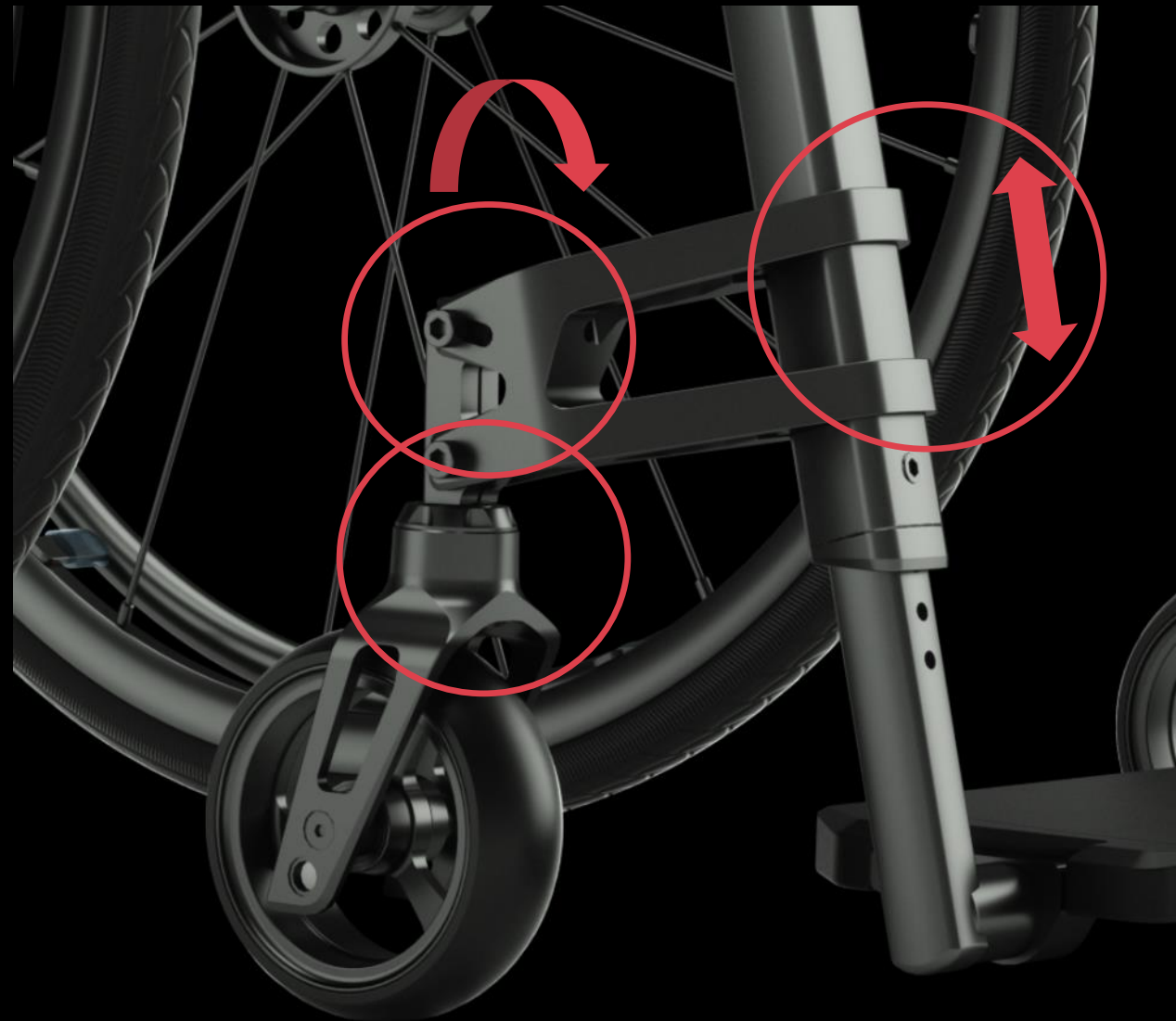

Nowe opcje

Ogólne

- Błotniki karbonowe i boczki ochraniające odzież przed zabrudzeniami
- Nowy, lekki Aktywny Hamulec aluminiowy
- Ciągi Quadro i Gekko
- BodyPoint Evoflex
- Oferta oparć Extended Matrix Backrest & Poduszek

Champion Specific


- Nowy mechanizm blokady z opcją SK
- Przeprojektowany jednoczęściowy, podnoszony, podnózek



Personalizacja CHAMPION


TAG

- K TAG po prawej stronie na ramie
- Logo Küschall pionowo po lewej stronie ramy
- W kolorze czerwonym lub czarnym (K i logo zawsze w tym samym kolorze)

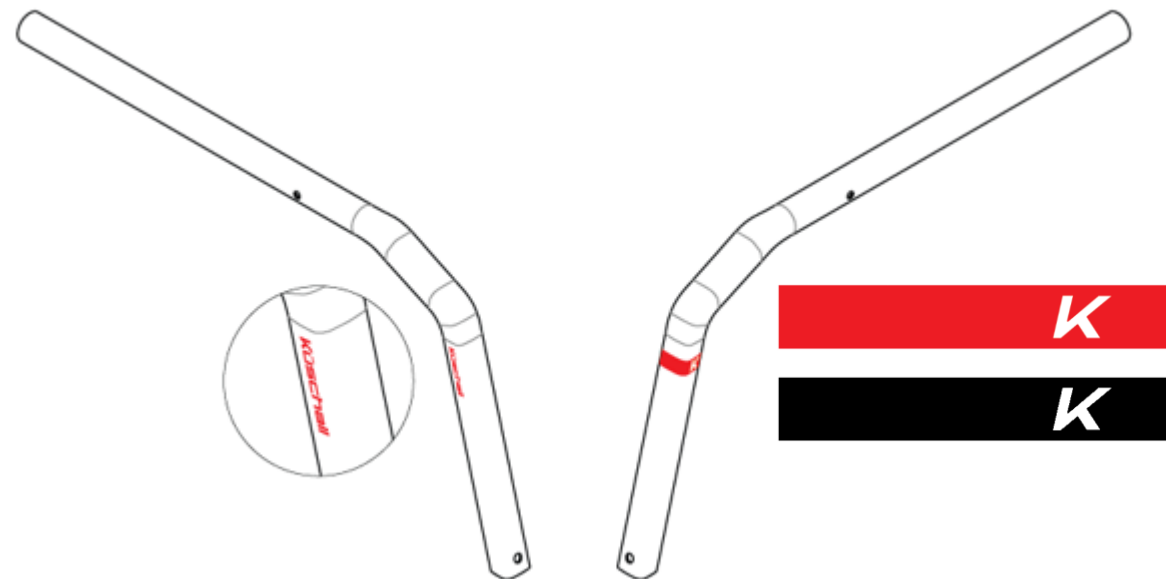

POGRUBIENIE

- Naklejka na wypełnienie przedniej ramy, przycięta do rozmiaru w zależności od długości ramy
- 6 kolorów naklejek
- Drobny wzór druku na naklejce

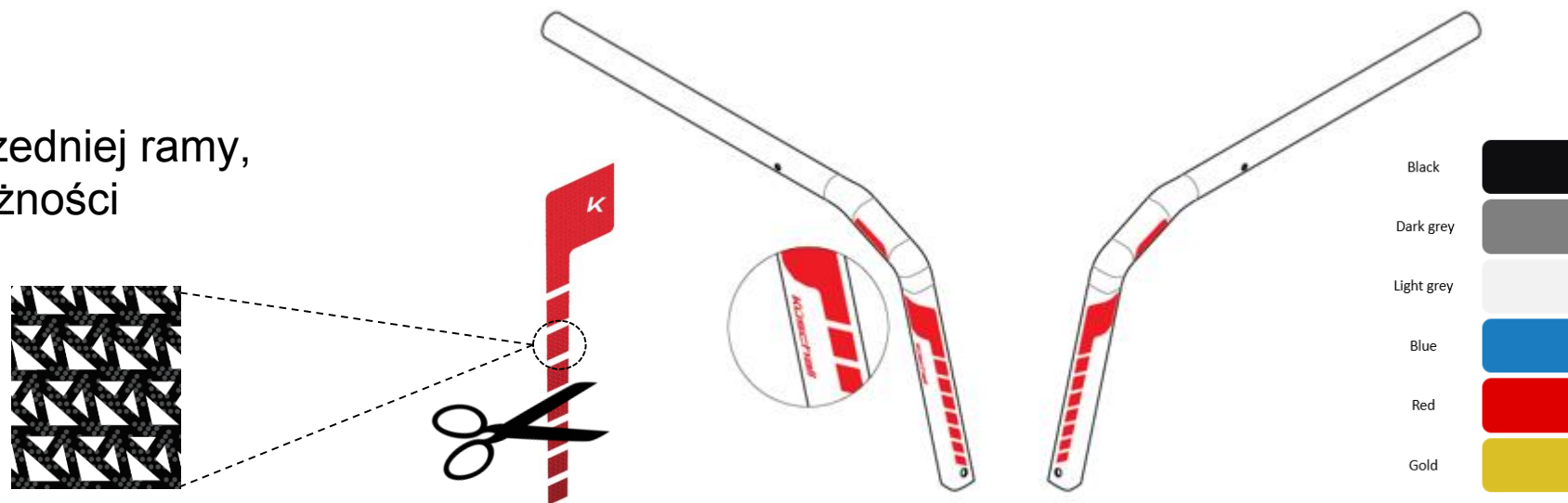

KÜSCHALL COMPACT

(w tym "stary" Ultra-Light)



Nowy COMPACT

- Całkowite przeprojektowanie ramy & rurek podnózka
 - Włącznie ze **stałą przednią ramą** (Ultra-Light) w jednym
 - Nowa gama **podnóżków**
 - Zmniejszenie wagi o **500** gramów przy odchylaniu
 - Nowa **opatentowana regulacja obudowy** kółka
-
- Koncepcja personalizacji
 - Zwiększona kompatybilność z Matrix, BodyPoint Alber



Składany - COMPACT

- Hydroformowana stała przednia rama odchylana (dawniej Ultra Light)
 - USP: Ergonomiczny uchwyt do zmiany pozycji i transferu
- Średnica rur
 - Zmniejszenie z 30 mm do 25 mm, z użyciem innej optymalizacji, co poskutkowało zmniejszeniem masy o 500 gramów



Składany - COMPACT

- Opatentowana regulacja obudowy kółka
- USP: intuicyjna regulacja, bardzo prosta, lekka
- Widelec
- Zintegrowane łożyska
- Przejrzysty design



Nowe opcje

Ogólne

- Błotniki karbonowe i boczki ochraniające odzież przed zabrudzeniami
- Nowy, lekki Hamulec Active aluminiowy
- Ciągi Gekko
- BodyPoint Evoflex
- Rozszerzona oferta oparcia Matrix Backrest & Poduszek

Compact Specific


- Nowe podnóżki pasują do wszystkich SW, nowoczesny design, powierzchnia antypoślizgowa



Nowe opcje

Compact Specific

- Zagłówek, po crash-testach (standardowy REA lub MATRX Elan tbd)
- Podpórka pod kończynę po amputacji ACTION / SPIREA
- Nowe podnóżki REA z regulacją kąta nachylenia, z podparciem pod łydki i regulowanym podnóżkiem

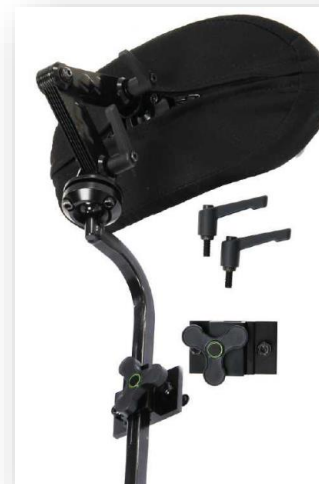




Personalizacja COMPACT

TAG

- K TAG po prawej stronie na ramie/rurce podnóżka
- Logo Küschall pionowo po lewej stronie ramy / poziomo na rurce podnóżka
- W kolorze czerwonym lub czarnym (K i logo zawsze w tym samym kolorze)

POGRUBIENIE

- Naklejka na wypełnienie przedniej ramy, przycięta do rozmiaru w zależności od długości ramy
- 6 kolorów naklejek
- Drobny wzór druku na naklejce

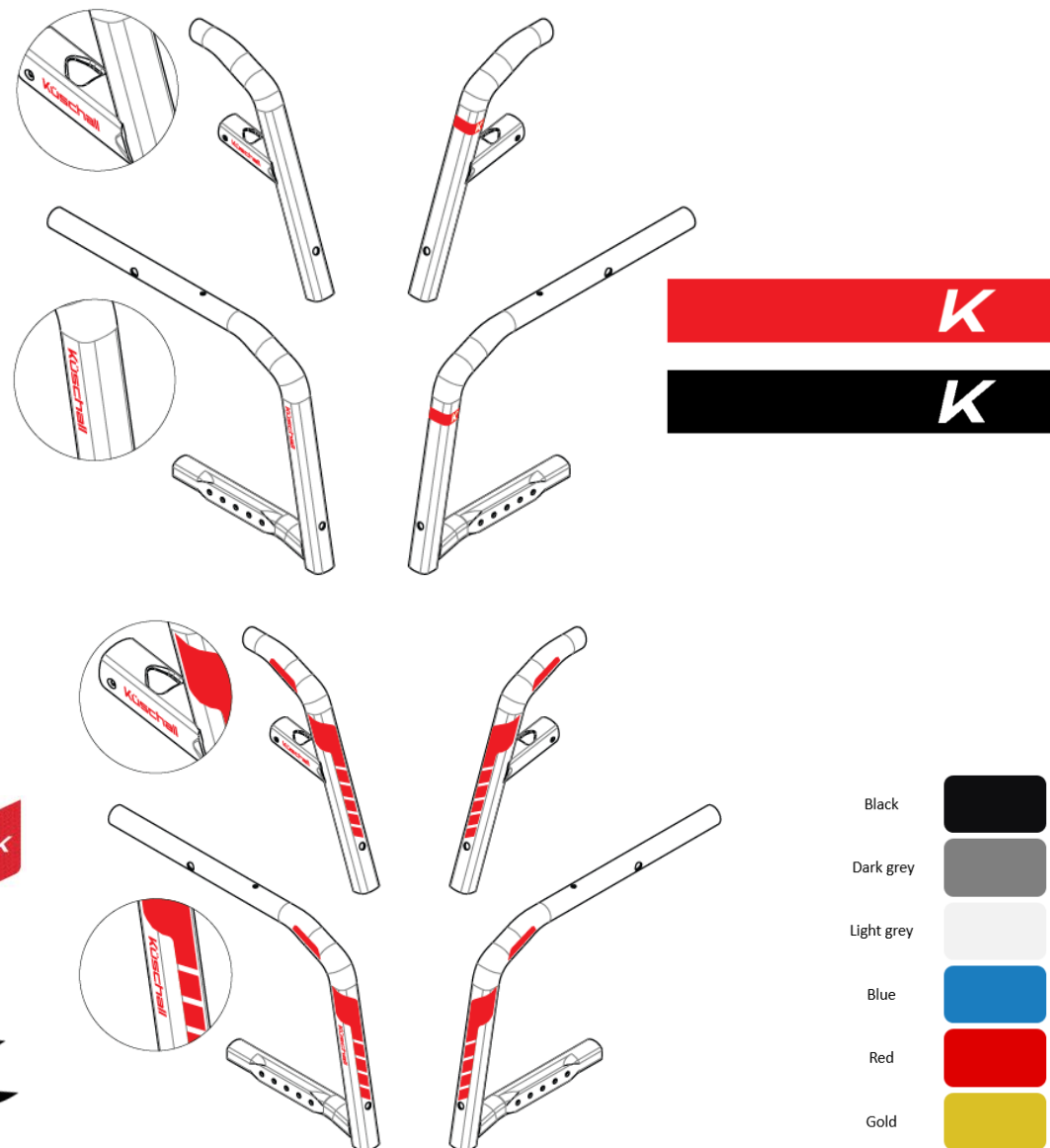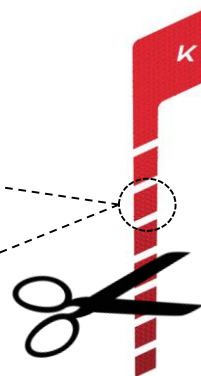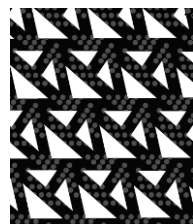


KÜSCHALL K-SERIES




Sztywna rama: K-SERIES

- Hydroformowana rama
 - USP: Zoptymalizowana wydajność jazdy dzięki obniżonemu punktowi zagięcia ramy (większa sztywność) na poziomie kolan
 - Ergonomiczny uchwyt do zmiany położenia i transferu
- Łuk podnóżka
 - USP: Płaska powierzchnia zmniejsza ryzyko punktów nacisku, poprawia komfort
 - Zgodny z ogólnym językiem designu

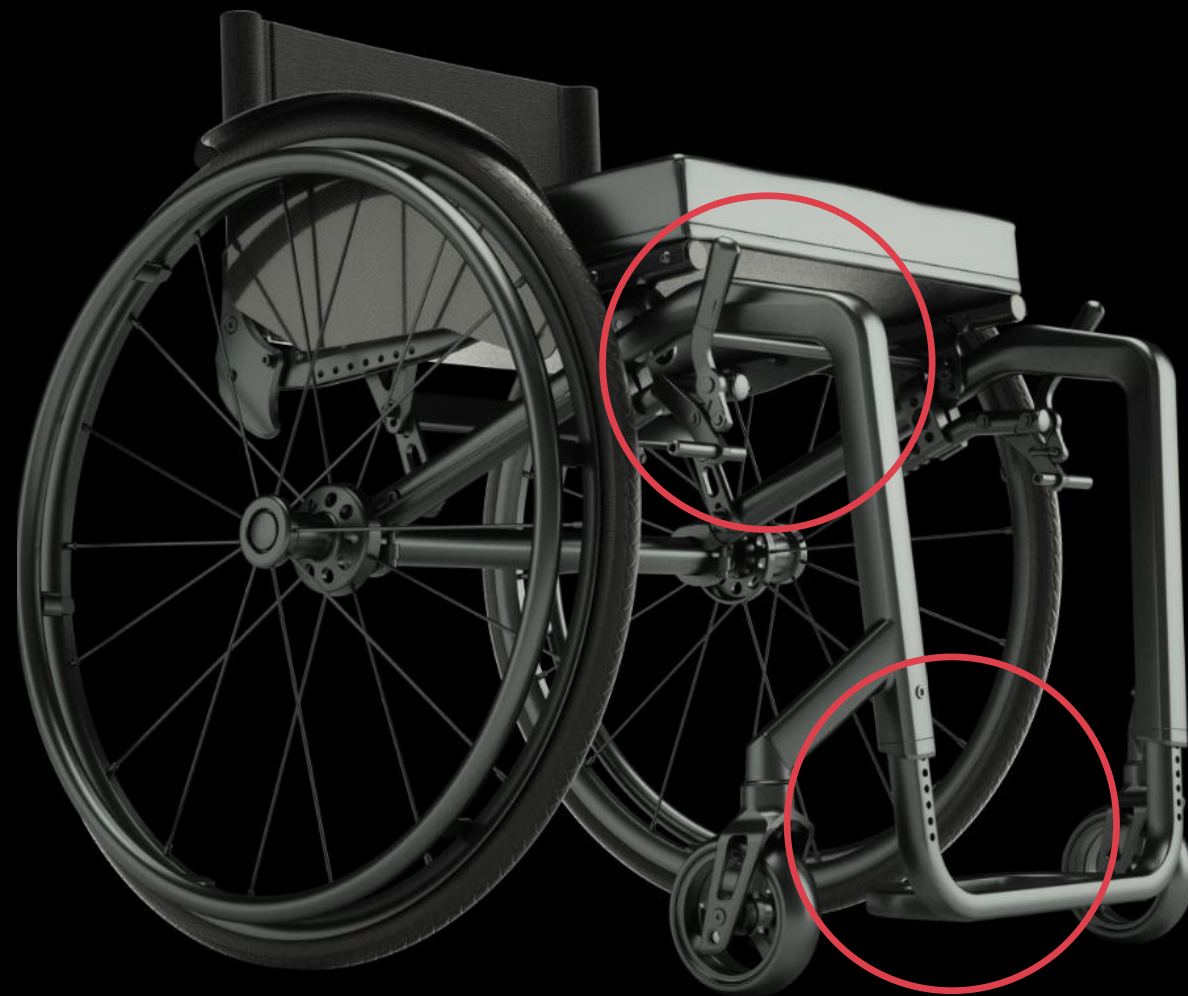

Sztywna rama: K-SERIES

- Nowy rodzaj stabilizacji pleców
 - Ergonomiczny uchwyt ułatwia przenoszenie wózka do samochodu
 - Zmieniony o 10 cm rozmiar w celu dopasowania się do oparcí dostępnych na rynku (np. Matrx)
 - Zgodny z ogólnym językiem designu projektowania

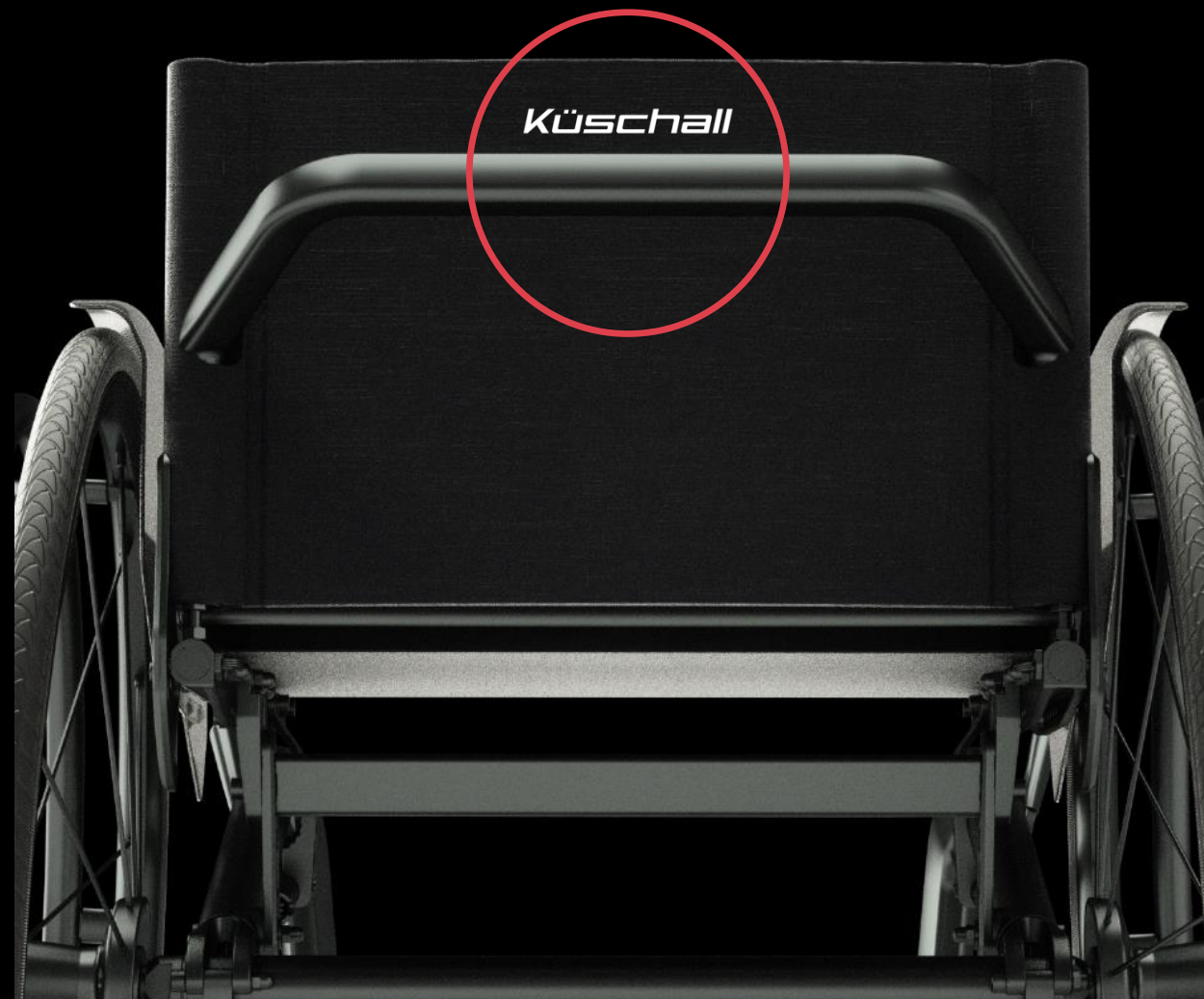

Sztywna rama: K-SERIES

- Nowa obudowa kół
 - Profil aluminiowy przyspawany do przedniej rury ramy
 - Zgodny z ogólnym językiem designu
- Widelec
 - Zintegrowane łożyska
 - Czysta konstrukcja



Nowe opcje

Ogólne

- Błotniki karbonowe i boczki ochraniające odzież przed zabrudzeniami
- Nowy, lekki Hamulec Active aluminiowy

• Ciągi Gekko


• BodyPoint Evoflex

• Rozszerzona

oferta oparc

Matrix Backrest


& Poduszek

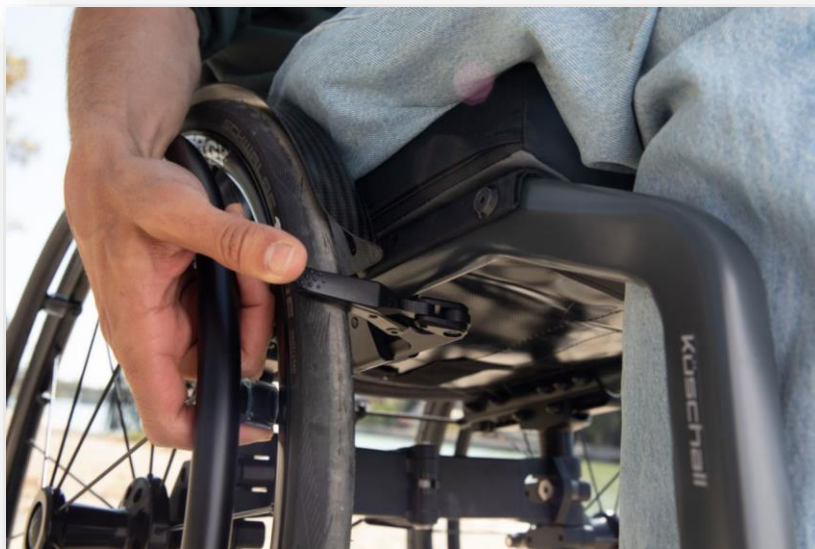

Personalizacja K-SERIES

TAG

- K TAG po prawej stronie na ramie
- Logo Küschall na mocowaniu lewego kółka
- W kolorze czerwonym lub czarnym (K i logo zawsze w tym samym kolorze)


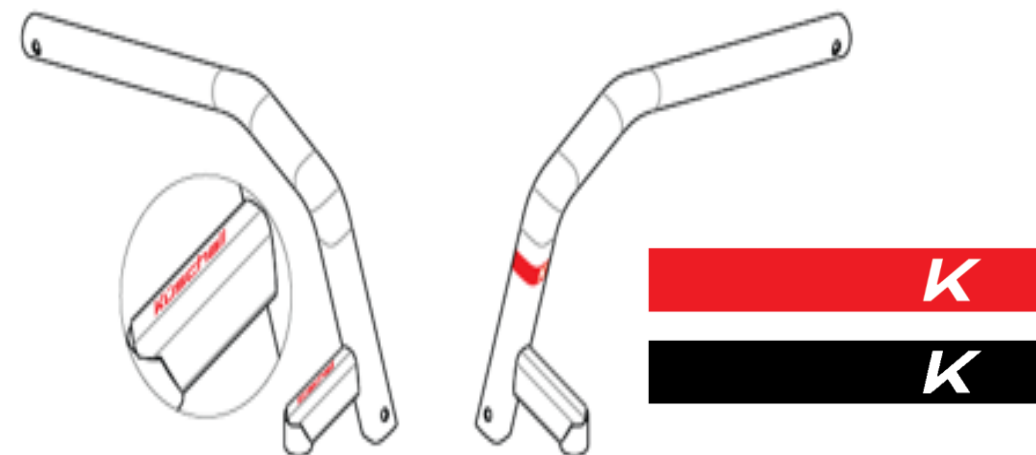


POGRUBIENIE


- Naklejka na wypełnienie przedniej ramy, przycięta do rozmiaru w zależności

od długości ramy

- 6 kolorów naklejek
- Drobny wzór druku na naklejce

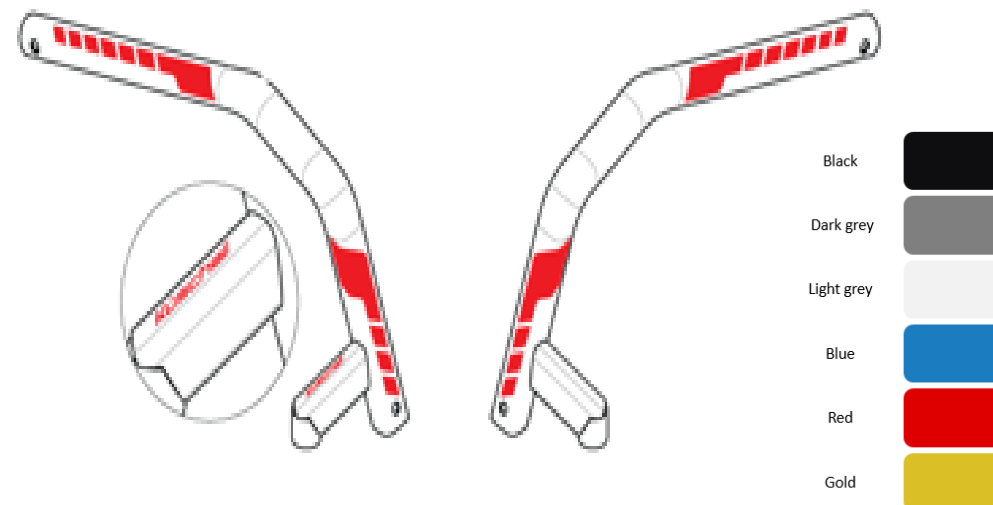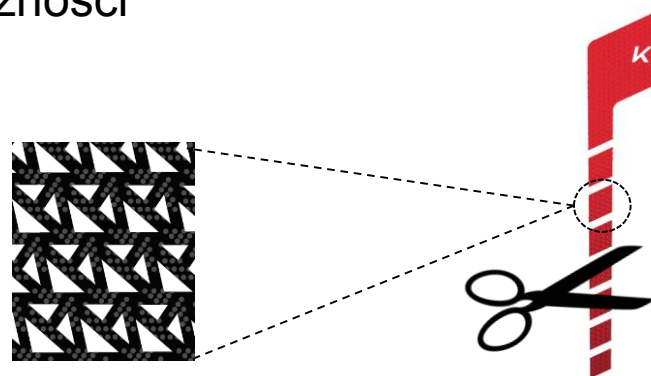


KÜSCHALL KSL

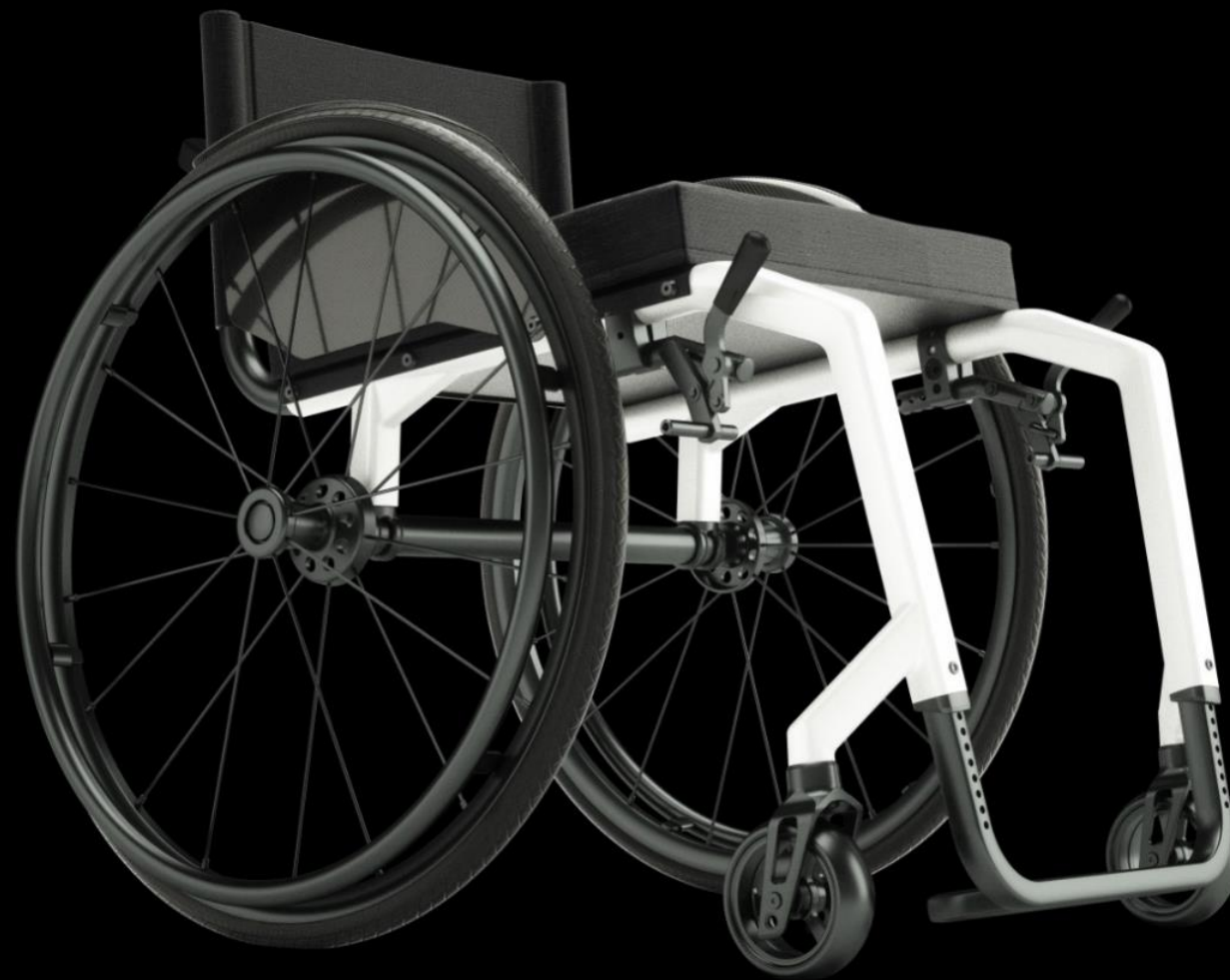

Sztywna rama: KSL

- Hydroformowana rama
 - USP: Zoptymalizowana wydajność jazdy dzięki obniżonemu punktowi zagięcia ramy (większa sztywność) na poziomie kolan
 - Ergonomiczny uchwyt do zmiany położenia i transferu
- Łuk podnóżka
 - USP: Płaska powierzchnia zmniejsza ryzyko punktów nacisku, poprawia komfort
 - Zgodny z ogólnym językiem designu

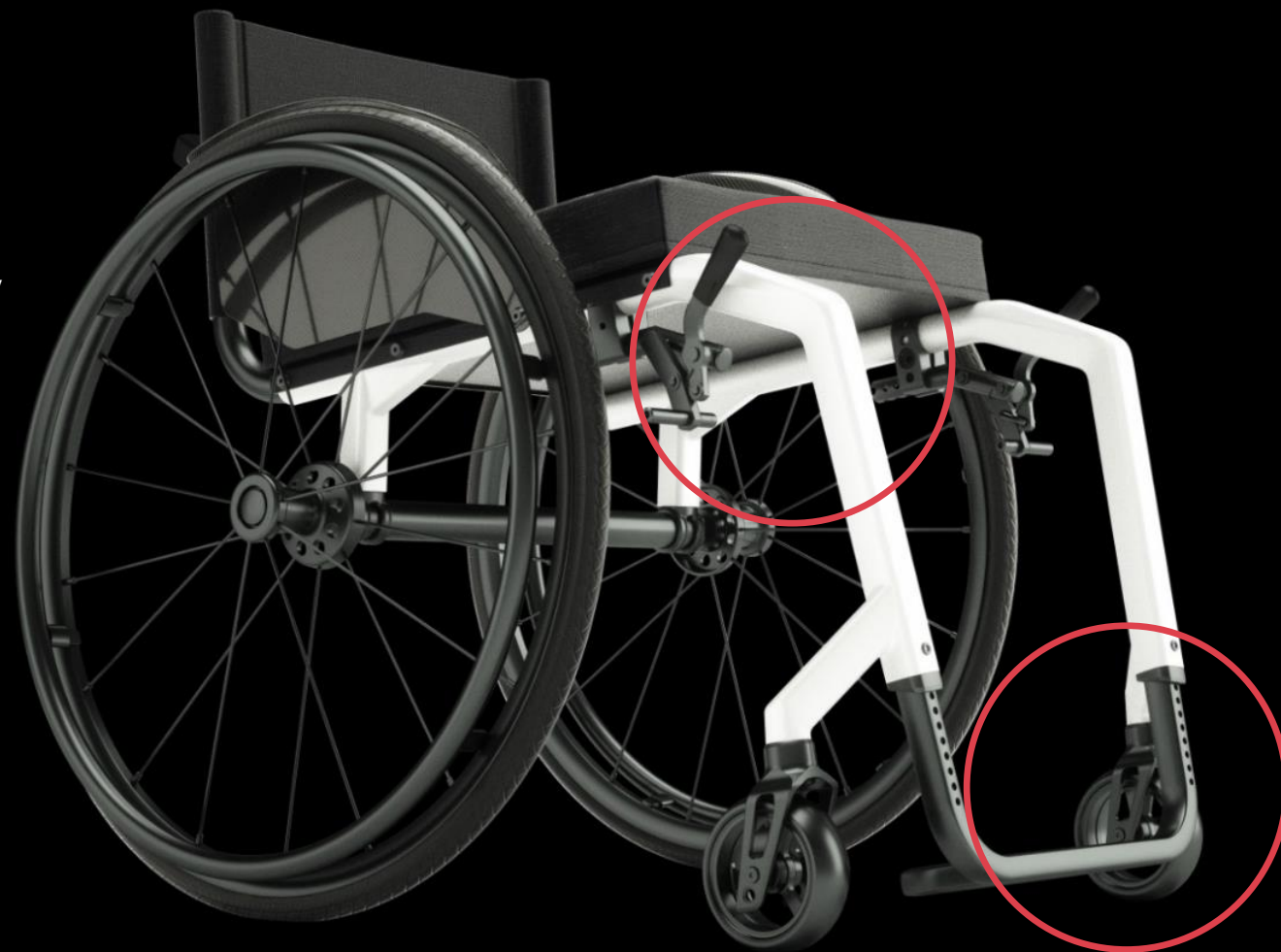

Sztywna rama: KSL

Nowy rodzaj stabilizacji pleców

- Ergonomiczny uchwyt ułatwia podnoszenie wózka do samochodu
- Zmieniony o 10 cm rozmiar w celu dopasowania do oparcia dostępnych na rynku (np. Matrix)
- Zgodny z ogólnym językiem designu




K




| MATERIAŁY DRUKOWANE



Katalog

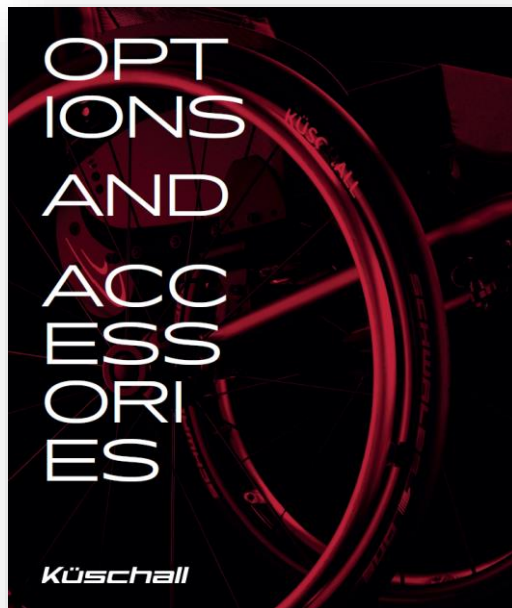

Akcesoria- broszura

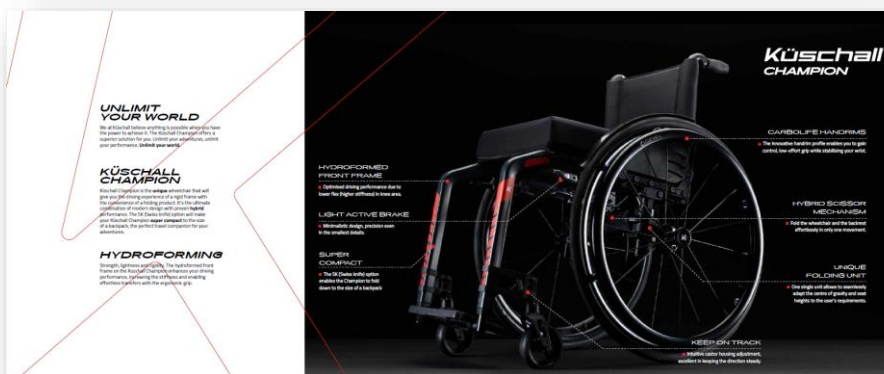

4 Broszury z produktami

- Nowa marka jest częścią projektu
- Produkty odgrywają większą rolę z elementami konstrukcyjnymi
- Zdjęcia USP i szczegóły
- Wyraźne wezwanie do działania



NIE GRANICZAJ SWOJEGO ŚWIATA

Staramy się oferować najlepsze rozwiązania dla Ciebie. Nasze wózki dają uczucie pragnienia posiadania udanego życia w sposób, w jaki sobie tylko wymarzysz.

Wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli masz moc, aby to osiągnąć. Chcemy, aby każdy mógł prowadzić aktywne życie i miał pewność siebie i chęć, by nie poddawać się w obliczu przeciwności losu.

Jesteśmy zdecydowani oferować najlepsze rozwiązania.

Jesteśmy gotowi burzyć ograniczenia w Twoim świecie.

HAMULCE



Hamulec Active łączy w sobie 3 kluczowe korzyści istotne dla aktywnych użytkowników. Prosta obsługa hamulca pozwala na użytkowanie nawet przez osoby posiadające ograniczoną sprawność ruchową w palcach. Z uwagi na to, że hamulec jest lekki, a jego pozycja jest odpowiednia (odległość od koła jest spora) zapobiega to urazom dłoni podczas ręcznego napędzania wózka.

NOWOŚCI



OPIS PRODUKTU	WAGA	NR
1. NOWOŚĆ-LEKKIE HAMULCE ACTIVE	84 gramy	7250
2. HAMULCE ACTIVE	290 gram	7240
3. HAMULCE PERFORMANCE	420 gram	7230
4. HAMULCE PULL	400 gram	7200
5. HAMULCE STANDARDOWE, DŹWIGNIA ZAGIĘTA	360 gram	7210
6. HAMULCE STANDARDOWE, DŹWIGNIA PROSTA	380 gram	7220
7. DŹWIGNIA PRZEDŁUŻONA	10 gram	7230

Zdjęcia- Lifestyle



Zdjęcia produktów




Zdjęcia produktów



PRODUKTY - FILMY VIDEO




4 filmy o produktach, które podkreślają główne opcje i możliwości USP oraz dostosowania każdego wózka

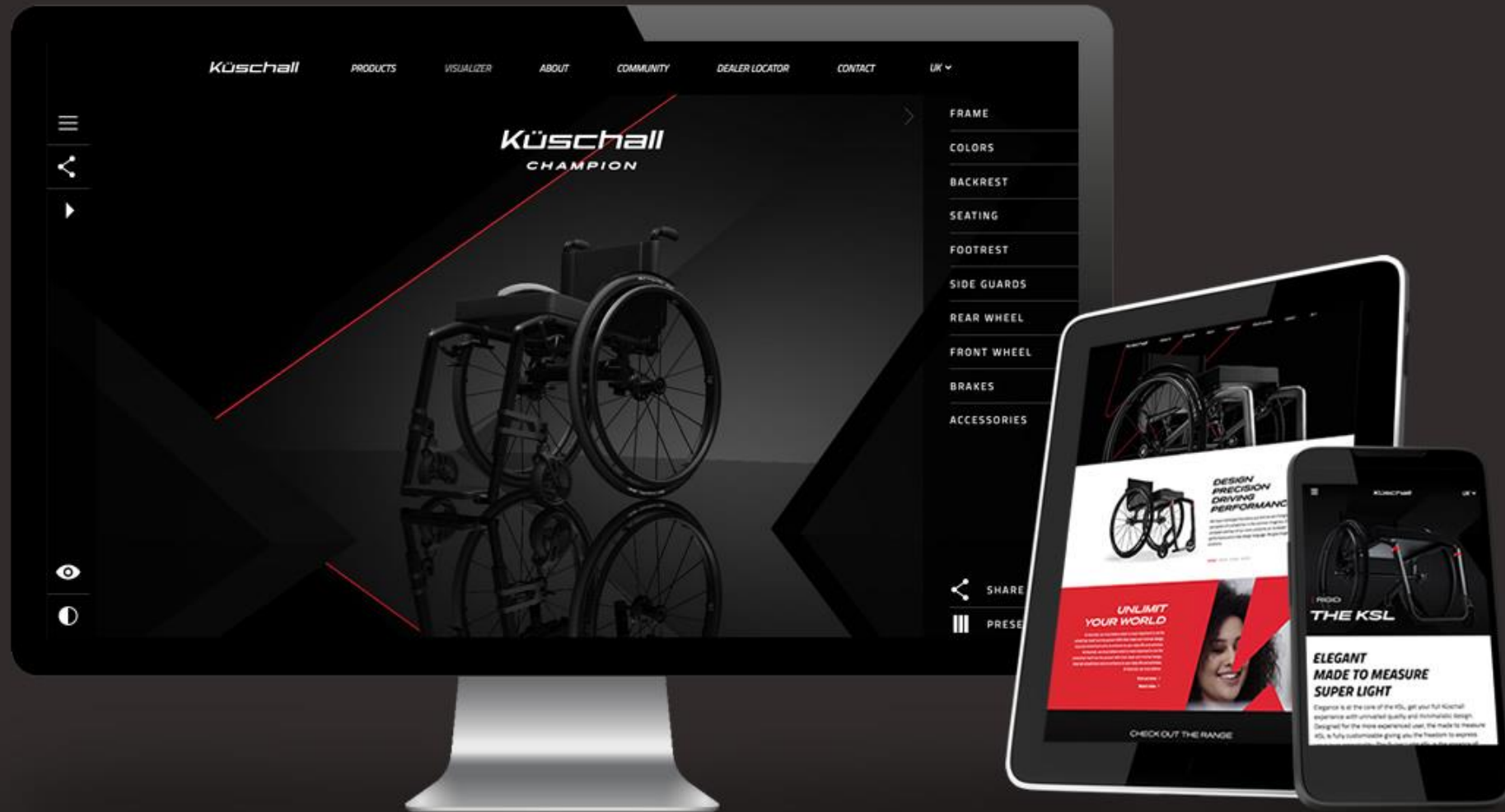

STRONA INTERNETOWA I WIZUALIZACJA


NOWA STRONA INTERNETOWA

- Większa obecność marki
- Produkty odgrywają kluczową rolę
- Koncentruje się na elementach designu i przyczynach (odповідziach na pytanie 'dlaczego?')
- Daje wyraźne wezwanie do działania

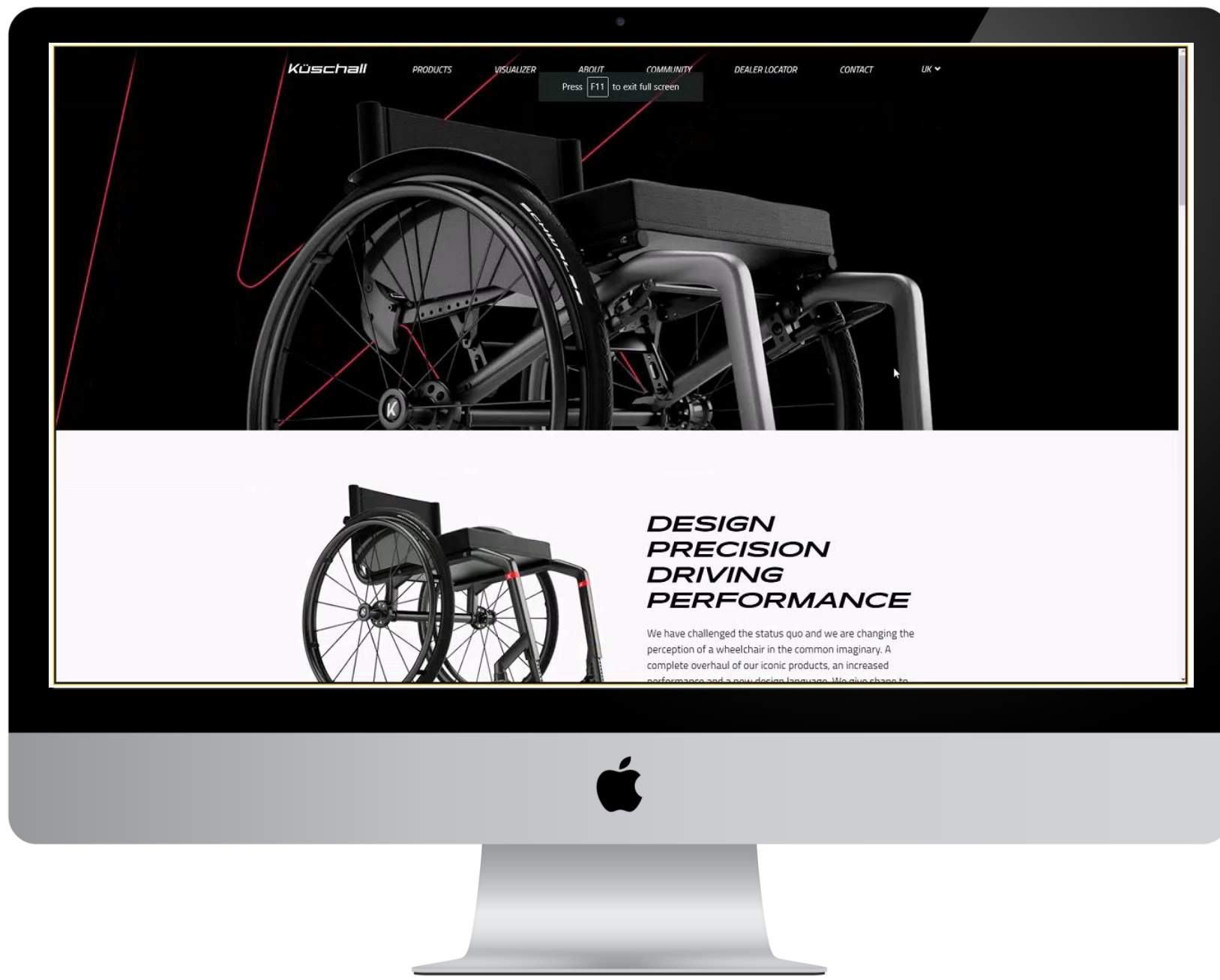

WIZUALIZACJA

- Koncepcja dostosowywania jest bardzo dobrze wyjaśniona
- Spersonalizowane standardowe konfiguracje dla lokalnych wymogów
- Skupia się na elementach designu i przyczynach (odповідziach na pytanie 'dlaczego?')
- Wyraźne wezwania do działania w celu wsparcia podejścia do użytkownika końcowego

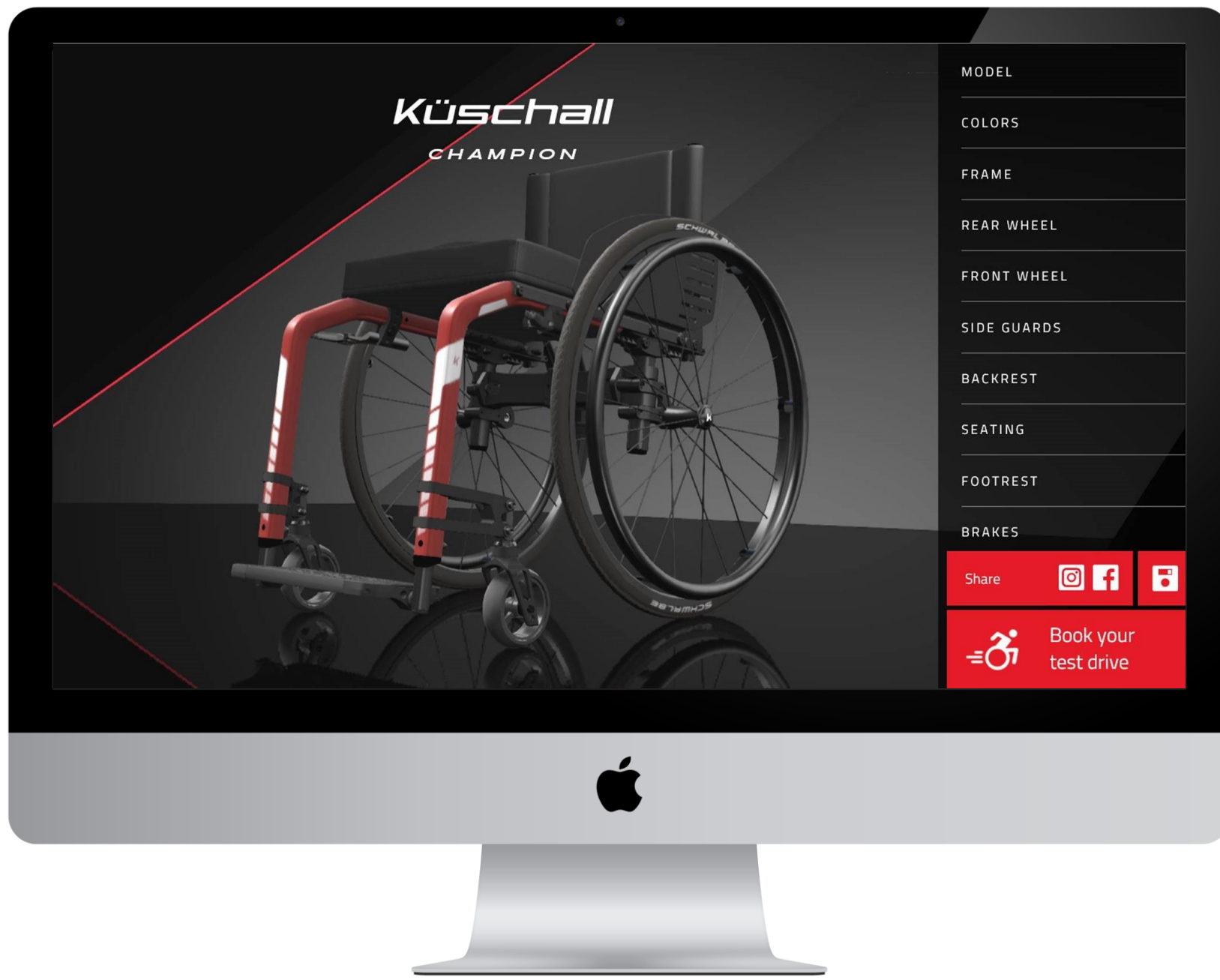



**Przedstawiamy nowy Clematis Pro
przywracający wysoki standard
wózków inwalidzkich T&R**

Invacare® Rea® Clematis Pro



Nowy, atrakcyjny, wygląd i funkcje zoptymalizowane ze względu na opiekę domową



Nowy podłokietnik H / A i ochrona odzieży, z jeszcze bardziej miękkim podłokietnikiem. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia większy komfort i wyższy poziom funkcjonalności

Całkowite przeprojektowanie ramy i mechanizmu przechylania pozwala na bardziej aktywną zmianę pozycji tylnego koła i ułatwia dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Nowy kolor ramy „Ciepły szary”

Pochylenie zwiększone do 25 ° z ulepszonym zrównoważeniem przechyłu włączając przesunięcie środka ciężkości (DSS)

Waga użytkownika zwiększona do 135 kg

Kompaktowa platforma (o szerokości mniejszej niż 30 mm) o atrakcyjnym wyglądzie i doskonałej zwrotności

Dźwignia hamulca zoptymalizowana i zamontowana wewnątrz, hamulec nożny w wersjach 12”



Nowy, atrakcyjny, wygląd i funkcje zoptymalizowane ze względu na opiekę domową

Nowy modułowy, łatwy w użyciu system oparcia, z tapicerką z tkaniny, twardym oparciem (O) i regulacją za pomocą pasków (O) i regulacją wysokości

Kształt poduszki oparcia Laguna został zoptymalizowany.

Nowy i ulepszony podnóżek A / A z regulacją głębokości, kąta nachylenia i szerokości

Oś QR dla zmniejszenia gabarytów przy transporcie i przechowywaniu

Podnoszone antytipery z blokadą



Bardziej zaktywizowane położenie środka ciężkości dla lepszej zwrotności (2). Uprozczone regulacje.

USP's

- Większe nachylenie siedziska, od 20 do 25 stopni
- Czysty design ułatwiający użytkowanie i obsługę
- Większa oferta produktów dzięki modułowemu systemowi oparcia (o)
- Mały powierzchnia postojowa
- Przesunięcie ciężaru dla lepszej równowagi osi tiltQR dla

Korzyści

- Lepsze korzyści kliniczne (redukcja nacisku)
- Nowy, atrakcyjny wygląd i funkcje zoptymalizowane pod kątem opieki domowej, łatwość obsługi dla osoby obsługującej
- Małe wymiary zapewniające większą zwrotność
- Nowe modułowe oparcie, które indywidualnie dopasowuje się do potrzeb użytkownika; jest wygodne, łatwe i intuicyjne

Wprowadzenie planowane jest na styczeń 2020 r



Invacare
przedstawia

Nowy Aktywny Wózek Bariatryczny

Action[®] Ampla[™]



Przegląd rynku bariatrycznego



32%

ludzi na
świecie jest

OTYŁYCH

(BMI>30 kg/m²)

Nadwaga i otyłość
jest największym
zagrożeniem dla
świata (według
zdrowia
publicznego)

68%

ludzi na
świecie ma

NADWAGĘ

(BMI>28 kg/m²)

Jeśli chodzi o wózki bariatryczne, jeden rozmiar **nie jest** dla wszystkich!

- Szerokość powinna **być dokładnie dopasowana** do pacjenta, utrzymując sylwetkę bez powodowania nacisku na jakikolwiek obszar ciała
- Jeśli wózek jest zbyt wąski, może to prowadzić do uszkodzenia skóry, takiego jak odleżyny w okolicy bioder
- Należy rozważyć głębokość siedziska, udźwig i położenie podnóżka



Większość osób plus size **ma problemy z poruszaniem się:**

- Nadmierna waga wpływa na stawy, powodując **ból i dyskomfort**
- pojemność płuc zostaje poważnie ograniczona, a ich wielkość zmniejsza się z powodu tkanki tłuszczowej (odkładania tłuszczu)

Oznacza to, że wielu staje się zależnych od wózka inwalidzkiego, aby w ogóle być mobilnym.

... brak **społecznej integracji i motywacji.**

- Wózek inwalidzki ma ściśle zwi zek z niepełnosprawno ci , a ludzie otyli czy z nadwaga nimi nie s .
- Niskie poczucie w snej warto ci i problemy z mobilno ci  blokuj  takie osoby: zostaj  one w domu bez mo liwo ci fizycznej i spo ecznej aktywno ci
- Nie wyobra aj  sobie funkcjonowania na w zku, a tym samym uniemo liwiaj  osi gni cie lepszej jako ci  ycia.

Po naszych próbach terenowych odkryliśmy potrzeby wózka bariatrycznego odpowiedniego dla użytkowników, dealerów, opiekunów i terapeutów



Użytkownik końcowy / Pacjent

- Lekkość, mała waga produktu
- Można napędzać przy użyciu minimalnej siły - zminimalizowane zęczenie
- Łatwy do transportu
- Wygodny




Dostawca / dealer / TAC

- Produkt wysokiej jakości o niskim TCO (*Total Cost of Ownership**)
- Możliwość konfiguracji (wszystkie funkcje potrzebne do spełnienia większości wymagań użytkownika)
 - Łatwa regulacja i naprawa
 - Spełnia wszystkie wymagania prawne i certyfikację (bezproblemowo)
 - Szybkie czasy dostawy (od 24 godzin paczka do 3-5 dni skonfigurowane) i części zamienne



Opiekun/Asystent

- Łatwy do pchania (dla asystenta/opiekuna) i prosty do złożenia, transportu lub przechowywania
- nieskomplikowane funkcje
- Niskie koszty utrzymania
- Łatwy do czyszczenia / utrzymania czystości
- Wytrzymały

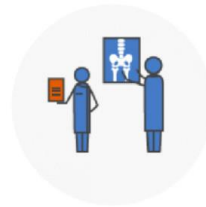

Terapeuta

- Łatwe manewrowanie (zwrotny)
- Funkcje kliniczne (rozwiązanie)
- Możliwość konfiguracji
- Łatwa regulacja i modyfikacja w przypadku postępującej choroby
- Niewielka waga dla ułatwienia transportu
- Wytrzymały

*Seria norm i certyfikatów dla elektronicznych urządzeń i mebli biurowych, oceniająca zgodność produktów pod względem ergonomii, energooszczędności i ekologii)

Action® Ampla

Najważniejsze funkcje:

- Łatwy w manewrowaniu, dzięki czemu użytkownicy mogą poruszać się dalej!
- Nowo zaprojektowane oparcie zapewniające lepszy dostęp do tylnych kół
- Lekki (**tylko 29 kg!**) *
- Możliwość dostosowania
- Dźwignia transferu, aby pomóc użytkownikowi wstać
- Kompaktowy, gdy jest przechowywany w jakimkolwiek miejscu
- Łatwe składanie i bezwysiłkowe pchanie wózka

Produkt nagradzany
przez



reddot award 2019
winner



