

Küschall®

COMPACT



ŚWIAT BEZ GRANIC

W Kuschall wierzymy, że wszystko jest możliwe, jeśli posiadasz moc, aby to osiągnąć. Kuschall Compact oferuje wszechstronność i niezawodność w jednym produkcie. Pokaż swoje oblicze, postaw na wygodę. **Otwórz swój świat.**

KÜSCHALL COMPACT

Kuschall Compact jest absolutnym symbolem **niezawodności** i wysokiej jakości. Wózek jest wyposażony w odchylany lub stały podnózek, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb w celu **zwiększenia poczucia komfortu**. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyższego poziomu konfigurowalności, czy aktywnego produktu, wyjątkowa funkcjonalność wózka będzie pasować do Twojego stylu życia.

HYDROFORMOWANIE

Hydroformowanie wniosło wartość dodaną do serii DNA Compact. Podczas, gdy wszechstronność i komfort pozostają niezmienione, waga została zmniejszona nawet o 500gram. Profil hydroformowanej ramy zapewnia większą sztywność tam, gdzie jest to konieczne oraz posiada bardzo współczesny design.

PRZEDNIA CZĘŚĆ RAMY

- Całkowite przeprojektowanie przedniej ramy i podpórek. Dzięki hydroformowaniu uzyskano redukcję masy do 500 gram.

PODNÓŻEK

- Wybierz wózek z odchylanymi podnóżkami, idealnymi do transportu i do transferu lub ze stałą przednią częścią ramy (kąt 80 ° lub 70°) dla zapewnienia większej sztywności.

PŁYTA PODNÓŻKA

- Nowa seria podnóżków pasuje do wszystkich szerokości siedziska i jest kompatybilna z nowoczesnym stylem projektowania dzięki nowej antypoślizgowej, jednoczęściowej płycie podnóżka.





Küschall® COMPACT

SYSTEM SKŁADANIA

- Łatwy system blokowania „jednym palcem” i mechanizm blokady wzdłużnej do zabezpieczenia rurek siedziska w fazie rozkładania wózka.

KRZYŻAK

- Zaprojektowany specjalnie dla użytkowników, u których występuje zmniejszona siła mięśniowa. Zapewnia także wsparcie przy większej wadze użytkownika bez zastosowania dodatkowego materiału do rur ramy.

TRZYMA SIĘ TORU

- Intuicyjna i unikalna regulacja obudowy kółka doskonale nadaje się do utrzymania stałego kierunku poruszania się.

WIDELEC

- Nowa, przejrzysta konstrukcja oraz zintegrowane łożyska. Zbieranie brudu jest znacznie zmniejszone, a konserwacja i ogólne utrzymanie łatwiejsze.

KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI


NIEZAWODNY

Imponująca sztywność - jak dotychczas, najmniejsza utrata energii podczas poruszania się uzyskana. To wszystko dzięki wbudowanemu, różnym rozwiązaniom technicznym w połączeniu z jednym elementem podnóżka. Compact składa się łatwiej niż jakikolwiek składany wózek aktywny, dzięki specjalnie zaprojektowanemu krzyżakowi, który sprawdzi się u użytkowników ze zmniejszoną siłą mięśniową.



WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Unikalne cechy i zalety dotyczą podnóżków, które są dostępne odpowiednio pod kątem 70 ° lub 80 ° oraz regulowany precyzyjny mechanizm blokujący przy minimalnym luzie. Składane oparcie sprawia, że wózek to jest naprawdę małym i kompaktowym zestawem transportowym.

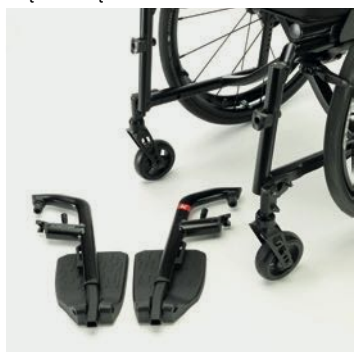

ZWIĘKSZONY KOMFORT

Wiele opcji pozwala dostosować wózek w zależności od potrzeb, takich jak rama przewidziana w celu lepszego ułożenia nóg. Łatwiej jest utrzymać stopy na podnóżku, a większa zwrotność z przodu oznacza, że wózek potrzebuje mniej miejsca przy manewrach.



LĘJSZY DZIĘKI HYDROFORMOWANIU

Rama została unowocześniona w każdym calu, dzięki technologii hydroformowania. Dokonano także dokładnego przeprojektowania, co spowodowało znaczną redukcję wagi do 500gram.



KONFIGURACJA

1 WYBIERZ KOLOR RAMY



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 STYL NAKLEJEK



3 KOLOR NAKLEJEK



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**SZEROKOŚĆ
SIEDZISKA**
280 – 500 mm
w odstępach 20 mm



**WYSOKOŚĆ
SIEDZISKA**
przód: 370 – 530 mm
tył: 360 – 500 mm w
odstępach 10 mm



CAMBER

0° / 3°



**GŁĘBOKOŚĆ
SIEDZISKA**
320 – 500 mm
w odstępach 20 mm



KĄT RAMY
70° / 80°
Rama prosta lub
rama
przywiedziona



**CAŁKOWITA WAGA
Z KOŁAMI**
ok. 10.5 kg (rama odchylana)
ok. 9.6 kg (rama stała)



**DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/
PODUDZIA**
200 - 510 mm
w odstępach 10 mm



**SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA**
Szerokość siedziska + 160 mm



**WAGA
TRANSPORTOWA
(BEZ KÓŁ)**
ok. 7.8 kg (rama odchylana)
ok. 6.7 kg (rama stała)



**WYSOKOŚĆ
OPARCIA**
300 – 510 mm
w odstępach 15 mm



**SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA
PO ZŁOŻENIU**
ok. 290 mm



**MAKSYMALNA
WAGA
UŻYTKOWNIKA**
130 kg



**KĄT
OPARCIA**
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

70°: ok. 870 – 1220 mm
80°: ok. 850 – 1200 mm



CRASH TEST

Zatwierdzony - Spełnia
wymagania ISO 7176-19



Wszystkie podane wymiary i wagi oparte są na szerokości siedziska i głębokości siedziska 400 mm w najlżejszej i najbardziej kompaktowej konfiguracji. Waga i pomiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na naszej stronie internetowej.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
mail: biuro@kuschall.eu

"PARTNER" Szmidt-Banyś Spółka Jawna
Ul. Chorzowska 30c
41-910 Bytom

Kuschall, Kuschall Unlimit your world, K, Unlimit your world i K-Series s7 znakami towarowymi Invacare International GmbH. dokonano wszelkich starań, aby zawartość tej publikacji była w pełni aktualna w momencie oddania do druku.
W ramach ciągłego

doskonalenia produktów, Invacare International GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikacji istniejących modeli w dowolnym momencie. © lipiec 2019, Invacare International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. EU - 1659367