

BEZKONKURENCYJNY



Design. Technologia. Wydajność.



Yes, you can.®

AVIVA RX

Nasze wózki to komfort na zupełnie nowym poziomie

Nasze wózki elektryczne **AVIVA RX** są przeznaczone do pokonywania wyzwań związanych z obecnym stylem życia. W domu, w pracy, poza domem będziesz gotowy stawić czoła temu, co daje Ci świat. Wózek AVIVA RX jest kompaktowy, regulowany (więc będzie współpracował z Tobą). Jest on naszym najbardziej komfortowym pojazdem.



AVIVA podwozie

Jedź dokąd chcesz



Wjedziesz bez problemu pod górę, pokonasz wyboisty bruk, jakby był gładkim chodnikiem. Nadażysz za tempem współczesnego życia. Będziesz widzieć lepiej i będziesz widoczny dla innych. Możesz również spersonalizować wózek, aby podkreślić swoją osobowość.

Niezbędne informacje

>Zawieszenie

Cechą szczególną jest nasze opatentowane zawieszenie CTC. Zapewnia doskonałą kontrolę i idealną przyczepność oraz dodatkowy komfort. Ten kompaktowy wózek naprawdę może pokonać spory dystans.

Zawieszenie można łatwo zmienić z twardego na miękki, aby dopasować go do własnych potrzeb. Technologia działa trochę jak przegub kulowy, dzięki czemu podstawa może poruszać się we wszystkich kierunkach, zapewniając płynną jazdę.

>Technologia LiNX® G-TRAC®

Cyfrowa technologia żyroskopowa wykrywa i koryguje nawet najmniejsze odchylenie na ścieżce, dzięki czemu udasz się dokładnie tam, gdzie chcesz, bez konieczności zmiany kierunku sterowania. Jest to szczególnie przydatne, jeśli korzystasz z alternatywnych wejść sterujących.

Perfekcyjny balans

Niezwykłe stabilny na nierównym podłożu

Pokona niemalże każdy rodzaj terenu

Wszystkie cztery koła zawsze mają kontakt z podłożem, co skutkuje płynną i wygodną jazdą.

Technologia podstawy

> Pod górę

Jazda się pod górę nie będzie trudna – dodasz mocy bezpiecznie i bez wysiłku.

> Ciche podróże

Dzięki amortyzatorom elastomerowym nie skrzypią ani sprężyny ani podwozie.

Aby naprawdę docenić jakość AVIVA RX, musisz odbyć jazdę próbną i przekonać się na własnej skórze.



Smukła linia idealna do ciasnych przestrzeni

560_{mm}

Szerokość

420_{mm}

Maksymalny rozmiar akumulatora

73,5_{Ah}

Nasze wózki mają tylko 560 mm szerokości, a więc są tak małe, że wąskie przestrzenie będą wydawały się nieco większe:

- > Dom
- > Lokalne kafejki
- > Windy w centrach handlowych
- > Korytarze biurowe

Poruszaj się z łatwością w ciasnych przestrzeniach, czując się bezpiecznie w swoim wózku.

*AVIVA RX z Ultra Low Maxx

Mały i kompaktowy promień skrętu

Drobna podstawa AVIVA RX ma mały promień skrętu. Z łatwością manewruj i skręcaj w małych przestrzeniach, takich jak wąskie korytarze i alejki handlowe.



Ultra wąski 560 mm



Niezawodny przy odległościach

AVIVA RX może obsługiwać akumulatory o pojemności do 73,5 Ah, zapewniając rozszerzony zakres mocy. Ta kombinacja jest wyjątkowa w tym wózku elektrycznym — żaden inny wózek nie jest tak kompaktowy i nie ma tak dużego zasięgu. Kiedyś mniejsze podstawy były utrudnieniem do pokonania odległości. Teraz już nie — możesz mieć oba!






Wyraź siebie

Stworzony na miarę Twoich potrzeb

Wybierz z szerokiej gamy kolorów wyprofilowanych osłon, kół i felg. W standardzie kolor czarny, ale jest też niebieski, czerwony, srebrny lub fioletowy. Jeśli to dla Ciebie za mało, możesz wybrać dowolny kolor z palety RAL. Dopasujemy dowolny kolor (za dodatkową opłatą). Nasze wózki elektryczne są smukłe i posiadają nowoczesny design, dzięki czemu możesz czuć się pewnie.


Dostępne kolory

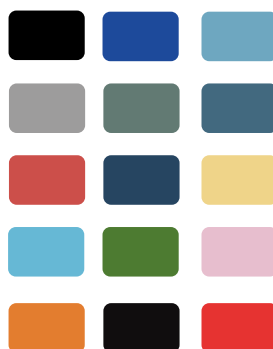

Kiedy zapada zmrok

**Ultra mocne
reflektory. Żaden
wózek tego nie ma!**





Dzięki nowemu, wydajnemu systemowi oświetleniowemu AXENDO będziesz mógł lepiej poruszać się po ulicach. Ten system jest mocniejszy niż większość innych systemów, które można dostać gdzie indziej, dzięki czemu możesz lepiej widzieć i być widoczny dla innych,

Oświetlenie AXENDO system oferuje pakiety oświetlenia dopuszczonego do ruchu drogowego w dwóch różnych wersjach.



Wysokość siedziska do podłogi

Zbliż

się

AVIVA RX ma bardzo nisko ustawione siedzisko względem podłoża, co ułatwia dostęp do stołu czy i biurka.

Ułatwia również dostęp do pojazdów przystosowanych do wózków inwalidzkich (WAV).

420 mm



Regulacje

Kiedy Twoje potrzeby się zmieniają, możesz dopasować swój wózek

Aby mieć pewność, że zawsze wygodnie siedzisz na wózku, możesz szybko dostosować szerokość, długość, zawieszenie, wysokość, środek ciężkości i pozycję siedziska..

Możesz dostosować wózek do tego, co jest dla Ciebie najlepsze dzięki różnym rozmiarom akumulatorów, prędkościom silnika, rozmiarom i typom kół, rodzajom widelców, opcjom oświetlenia i stacjom dokującym.



Wybierz odpowiednią dla siebie podstawę 560 mm lub 635 mm, a będziesz mieć następujące opcje:

- > Zawieszenie miękkie, standardowe, twarde lub HD
- > Siedzisko 435 mm, 460 mm lub 485 mm od podłoża (Modulite)
- > Siedzisko 420 mm, 435 mm, 460 mm lub 485 mm od podłoża (Ultra Low Maxx)
- > Opcje prędkości 3 kmh, 6 kmh, 10 kmh i 12 kmh
- > Akumulator o pojemności 52 Ah, 60 Ah lub 73,5 Ah
- > Koła 8" lub 9"



Osiągaj szczyty

Funkcja podnoszenia siedzenia umożliwia podniesienie do 300 mm

**Możliwa rozmowa
ze znajomymi na
wysokości oczu
twarzą w twarz
czy sięganie
po przedmioty
wysoko na półkach.**

>Dyskretny i dynamiczny

Dzięki eleganckiemu mechanizmowi podnoszenia możesz dyskretnie zmieniać wysokość, gdy tylko chcesz.

>Porusza się z tobą

Nie ma potrzeby zatrzymywania wózka przed podnoszeniem lub opuszczaniem; inteligentny AVIVA RX pozwala korzystać z funkcji windy podczas jazdy.



Systemy siedzisk

Ultra Low Maxx

Połączyliśmy doskonałą podstawę AVIVA RX z wysokiej klasy systemem siedzisk Ultra Low Maxx, który zapewnia idealną postawę, jednocześnie dając poczucie komfortu.



170°

recline

50°

tilt

> Naturalne punkty obrotowe

Naturalne punkty obrotowe stanowią kluczową cechę przemawiającą za funkcją siedzisk Ultra Low Maxx. To znaczy, że głowa, ramiona, biodra i stopy dotykają powierzchni wózka naśladując naturalne punkty obrotu Twojego ciała. Jest idealne dopasowanie, dzięki któremu czemu będziesz czuć się bezpiecznie.

> Wsparcie przez cały czas

Bez względu na dynamiczne ruchy pozycjonujące systemu siedzisk, Ultra Low Maxx podąża dokładnie za ruchem Twojego ciała, co daje uczucie podparcia przez cały czas.

> Wbudowana szyna

Pozwala na dodanie akcesoriów do Twojego wózka w zależności od potrzeb.

> Wybierz swoje siedzisko

Szerokość: 405-610 mm

Głębokość: 405-580 mm

Wysokość oparcia: 355-505 mm

Wysokość podłokietnika: 230-405 mm



Systemy siedzisk

Jednoczęściowe

➤Wszechstronne

To genialny system siedzisk dla początkujących, jeśli nie ma potrzeby wsparcia ciała z najwyższej półki .

➤Regulowany

Napężenie tapicerki oparcia można dostosować do własnych potrzeb tak jak wyregulować podłokietniki i podnóżki.



Systemy siedzisk

Modulite

Modulite daje Ci wybór. Zarówno komfort jak i prawidłowy rozkład nacisku są niezmiernie istotne w ustawieniu siedziska. Jeśli twoje potrzeby się zmieniają, tak samo może zmienić się pierwotne rozwiązanie - np. z łatwością można zmienić jedną podstawę siedziska na drugą.

> Wielofunkcyjny, elastyczny system siedzisk: zapewnia pełną gamę rozwiązań dotyczących postawy ciała.

> Modulite oferuje różne opcje podparcia siedziska i poduszek dla wyrównania postawy i poprawy uczucia komfortu.

Spersonalizowane dopasowanie

Spełnia się Twoje potrzeby:

- > Głębokość siedziska
- > Szerokość siedziska
- > Wysokość oparcia
- > Wysokość podłokietnika
- > Wysokość siedzenia
- > Długość podnóżków

Sterowanie REM400

kolorowy ekran dotykowy

Wbudowany Bluetooth

Połącz się ze smartfonem, laptopem i inteligentnym głośnikiem

Technologia ekranu dotykowego

Przesuń palcem lub dotknij kolorowego ekranu dotykowego i miej kontrolę nad tym, gdzie jesteś dzięki naszemu sterowaniu REM400

Wyczyść wskaźnik prędkości

W lewym górnym rogu ekranu sterowania znajduje się prędkościomierz, wskazujący prędkość wózka podczas jazdy. Dostępny jest również licznik kilometrów, który rejestruje przebytą odległość.

Bezpośredni dostęp

Przejdź od razu do menu – masz bezpośredni dostęp do profili i funkcji

Oburęczny

Elementy sterujące można dostosować do użytku zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych. Jeśli standardowy joystick nie działa w Twoim przypadku, możesz dostosować swój wózek za pomocą specjalistycznego sterowania





Sterowanie specjalistyczne

Single switch - pojedynczy przełącznik

Joystick



Extremity control

Joystick



Kompaktowy, dziecięcy

Joystick

MEC

Joystick



Kompaktowy z wyświetlaczem LED

Joystick



Produkt	Opis	Typ
> Extremity control joystick	Mały joystick idealny do sterowania podbródkiem, wyposażony w zagiówek i przełącznik w kształcie jajka.	Joystick
> MEC joystick	Idealny w przypadku osłabienia mięśni lub kontroli motorycznej. Wymaga niewielkiej siły.	Joystick
> Compact remote with LED display - Kompaktowy joystick z wyświetlaczem LED	Sprawdzi się przy ograniczonym zakresie ruchu i/lub zmniejszonej sile mięśniowej.	Joystick
> Paediatric compact joystick- Kompaktowy, dziecięcy joystick	Jego podstawa na płycie sprawia, że jest to dobra opcja do montażu na środku.	Joystick
> Single switch joystick- pojedynczy przełącznik	Stworzony dla osób z wysokim napięciem mięśniowym lub niekontrolowanymi ruchami.	Joystick

Zaglówek Sip 'n' Puff z przełącznikiem sterowanym ustami

Sterowanie zagłówka



Zaglówek ATOM/PROTON

Sterowanie zagłówka



Przełącznik zbliżeniowy

Przełączniki



Jednostka sterująca asystenta

Podwójna kontrola



IDC dual control-podwójna kontrola

Podwójna kontrola



Możesz wybrać sterowanie innej firmy i używać go z naszym inteligentnym systemem LiNX, które współpracuje z szeregiem wejść sterujących.

Produkt	Opis	Typ
> Zagłówek Sip 'n' puff z przełącznikiem sterowanym ustami	Wykorzystuje proste sterowanie Sip 'n' puff wraz z ruchami głowy	Sterowanie zagłówka
> Zagłówek ATOM/PROTON	W zagłówku zamontowane są trzy czujniki zbliżeniowe z wbudowanym Bluetooth	Sterowanie zagłówka
> Przełącznik zbliżeniowy	Idealny jeśli masz określony zakres ruchu a nie masz siły	Przełączniki
> Jednostka sterująca asystenta	Pozwala Twojemu opiekunowi na korzystanie z niektórych funkcji wózka	Podwójna kontrola
> IDC dual control-podwójna kontrola	Twój opiekun może sterować niektórymi funkcjami, np. hamowanie awaryjne	Podwójna kontrola



Wciąż pojawiają się usterki? Nasza aplikacja informuje Twojego dostawcę, aby pomógł je naprawić.

>MyLiNX

MyLiNX to aplikacja, która kładzie kres obawom o żywotność baterii i odsuwa na bok dokuczliwe obawy, że coś pójdzie nie tak z Twoim wózkiem. Pokazuje ważne informacje o czasie jazdy, żywotności baterii i ogólnym zużyciu.

* Dostawca musi być zarejestrowany w MyLiNX





Podejmij decyzję

I zabierz nasz wózek na przejażdżkę

Wybór wózka elektrycznego to poważna, która nie zawsze jest łatwa. Jesteśmy pod telefonem, aby pomóc; wyjaśnimy zalety każdego modelu, by móc znaleźć ten, który jest dla Ciebie odpowiedni. Jeśli dotarcie do sprzedawcy w celu przetestowania wózka jest trudne, daj znać – przyjedziemy do Ciebie.

Już znasz wszystkie funkcje AVIVA RX, czas go wypróbować.

Jedynym sposobem, aby naprawdę dowiedzieć się czy znalazłeś odpowiedni wózek, jest wypróbowanie go samodzielnie. Możesz „przetestować” wszystkie nasze wózki. Umów się na bezpłatną prezentację u lokalnego dealera już dziś.

Bezkonkurencyjny



Design.Technologia.Wydajność

Informacje od dealera:



Invacare Limited
Pencoed Technology Park - Pencoed
Bridgend CF35 5AQ - Zjednoczone
Królestwo
Tel: +44 1 656 776 222
Fax: +44 1656 776 220

E-mail: uk@invacare.com
Dział Zamówień
E-mail: ordersuk@invacare.com
www.invacare.co.uk
Invacare Ireland Ltd
Unit 5 - Seatown Business Campus
Seatown Road - SWORDS County
Dublin - Irlandia
Tel. +353 1 8107084
Fax +353 1 8107085
Email: Ireland@invacare.com
www.invacare.ie

© 2020 Invacare International GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone.



Uważa się, że wszystkie przytoczone informacje były aktualne w momencie druku. Invacare zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniej konsultacji. Więcej informacji przed sprzedażą tego wózka inwalidzkiego można znaleźć na stronie www.invacare.eu.com.
Informacje na temat opisu typowego użytkownika, przeznaczenia, regulacji i transportu można znaleźć w podręczniku użytkownika.
AVIVA RX - BROSZURA DLA KONSUMENTÓW -
KWIECIEŃ 2020 - PN 1632196