



erivo®

**Wytrzymały i wygodny
wózek elektryczny**

Bądź tam:

Poczuj wolność

NOWOŚĆ




+ **erivo**. Zawsze z Tobą.

LiNX



02

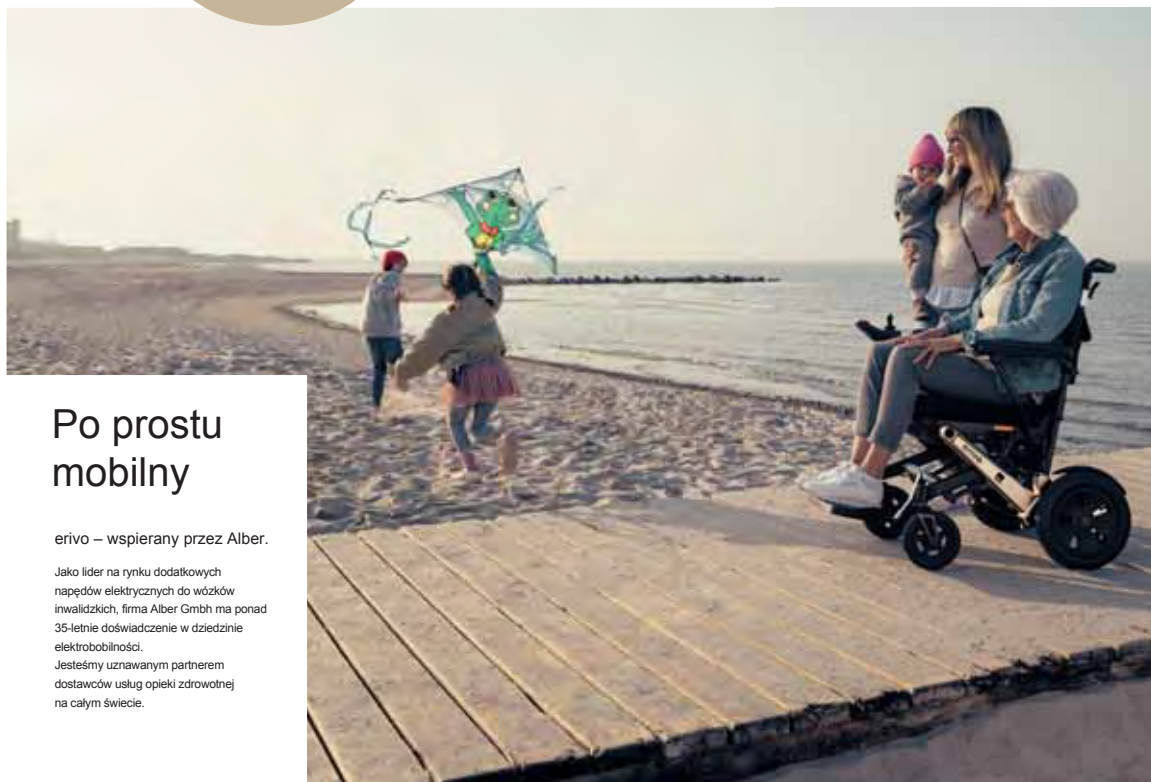

Po prostu mobilny

erivo – wspierany przez Alber.

Jako lider na rynku dodatkowych napędów elektrycznych do wózków inwalidzkich, firma Alber GmbH ma ponad 35-letnie doświadczenie w dziedzinie elektrobobolności. Jesteśmy uznawanym partnerem dostawców usług opieki zdrowotnej na całym świecie.

No to lecimy – komfortowa podróż dzięki eviro.

Twój kompaktowy towarzysz na co dzień i w podróży.

Poczucie bycia niezależnym i pewnym siebie, możliwość wyjścia na świeże powietrze z przyjaciółmi, cieszenie się słońcem w parku z rodziną, czy wyjazd na długo wycieczki wakacje z partnerem; wózek Eviro firmy Alber pomoże Ci stać się osobą bardziej mobilną, a tym samym zapewni nową jakość życia.

Eviro składa się z pomocą prostego mechanizmu, natomiast dzięki kompaktowym rozmiarom jest łatwy do przenoszenia. Już teraz możesz znowu zacząć marzyć o odkrywaniu nowych kierunków i miejsc, zamiast martwić się o drogę dotarcia do nich.



35 lat doświadczenia



Partner ubezpieczenia zdrowotnego



Partner wyspecjalizowanych dealerów

erivo.

Elegancki i praktyczny



W naszym coraz bardziej nowoczesnym świecie liczy się przede wszystkim jedna rzecz: mobilność. Dlatego potrzebujemy środków transportu, które odpowiadają naszemu stylowi życia i pomagają nam pokonywać przeszkody. Muszą być niezawodne, elastyczne oraz przyjazne dla użytkownika i oczywiście wygodne.

+ erivo®.design



W najwyższej formie.

Eviro oferuje dynamiczną i wygodną jazdę dzięki eleganckiej sylwetce, wyjątkowej kolorystyce i wykonaniu z najwyższej jakości materiałów ustanawia nowe standardy designu. Sprawia wrażenie niezwykle stylowego wózka.

Dwukolorowe wykończenie lakieru
w kolorze szampańskiego złota i matowej czerni

Solidny i wytrzymały



+ erivo®.komfort



Perfekcyjne dopasowanie.

Jednym z najważniejszych czynników w wózku elektrycznym jest komfort siedzenia; erivo może poszczycić się bardzo przemyślaną ergonomią, najlepszymi materiałami i najwyższą jakością wykonania. Wysokiej jakości pianka zapewnia komfort siedzenia i dobre podparcie przez cały czas.

Ergonomiczny
Komfort dzięki stabilnemu siedzisku i wysokiej jakości piance
Oddychające materiały



Jedź dalej.

Skutecznie działające zawieszenie tylnych kół zapewnia wyjątkowy komfort jazdy. Duże przednie koła są odporne na przebicie, zapewniają dobrą amortyzację i idealne wsparcie podczas pokonywania małych przeszkód.

Zawieszenie i duże opony pneumatyczne
tyłne 12 1/2"
Odporne na przebicie koła PU
Przód 8"



Prosty i elastyczny

06

+ erivo® funkcjonalny



Inteligentna technologia składania

Dzięki prostemu mechanizmowi erivo składa się do kompaktowych rozmiarów, co wiąże się z oszczędnością miejsca. Niewiele większy od małej walizki, zmieści się w jakiegokolwiek wnętrzu, ale także bez problemu z będzie Ci towarzyszył podczas następnej podróży.

Składa się szybko i łatwo
Kompaktowe przechowywanie

Jednostka sterująca, podłokietnik i podnóżek


Eviro oferuje maksymalną elastyczność dzięki odchylanemu joystickowi i składanym podłokietnikom. Dzięki temu możesz z łatwością podjechać do stołów lub dowolnie zmieniać miejsca. Podnóżek również jest obrotowy i ma regulowaną wysokość.

Podnóżek z regulacją wysokości
Elastyczna jednostka sterująca i podłokietniki

Moc akumulatora

Wydajny akumulator jest montowany pod siedziskiem i można go wyjąć bez użycia narzędzi. Jest w zestawie z ładowarką; akumulator można ładować siedząc na wózku. Maksymalne naładowanie w ciągu zaledwie 6 godzin.

Maksymalny czas ładowania: 6 godzin
Zasięg: do 11/22 mil^{*}, czyli (17 km)

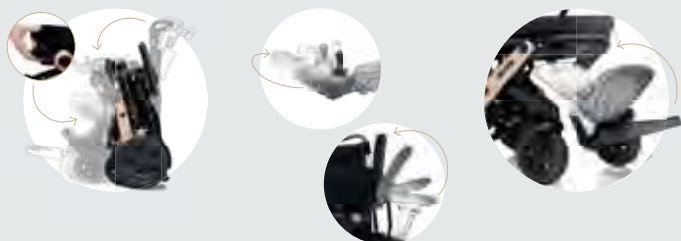


+ erivo® dynamiczny



Intuicyjne sterowanie

Intuicyjny joystick zapewnia płynną i precyzyjną kontrolę prędkości jazdy. Dzięki temu erivo może sprawnie poruszać się w ciasnych przestrzeniach, a także dotrzymywać kroku np. wnukom w parku.

Precyzyjne i zwinne sterowanie
Bezstopniowy wybór prędkości (1-4 mph)

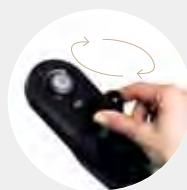

erivo - niezawodny towarzysz podróży

Odkryj swoje ulubione miejsca.

Erivo pomaga w życiu codziennym. Kompaktowe wymiary sprawiają, że można go przewozić nawet w małym bagażniku samochodowym. To idealny towarzysz następnej podróży. Niezależnie od tego, czy są to długo planowane rodzinne wakacje, czy spontaniczny wyjazd z przyjaciółmi - Ty i Twój erivo zawsze jesteście gotowi na nowe przeżycia. Jego trwała bateria ma zasięg 35 km, a jej ponowne pełne naładowanie zajmuje tylko 6 godzin. Wtedy eviro jest gotowy na kolejną przygodę.



08

erivo - zamierzanie do wyjazdu



Bądź tam; Poczuj wolność

Zdobywaj nowe doświadczenia

Eviro składa się bardzo prosto i można go łatwo transportować nawet w małym samochodzie, a w razie potrzeby rozkłada się równie łatwo. Odkrywaj nowe lokalizacje i ciesz się w pełni ulubionymi miejscami.

W czasie rozwoju technologicznego, położyliśmy szczególny nacisk na komfort jazdy. Uzyskaliśmy go dzięki zintegrowanemu zawieszaniu oraz dużym tylnym kołom z pneumatycznymi oponami. To wszystko zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy, które są rzadko spotykane w składanych wózkach elektrycznych.



alber Mobilny.

erivo.

+ erivo® przegląd



Dodatkowe dane techniczne

Dostępne są dwa modele R10 i R11.
Model R11 ma taką samą specyfikację jak R10, oprócz akumulatora, oświetlenia i zasięgu*.

	R10	R11
Waga przesyłki:		
Bez akumulatora:	27kg	
Standardowa waga z akumulatorem:	2,3kg	
Waga akumulatora zamiennego:	4,5kg	
Zakres:	17km	35 km
Oświetlenie - zestaw:	Nie	Tak
Pojemność akumulatora		
Standardowy zestaw akumulatorowy:	11,0 Ah	30Ah
Opcjonalny zestaw akumulatorów zamiennych:	35,15 Ah	
Szerokość siedziska: 44,5 cm		
Głębokość siedziska: 46 cm		
Wysokość siedziska: 44,5 cm		
Całkowita długość: 90 cm		
Moc wyjściowa: 250 watów		
Maksymalna waga użytkownika:	148 kg	
Klasa ochrony: (zabezpieczenie przed zachłapaniem/zalaniem):	IPX4	

erivo®

alber

Wytrzymały i wygodny
wózek elektryczny

NOWOŚĆ



PARTNER MED POLSKA SP. Z O.O.
www.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy
Bytom ul. Chorzowska 30c
tel.: 327874086, 516 293 265

Oddział Warszawa, Salon Wystawowy:
ul. Górczewska 47
tel.: 603 590 213

Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911

Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

Nasz standard jakości: Twoje bezpieczeństwo!

Alber jest certyfikowany zgodnie z aktualną
normą zarządzania jakością ISO 13485 dla
wyrobów medycznych.

Zapewniamy ekologiczną produkcję
wyrobów dzięki naszemu systemowi
zarządzania środowiskowego,
certyfikowanemu zgodnie z ISO 14001.

Erivo posiada certyfikat EC zgodnie
z europejskim rozporządzeniem dotyczącym
wyrobów medycznych (MDR) 2017/745 oraz
jest dobrowolnie testowany i certyfikowany
przez TÜV Süd, zgodnie z aktualnie
obowiązującą edycją normy PN-EN 12184.

✚ **erivo**. Zawsze z Tobą.