



Clematis[®] Pro

Nowoczesne wózki z zaawansowaną funkcją kołyski



Mniejsze siły ścinania. Większy komfort.

Wyposażony w system podwójnej stabilności - Dual Stability System



Yes, you can.[®]

Nowa i zaawansowana technologia Clematis® Pro

Jeszcze bardziej ulepszyliśmy naszą gamę wózków Clematis® Pro z funkcją kołyski. Udogodnienia takie jak: niewielkie rozmiary, trwała konstrukcja i bezproblemowa regulacja, to wyznaczniki standardów w projektowaniu pasywnych wózków inwalidzkich.



Bezkonkurencyjny design

Nasz nowy wózek Clematis Pro został zaprojektowany, aby pomóc zminimalizować siły ścinania, poprawić rozkład nacisku i zmaksymalizować komfort.

Clematis Pro nadal znajduje się w czołówce projektów wózków inwalidzkich z odchylaniem w fotela, z funkcją tzw. kołyski. W niedawnym niezależnym badaniu badawczym* analizowano wpływ wózków inwalidzkich z funkcją odchylecia zarówno na ciśnienie w pozycji siedzącej, jak i krążenie krwi. Badanie wykazało, że istnieje istotny związek między równoczesnym korzystaniem z funkcji pochylenia i kołyski. Efektem tego był pozytywny wpływ na krążenie krwi i redystrybucję nacisku.

Dual Stability System - System podwójnej stabilności

Nasz system z przenoszeniem ciężaru zapewnia doskonałą stabilność wózka w każdej pozycji pochylenia i kołyski. Umieszczono w nim wysokie punkty obrotu, aby zmniejszyć siły ścinające.

Najwyższy komfort

Możesz wybrać między oparciem z regulacją pasami lub sztywnym oparciem. Oba dostępne z poduszką Laguna dla najwyższego komfortu i stabilności postawy.

Kompaktowy Design

Rama zapewnia doskonałą zwrotność nawet w ciasnych przestrzeniach. Tyłne koła zostały przesunięte do przodu, aby lepszy i łatwiej napędzać wózek samodzielnie.

NOWOŚĆ

1



Poprawiona sztywność

Wzmocniona płyta tylnego koła

2



Lepsza zwrotność

Bardziej aktywna pozycja tylnych kół

3



Więcej opcji poszerzenia siedziska

dla większego komfortu siedzenia



390 - 540 mm
w odstępach co 50 mm

E-Tilt
30°

(Standard 25°)

• Możliwość regulacji

- Kąt oparcia do 30°
- Odchylenie siedziska do 30°
- Regulowane podnóżki do 80°
- Wysokie punkty obrotu



• Regulowany kąt podnóżka

Możliwość uniesienia nóg, aby zapewnić wygodę w pozycji pochylonej i/lub półleżącej. Podkładka pod łydkę z regulacją wysokości i głębokości. Podnóżek z regulacją wysokości, głębokości, kąta i szerokości dla idealnego ułożenia stóp.

Opcje i akcesoria



• Matrx Contour Visco NG

Opcja: wysoce elastyczna i formowana poduszka 100% Visco zapewniająca większą stabilność i odciążenie.



• Concave arm pads

Łatwa do czyszczenia jednoczęściowa forma, która zapewnia, że ramię pozostaje na miejscu podczas ruchów pochylenia i kołyski. Więcej akcesoriów można znaleźć w broszurze "Akcesoria Rea".

* Rowland Zemp i in. „Wózek inwalidzki

Funkcje przestrzeni i pochylenia: wpływ na ciśnienia na powierzchnię ciała podczas siedzenia i przepływ krwi w okolicy kulszowej u osób starszych". BioMed Research International (2019).

• E-Tilt model

Clematis Pro jest dostępny zarówno w wersji standardowej, jak i E-Tilt. Model E-Tilt ma zasilane elektrycznie przechyłanie i funkcję kołyski za pomocą prostego w obsłudze pilota, co zapewnia opiekunom bezpieczny i łatwy sposób przenoszenia ciężaru użytkowników. Oferuje również większą niezależność, a także ma możliwość zablokowania funkcji pochylenia, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu. Pilot można łatwo przymocować do haka na osłonie bocznej, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.



• Modułowe oparcie

Szybka i łatwa konfiguracja oparcia w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Trzy opcje oparcia \ zapewniają precyzyjne dopasowanie do różnych potrzeb użytkownika.




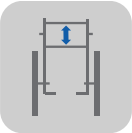
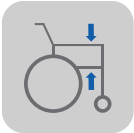



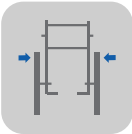








• Antytipery

Gruntownie testowane, pomagają opiekunom, asystentom łatwiej przechylać wózek podczas pokonywania przeszkód, takich jak stopnie, a także zmniejszać opór toczenia.

Dane techniczne

For more comprehensive information about this product, including the user manual, please visit your local Invacare website.

					
	Seat width ▼	Seat depth ▼	Seat height ▼	Backrest height ▼	Armrest height ▼
	Fixed: 390 – 490 mm, in increments of 50 mm		Fixed: 420 – 480 mm	400 – 450 mm	570 – 710 mm
Clematis Pro	Adjustable: 390 – 590 mm, in increments of 50 mm		Adjustable: 430 – 500 mm		230 – 350 mm
Clematis Pro E-Tilt					
					
	Length of footrests ▼	Seat angle ▼	Backrest angle ▼	Driving unit / overall width ▼	Total height ▼
Clematis Pro	355 – 465 mm	0° – 25°	0° – 30°	605 – 770 mm	1200 – 1550 mm
Clematis Pro E-Tilt	355 – 465 mm	0° – 30°	0° – 30°		1200 – 1550 mm
					
	Total length inc. footrests ▼	Total weight ▼	Max. user weight ▼	Transport weight ▼	Maximum slope for use of parking brake ▼
Clematis Pro	955 – 1470 mm	from 37.5 kg	135 kg	from 20 kg	7°
Clematis Pro E-Tilt	955 – 1470 mm		135 kg	from 25.5 kg	7°

inc. battery

Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International.

Black
TR26

Upholstery

Pearl
beige

Frame colour

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

"PARTNER" Szmidi-Banyś Sp.J.
Ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
Te. +48 516293265
32 733 7999 lub 32 787 40 86
mail: biuro@kuschall.eu
<https://partner-med.pl>

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved.
All information quoted is believed to be correct at time of print.
Invacare reserves the right to alter product specifications
without prior consultation. Invacare Clematis Pro - EU - 01/2022 - V1

